

# Dispenser for Oppkastpose

- Enkel håndtering
- Universal feste for skruer, passer alle tidligere holdere
- Åpning som gjør at antallet poser i holderen, er synlige
- Lett å tørke av, tåler alle vanlige rengjøringsmidler som blir brukt i sykehusvesenet
- Lett å fylle på, posene sitter sikkert og de dras ut med et lett rykk
- Holderen kan gjenvinnes og har beste miljø-klassifisering i "SundaHus Registeret"
- Holderene har plass til 50/25 poser




Artikkelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
601133K	Dispenser stor (for ca 50 poser)	1/5
601131K	Dispenser liten (for ca 25 poser)	1/10

Avd.fp. = minste kvantitet / bestilling




Materiale: Resirkulerbar PP  
Tåler etanolbasert rengjøringsmiddel og varme +120°C

# MEDI PLAST

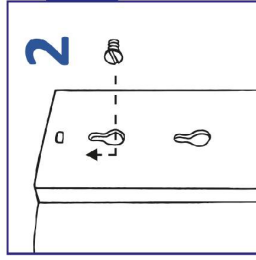


**1 & 2**  
Skru skruene fast i vegg og heng deretter dispenseren opp på dem. Universalfeste for skruer som passer alle tidligere holdere, uansett størrelse eller produsent.

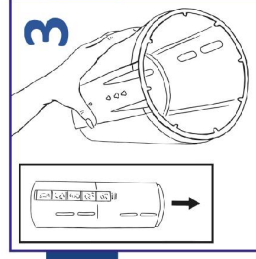


**3.** For at dispenseren skal fungere korrekt, må hullene med de åtte pinnene rettes nedover.



**4.** Ved påfylling – sørg for å sette poser i riktig retning.

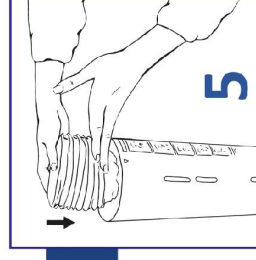

**5.** Ved påfylling må dispenseren fylles på fra toppen.

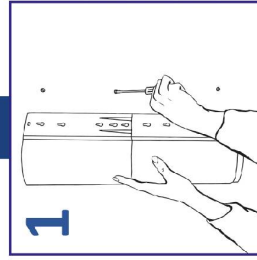

**6.** Trekk ut en pose med et lett rykk.

Montering av dispenser

Tlf 32 88 11 00  
mediplast@mediplast.no  
www.mediplast.com

For ytterligere informasjon