



**ME
COVERS®**
ADDS INTEGRITY

MECOVERS-ALAVARTALOSUOJA

Tekee tutkimuksesta miellyttävämmän

MeCovers on potilaalle tarkoitettu hame, joka tekee alavartalon lääketieteellisistä tutkimuksista miellyttävämpiä.

Hameella potilas voi peittää haluamansa kehon osat. Näin syntyy vähemmän negatiivisia kokemuksia, joissa potilas tuntee itsensä suojaattomaksi tai jolloin potilas ei tunne hallitsevansa tilannetta.

MeCovers on unisex-tuote, joka muuttaa ja parantaa kohtaamisia terveydenhuollon parissa sekä naisille että miehille. Se suojaa potilasta ja tuo tunteen tilanteen hallinnasta.


MeCovers on tarkoitettu erityisesti gynekologisten, urologisten ja urogynekologisten tutkimusten yhteydessä käytettäväksi. Sitä voi käyttää missä vain sellaisissa terveydenhuollon tutkimuksissa, joissa vain tietty osa kehosta täytyy paljastaa.

MeCovers on kertakäyttöinen tuote, joka pysyy paikallaan kuminauhan avulla. Hame puetaan vetämällä se päälle ylä- tai alakautta. Aukon asentoa voidaan muuttaa tutkimukseen sopivaksi.

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
K6600013	MeCovers hame	10/100
K6600014	MeCovers hame	150/150
D6600010	Annostelija MeCovers hameille	1/4

Os.pakk = pienin toim.erä

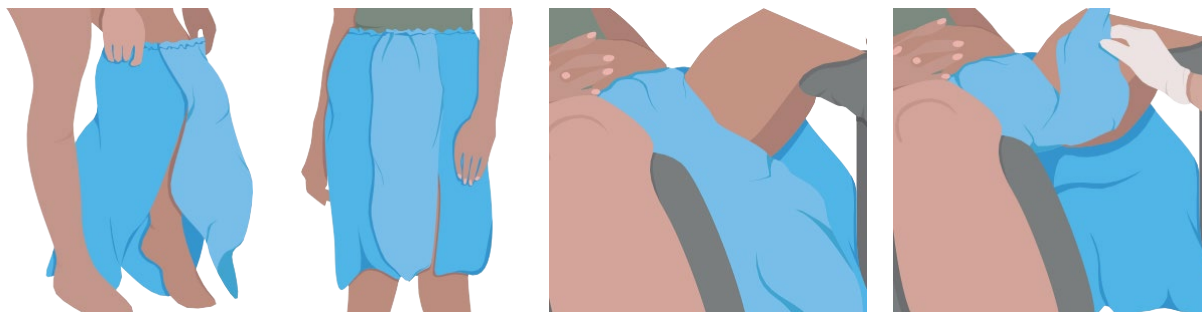


HUOMIO! Tärkeää tietoa

- MeCovers ei ole steriili, joten sitä ei saa käyttää vaurioituneella iholla tai avotoimenpiteissä. Potilaan vaurioitunut iho on sidottava ennen hameen pukemista.
- Vähäistä sähkövarausta voi esiintyä. Älä käytä sähköstaattisille purkauksille herkkiä sähköisiä välineitä samaan aikaan.
- Hametta valmistetaan yhdessä koossa. Terveystieteellisten laitteen henkilöstön tulee opastaa potilasta: jos hame on liian pitkä, potilaan on kannateltava sitä kävellessään.

100% polypropyleenia

HUOMIO! Tuote voi sulaa korkean lämpötilan tai avotulen vaikutuksesta

Lääketieteellisten laitteiden asetuksen (EU) MDR 2017/745 mukainen, luokka I, ei -steriili

