

multifixTM gentle

Universell
feste anordning for
medisinske slanger


Med **silikonteknologi** for
atraumatiske pasientopplevelser



optimummedical[®]



Universell
festeordning
for medisinske slanger

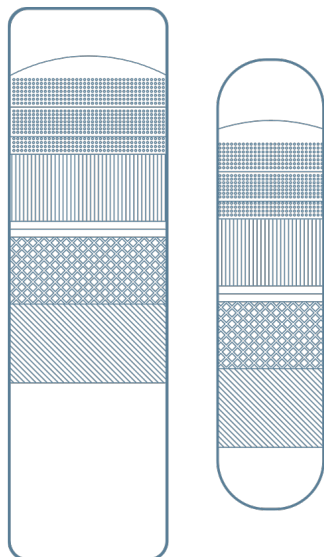

Stor



Liten



Opptil 7 dager

Sikker, pålitelig og skånsom

Multi Fix Gentle er en universal-festeordning for medisinske slanger og urinkatetre. Den har blitt utviklet for komfortabel festing, og gir pasienten selvtilit til å bevege seg fritt rundt.

Multi Fix Gentle er tilgjengelig i 2 størrelser for å dekke en rekke bruksområder, og hver kan brukes i opptil 7 dager.

'Skikkelig festing er en prioritet' ¹

Multi Fix Gentle utnytter myk silikon-teknologi for å sikre enkel bruk, reposisjonering og minimalt med traume ved fjerning.

GELREMSE AV
MYK SILIKON
SOM KAN KLEBES
OM IGJEN

Fordi '....Noen pasienter lider av nedsatt hudintegritet som gjør stabilisering mer utfordrende' ²


Multi Fix Gentle er utformet for å tilpasse seg huden med en gelremse av myk silikon som kan klebes om igjen, hvilket byr på en rekke pasientfokuserte fordeler som:

- Atraumatisk fjerning fra huden uten bruk av løsninger for å løse opp klisteret
- Ingen klebrige rester
- Tilpasset alle hudtyper gjennom flere kontaktpunkter
- Kan påføres samme hudområde gjentatte ganger
- Feste som kan klebes om igjen åpner for enkel reposisjonering
- Ingen komplekse hudforberedelser er nødvendig (intet behov for å barbere hårete hud før bruk)
- Redusert risiko for allergiske reaksjoner takket være silikonteknologi
- Vanntett, pustende og gjennomskinnelig

TILBYR EFFEKTIV SLANGEFIKSERING

Egnet for fiksering av en rekke medisinske slanger

- Kan fjerne og reposisjonere slanger
- Legger ikke igjen rester på slangene
- Kan tilpasses en rekke slangediametre

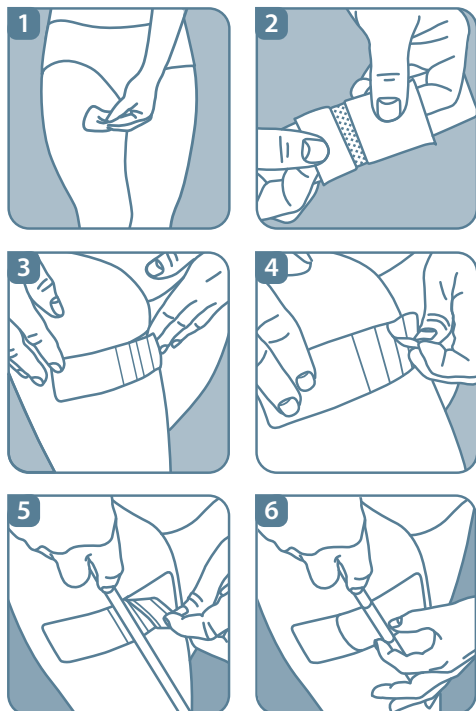

BRUKSANVISNING

- 1 • Pass på at huden er ren og tørr (intet behov for å klargjøre huden eller barbere seg)
- 2 • Fjern støtten fra Multi Fix Gentle
- 3 • Plasser Multi Fix Gentle på det ønskede hudområdet og jevn ut til den sitter
- 4 • Løft den fremre tappen på Multi Fix Gentle-remsen og fjern sikkerhetspapiret for åpne for klisteret
- 5 • Plasser kateteret eller slangen på basen og fest klistertappen tilbake på plass igjen over kateteret eller slangen for å sikre
- 6 • Pass på at kateteret eller slangen ikke er i spenn og at du kan bevege deg komfortabelt rundt når den er på plass.

Dersom du må reposisjonere multifix Gentle, er det bare til å ta den av og feste den på huden igjen. I tillegg kan slangene reposisjoneres etter behov.

Art.nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Indre forpakning	Ytre forpakning
603030	Multi Fix Gentle (stor)	140X40mm	10 stk	200 stk
603031	Multi Fix Gentle (liten)	110X25mm	10 stk	200 stk

REFERANSER

¹ Bell M A (2010) Severe Indwelling Urinary Catheter-Associated Urethral Erosion in four elderly men. Ostomy and Wound Management. December 2010 pp36-39

² Callan L. & Parker D. et al. (2012) Wound, Ostomy and Continence Nurse Society, Clinical Practice Continence Committee. Indwelling Urinary Catheter Securement: Best Practice for Clinicians; Available at <http://www.faet.org/docs/indwellingurinarycathetersecurement.pdf>

Vi er spesialister på fikseringsprodukter.

Finn ut mer om **Optimum Medical**-produkter,
inkludert **Ugo Fix**-linjen vår, ved å besøke:

www.optimummedical.co.uk



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Mediplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00 | mediplast@mediplast.no | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

