

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugo fix™
catheter strap
(kateterstropper)



Konstruert for å støtte
urinrørskatetere, suprapubiske
katetre og skjedesystemer



optimummedical®

Ugo fix

catheter strap


I **Optimum Medical** forstår vi behovet for et sikkert og pålitelig kateter og benposefeste.

Vi har utviklet **Ugo Fix Catheter Strap** for å gi komfortabel støtte og gi pasienten trygghet til å bevege seg rundt fritt og sikkert.

Ugo Fix Catheter Strap er konstruert til å støtte urinrørskatetere, suprapubiske katetre og skjedesystemer. Den kan festes på plass på kateteret eller benposeslangen etter behov.

Sterke sider:


- Holder slanger i en fast stilling så ingen spenning belastes på urinrøret eller blærehalsen, men tillater naturlig bevegelse.
- Assisterer effektivt i å støtte vekten av benposen når den brukes sammen med Ugo Fix Sleeve.
- Praktisk og enkel design.
- Klar bruksanvisning som sikrer riktig montering.
- Gjenbrukbar og vaskbar hypoallergen tekstilstropp.
- Silikonteknologi sikrer et fast grep på huden uten å gli eller irritere.

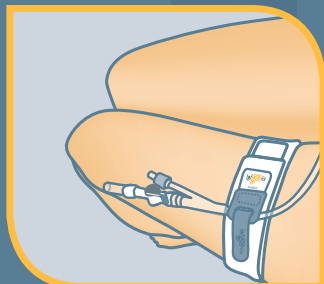


Bruke **Ugo Fix Catheter Strap** på låret



Bruke **Ugo Fix Catheter Strap** på magen

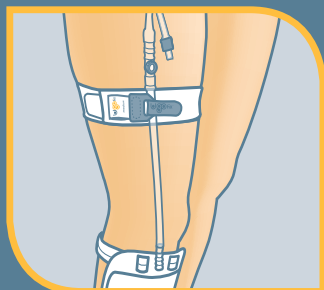

Bruke **Ugo Fix Catheter Strap** på benposeslangen

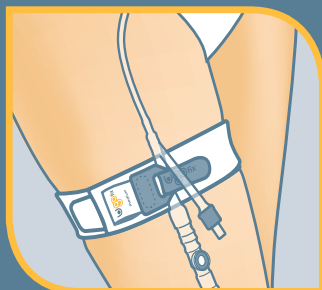

Bruke **Ugo Fix Catheter Strap** på kateterforgreningen




Vi anbefaler å bytte **Ugo Fix Catheter Strap** daglig eller oftere hvis stroppen blir skitten. Vi har pakket stroppene i sett med 5 stk. for å bistå med daglige bruk og vask-syklus for å gjøre det enkelt.

For å opprettholde optimal ytelse i din **Ugo Fix Catheter Strap**, anbefaler vi at du vasker stroppen i en vaskepose. For å bistå med dette leverer vi en vaskepose med hver eske **Ugo Fix Catheter Straps**.

LATEX FREE

Slik bruker du Ugo Fix Catheter Straps

Før montering er det viktig at du måler rundt benet eller magen og bruker riktig lengde.

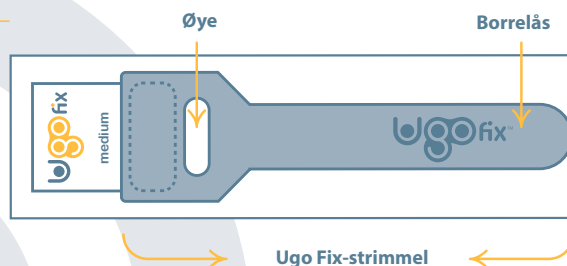

Før du fester slange/kateter

- 1 Plasser stroppen rundt enten lår eller mage i ønsket posisjon og med de to silikonledningene som vender ned mot huden. Sørg for at stroppen ikke er for stram og at Ugo Fixstrimmelen plasseres der den er lett tilgjengelig.



Feste slange/kateter

- 2 Løft **Ugo Fix**-strimmelen og (a) brett den over og under slangen og deretter (b) gjennom øyet.
- 3 Sørg for at **Ugo Fix**-strimmelen er i ønsket posisjon og er festet godt i slangen, fest deretter på plass på stroppen med borrelåsen.
- 4 Til slutt sørger du for at kateteret ikke trekker når du står og at du kan bevege deg rundt komfortabelt med kateteret.



Art.nr.	PIP kode	NPC kode	Produktbeskrivelse	Innvendig pakning	Utvendig pakning
603001	393-3371	n/a	Ugo Fix Catheter Strap ekstra kort - 35 cm	5 stk.	50 stk.
603002	393-3389	FSS1068	Ugo Fix Catheter Strap kort - 45 cm	5 stk.	50 stk.
603003	393-3397	FSS1069	Ugo Fix Catheter Strap medium - 80 cm	5 stk.	50 stk.
603009	393-3405	FSS1070	Ugo Fix Catheter Strap lang - 130 cm	5 stk.	50 stk.
603010	393-3413	n/a	Ugo Fix Catheter Strap ekstra lang - 180 cm	5 stk.	50 stk.



optimum medical
support™



Opplæring og utdanning for å optimere pasientomsorg

Besøk www.optimummedicalsupport.co.uk for å lese mer.

MILJØRETNINGSLINJER



Som produsent av medisinske produkter forstår vi at vi har et ansvar for å redusere vår påvirkning av miljøet og ta vare på naturressursene. Vi gjør vårt ytterste for å bruke minst mulig pakningsstørrelse for å minimalisere materialbruk og dermed bruk av deponier.



Ved transport av produkter sørger vi for at vare transportoperasjoner er så effektive og miljøvennlige som mulig.

Alt trykt markedsforingsmateruuekk er 50% resirkulert og sertifisert iht.FSCs sporbarhetssertifiseringsprogram



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Mediplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00 | mediplast@mediplast.no | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

