

multifix™ gentle

Universell
fästanordning för
medicinska slangar


Med **silikonteknik** för en
atraumatisk patientupplevelse



optimummedical®



Universell fästeanordning för medicinska slangar

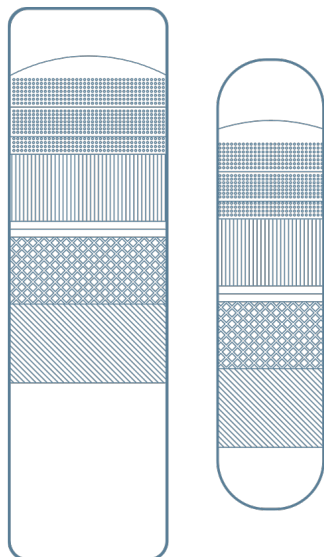

Stor



Liten



Upp till 7 dagar

Säker, pålitlig och skonsam

Multi Fix Gentle är en universell fästeanordning för medicinska slangar och urinvägskatetrar. Den har utvecklats för att tillhandahålla bekväm fixering, vilket ger patienten självförtroende att röra sig fritt.

Multi Fix Gentle finns i 2 storlekar för att passa en rad tillämpningar och var och en kan användas i upp till 7 dagar.

'Korrekt fastsättning är en prioritet'¹

Multi Fix Gentle utnyttjar mjuk silikonteknik för att säkerställa att den är lätt att applicera och ompositionera samt att minimalt trauma uppstår vid borttagning.

MJUK
GELREMSA I
ÅTERVIDHÄFTANDE
SILIKON

Eftersom '... Vissa patienter lider av försämrad hudintegritet vilket gör en stabilisering mer utmanande'²


Multi Fix Gentle har utformats för att anpassas till huden med en mjuk återhäftande gelremsa i silikon som innebär en rad patientrelaterade fördelar, inklusive:

- Atraumatiskt avlägsnande från huden utan användning av lösningsmedel för upplösning av häftmassa
- Lämnar inga klibbiga rester kvar
- Passar till alla hudtyper tack vare flera kontaktpunkter
- Kan appliceras upprepade gånger på samma hudområde
- Återhäftande yta möjliggör enkel ompositionering
- Inga besvärliga hudförberedelser krävs (inget behov av att raka hårig hud innan applicering)
- Minskad risk för allergiska reaktioner tack vare silikonteknik
- Duschbeständig, andningsbar och genomskinlig

ERBJUDER EFFEKTIV SLANGFIXERING

Lämplig för fixering av ett stort antal medicinska slangar

- Möjlighet att avlägsna och ompositionera slangar
- Lämnar inga rester på slangarna
- Kan rymma olika slangdiametrar

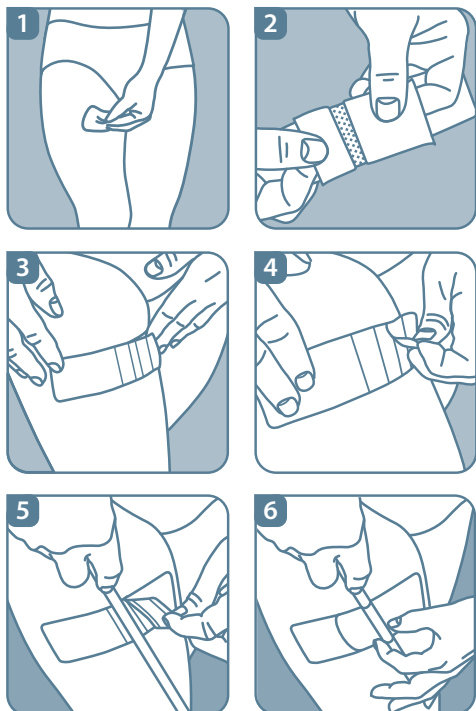

BRUKSANVISNING

- 1 • Se till att huden är ren och torr (det är inte nödvändigt att förbereda huden eller raka den)
- 2 • Avlägsna skyddspapperet från Multi Fix Gentle
- 3 • Placera Multi Fix Gentle på huden på önskad plats och släta ut
- 4 • Lyft den främre fliken på Multi Fix Gentle-remsan och avlägsna skyddspapperet för att exponera häftytan
- 5 • Placera katetern eller slangens på basplattan och sätt tillbaka klisterfliken på plats över katetern eller slangens för att fixera
- 6 • Se till att din kateter eller slang inte drar och att du kan röra dig bekvämt med den på plats.

Om du skulle behöva ompositionera Multi Fix Gentle kan den dras av och sättas tillbaka på huden. Dessutom kan slangens även ompositioneras efter behov.

Art.nr.	Produktbeskrivning	Storlek	Innerförpackning	Ytterförpackning
603030	Multi Fix Gentle (stor)	140X40mm	10 st	200 st
603031	Multi Fix Gentle (liten)	110X25mm	10 st	200 st

REFERANSER

¹ Bell M A (2010) Severe Indwelling Urinary Catheter-Associated Urethral Erosion in four elderly men. Ostomy and Wound Management. December 2010 pp36-39

² Callan L. & Parker D. et al. (2012) Wound, Ostomy and Continence Nurse Society, Clinical Practice Continence Committee. Indwelling Urinary Catheter Securement: Best Practice for Clinicians; Available at <http://www.faet.org/docs/indwellingurinarycathetersecurement.pdf>

Vi är specialister på fastsättningsprodukter.

Du kan läsa mer om **Optimum Medical**-produkter, inklusive vårt **Ugo Fix**-sortiment, om du besöker:

www.optimummedical.co.uk



optimummedical

MEDI PLAST®

Återförsäljare Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35 | mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

