


independence with confidence

www.optimummedical.de

**u go fix™**  
**gentle catheter clip**  
skånsom kateterklips

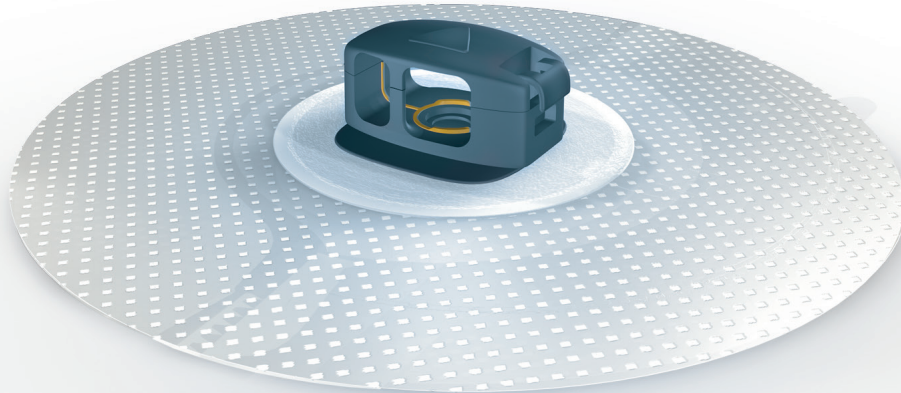

med **silikonteknologi**  
for atraumatisk pasientopplevelse

  
**optimummedical®**



*“Beste praksis angir at katetere festes for å unngå traume”<sup>1</sup>*

**NICE-retningslinjer**

## *“Riktig festing er en prioritet”<sup>2</sup>*

Sikker, pålitelig og varsom. **Ugo Fix Gentle** drar nytte av silikonteknologi for å sikre minimalt traume ved fjerning, og uten klebrige rester. Det gir komfortabel fiksering som gir pasientene friheten til å bevege seg fritt rundt.

**Ugo Fix Gentle** gir effektiv fiksering av 2-veis intravenøs urinkatetre ved bifurkasjonen av kateteret. Det muliggjør feste av urinrørs- og suprapubiske katetre som er festet til kateterventiler eller dreneringsposer.

## **MYK FLYTTBAR**


## **SILOKONKLISTER-GEL-PAD**

*fordi...“noen pasienter lider av hemmet hudintegritet som gjør stabilisering mer utfordrende”<sup>7</sup>*

## **SILIKONTEKNOLOGI**

Myke silikon “feste”-lag gir umiddelbart, varsomt feste til huden.

- Ideell for atraumatisk feste uten bruk av løsningsmidler for å løse opp festemiddelet
- Ingen klebrige rester
- Føyer seg effektivt til alle hudtyper ved flere kontaktpunkter
- Flyttbart feste gjør det enkelt å flytte og lukke hudinspeksjon
- Ideell for gjentatt bruk på samme hudområde
- Enkel peel-back og påføring uten behov for kompleks klargjøring
- Redusert risiko for allergiske reaksjoner på grunn av silikonteknologi
- Dusjsikker, pustende og gjennomsiktig

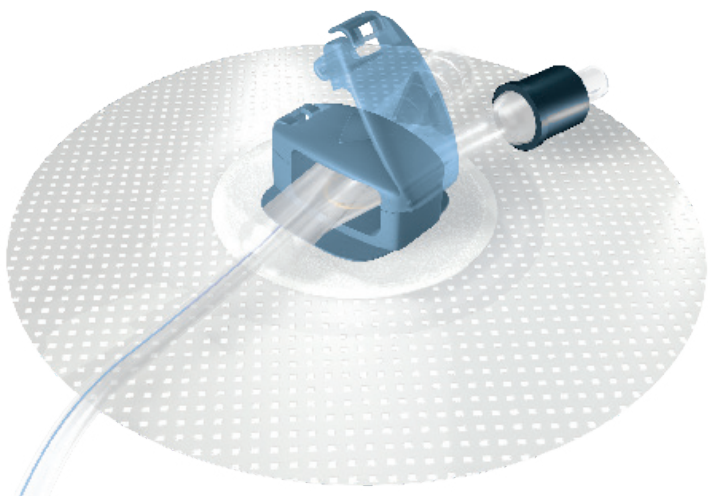

# DREIBAR KLIPS

*"Ved valg av den best egnede kateterfikseringsenheten, må det tas hensyn til behovet for å balansere bevegelse med effektiv stabilisering"<sup>4</sup>*

Fester sikkert kateteret på plass ved bifurkasjonen og holder unna huden for å forhindre traume

Dreibar klips-bevegelse muliggjør bevegelse i naturlig unisont med kroppen

Løftet pil for å indikere retning for innføring av kateteret

Intern silikonsammenføyning for effektivt grep av kateteret

Myk flyttbar silikonklister-gel-pad


Hake som er lett å åpne med positivt sensorisk klikk

| Art.nr.       | Produktbeskrivelse:                   | Innvendig pakning | Utvendig pakning |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>603004</b> | <b>Ugo Fix Gentle</b><br>kateterklips | <b>5 stk.</b>     | <b>100 stk.</b>  |

Hvis du har en forespørsel,  
vennligst ring  
**+44(0) 845 643 5479** eller send  
e-post til [ugo@optimummedical.co.uk](mailto:ugo@optimummedical.co.uk)

# BRUGSANVISNING

Det er viktig at du fikserer kateteret ditt til **Ugo Fix Gentle** før du setter på den myke flyttbare silikonklister-gel-paden til huden din.

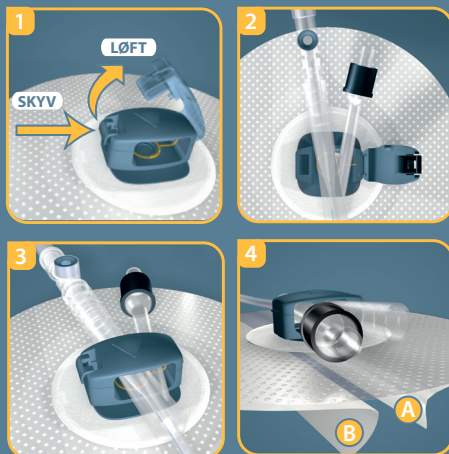

## FØR PÅFØRING PÅ HUDEN - FOR BRUK I OPPTIL 7 DAGER

- 1** ÅPNE KLIPS
  - Skyv og løft opp klipsen for å åpne **Ugo Fix Gentle**-lokket
  - Du vil kjenne et klikk
- 2** FØR INN KATETERET
  - Plasser bifurkasjonsdelen av kateteret i **Ugo Fix Gentle** (det passer kun en vei)
- 3** STENG LOKKET
  - Når det er på plass, fikser **Ugo Fix Gentle**-lokket ved å forsiktig trykke lokket ned
  - Du vil kjenne et klikk

## PÅFØRING PÅ HUDEN

- 4** NÅ SOM KATETERET ER FIKSERT I KLIPSEN, KAN UGO FIX GENTLE PÅFØRES HUDEN. - Sørg for at huden er ren og tørr før påføring.
  - Fjern baksiden (A) og påfør huden i ønsket posisjon
  - Fjern baksiden (B) og jevn den ut på plass
  - Sørg for at pilen øverst på klipsen peker mot blæren, og at kateteret ikke rykker når du står oppreist eller beveger deg rundt (vi anbefaler et mellomrom på 3-4 cm for å la kateteret bevege seg naturlig)
  - Om nødvendig, kan du flytte den myke silikon klister gel-paden ved å ta den forsiktig av og sette den på igjen ved behov



ADVARSEL: OPPBEVARES UTENFOR REKKEVIDDE FOR BARN

**VENNLIGST MERK:** **Ugo Fix Gentle** er designet for å fikse og støtte kateteret. Hvis kateteret er festet til urindreneringsposen, anbefales det å bruke ytterligere støtte for vekten av urinposen.

## REFERANSER

1. National Institute for Health and Care Excellence (2012) Guidance 139. Infection: Prevention and Control of Healthcare-associated Infections in Primary and Community Care. London: National Institute for Health and Care Excellence; Available at [www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)
2. Bell M A (2010) Severe Indwelling Urinary Catheter-Associated Urethral Erosion in four elderly men. Ostomy and Wound Management. December 2010 pp36-39
3. Callan L. & Parker D. et al. (2012) Wound, Ostomy and Continence Nurse Society, Clinical Practice Continence Committee. Indwelling Urinary Catheter Securement: Best Practice for Clinicians; Available at <http://www.faet.org/docs/indwellingurinarycathetersecurement.pdf>
4. Billington A et al. (2008) Minimizing the complications associated with migrating catheters. British Journal of Community Nursing. 13(11) pp502-506



**MEDIPLAST**

### Forhandler Mediplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen  
T 32 88 11 00 | [mediplast@mediplast.no](mailto:mediplast@mediplast.no) | [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

### Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom  
Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826  
[enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk) | [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

