

KilRoid®

ENGÅNGSINSTRUMENT FÖR
LIGERING AV HEMORROJDER

KilRoid™ är ett instrument för ligering av inre hemorrojder och är färdig att användas direkt. Ingen tidsödande rengöring eller desinfektion behövs. Instrumentet manövreras med en hand, vilket gör att användaren kan hantera både proktoskopet och KilRoid utan hjälp.

Att använda KilRoid är därför både tidsbesparande och kostnadseffektivt^{1,2}.


KilRoid kan användas tillsammans med ett videoendoskopiskt proktoskop som ett billigt alternativ till endoskopisk bandligering³.

Bruksanvisning KilRoid


Laddning av gummiband



Innan instrumentet används, måste KilRoid laddas med ett silikongummi-band. Det är lätt att ladda instrumentet med hjälp av den unika laddaren.

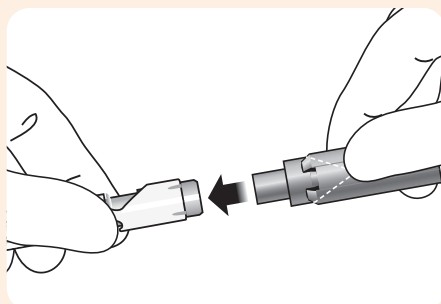


1. Skjut in laddningskonan i instrumentets sugmunstycke.
Obs! Försäkra dig om att laddningskonen och sugändan sluter tätt intill varandra. Det får inte finnas något mellanrum.

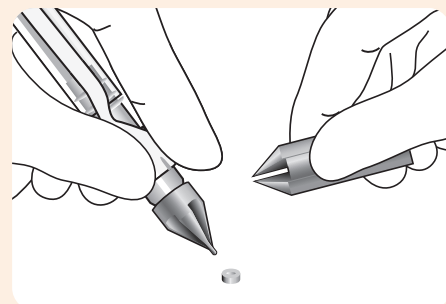


2. Placera ett silikongummi-band längst ut på laddningskonen.


Ingreppet

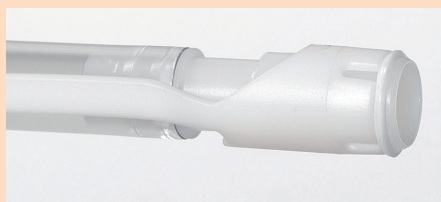

När KilRoid är laddad är den färdig att användas. Eftersom KilRoid kan skötas med en hand, kan användaren sköta ingreppet ensam och använder då ena handen till proktoskopet och den andra handen till KilRoid. Ingen assisterande personal behövs.

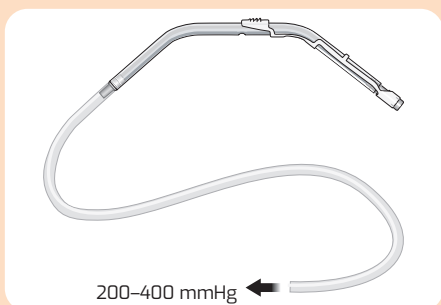


1. Anslut KilRoid till sugkällan.

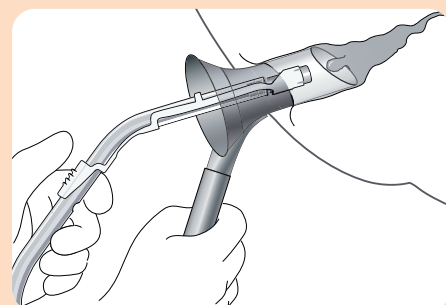


2. Lokalisera hemorrojden med hjälp av ett proktoskop. För in KilRoid genom proktoskopet tills hemorrojden är omsluten av sugmunstyckets öppning.


- **Praktisk** – rent instrument som alltid är klart att använda
- **Tidsbesparande** – ingen rengöring eller desinfektion krävs
- **Manövreras med en hand** – Ingen assisterande personal behövs
- **Bättre sikt och ökad precision**
- **Hygienisk** – skyddar patienten, operatören och vårdpersonalen från infektioner² – efter användning kasseras produkten, vilket eliminerar risken för en korsinfektion
- **Unik laddare** – lätt att ladda med gummiband
- **Latexfria gummiband** – minskad risk för allergiska reaktioner

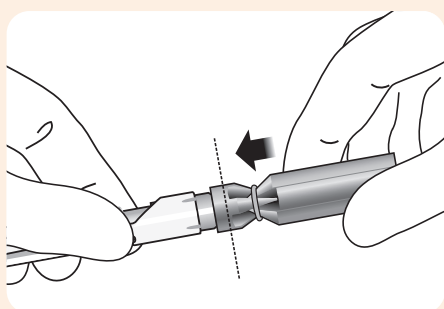


3. Placera expansionshylsan längst ut på laddningskonan och skjut ihop de båda delarna. Gummibandet kommer då att vidgas och glida över på laddningskonens bas.

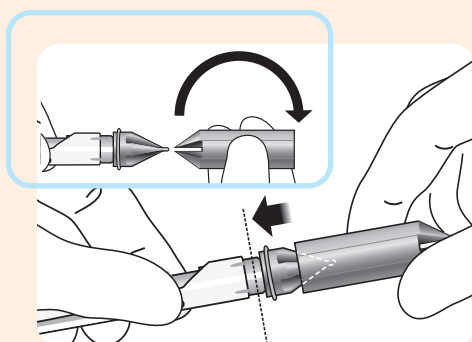


4. Dra tillbaka expanderkonen från laddningskonen, vrid expanderkonen 180°, vilket vänder expanderkonens öppna ända mot laddningskonen. Skjut över silikongummibandet på instrumentets sugända.

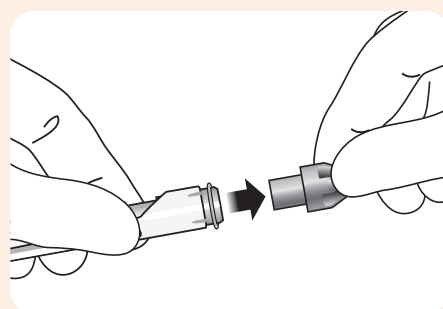


5. Avlägsna laddningskonan. Silikongummibandet sitter nu på sugmunstycket och instrumentet är klart att använda.

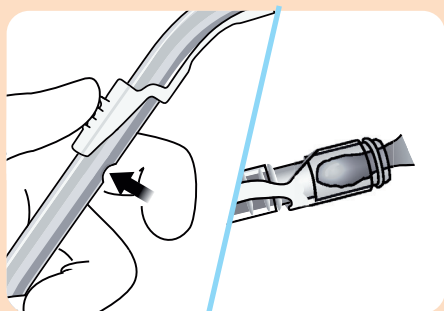


3. Vakuump Kontrollhållet täpps till (med ett finger) och hemorrojden sugs in i instrumentet.

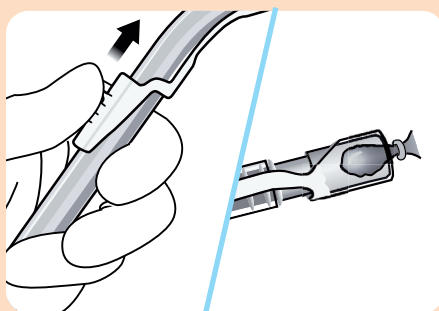

4. Utlösaren manövreras genom att den skjuts framåt med tummen. Det skjuter iväg bandet från instrumentet och får bandet att sluta till om hemorrojdens hals.

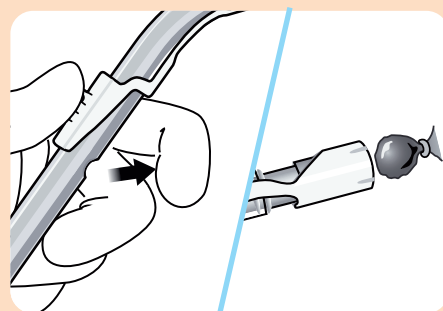

5. Släpp kontrollhållet och avlägsna instrumentet.
Om fler hemorrojder ska behandlas på samma patient, kan KilRoid laddas om med ytterligare gummiband. Släng KilRoid när behandlingen av patienten är avslutad.

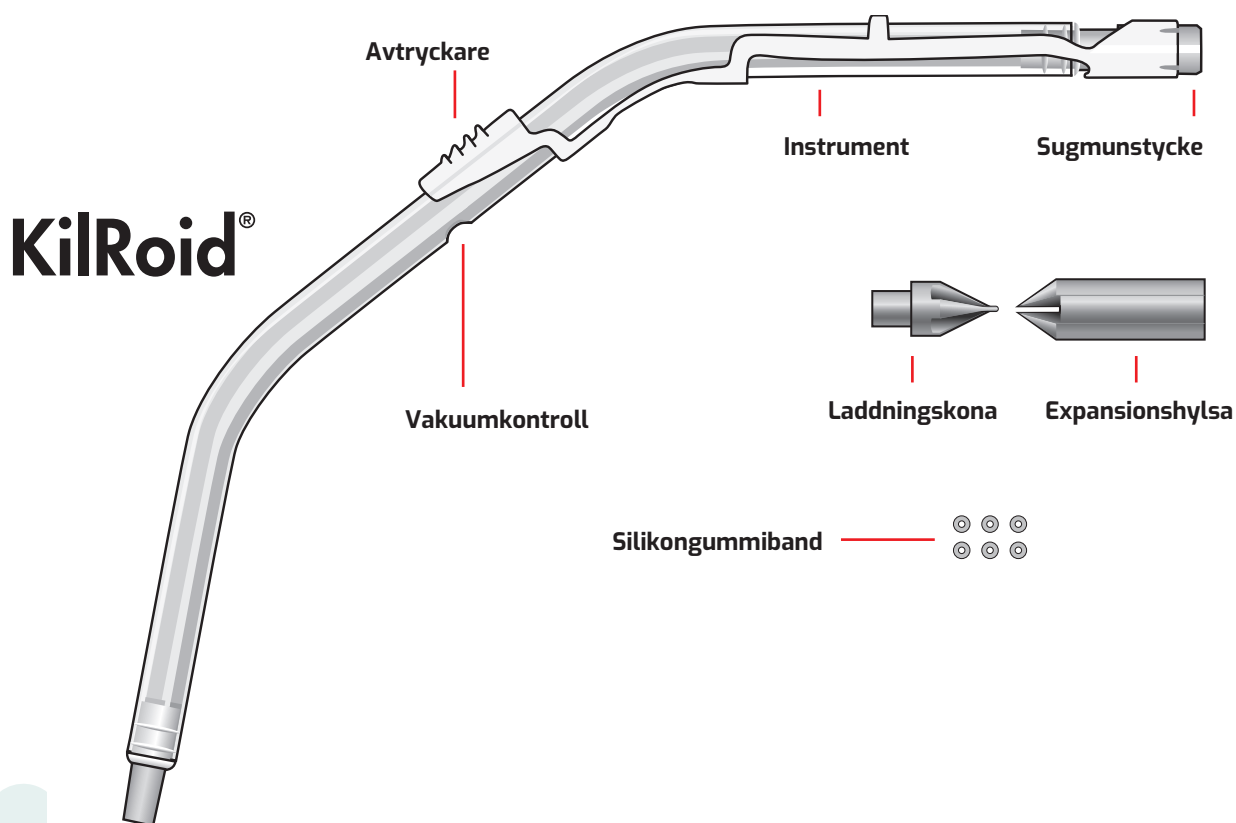

Beskrivning

Material

PETG (instrument), PVC (slang), polyamid (avtryckare), polypropylen (laddningskona), ABS (expansionshylsa, slangkoppling), silikon (gummiband).

Engångsbruk

Samtliga komponenter är avsedda för engångsbruk. Använd inte instrumentet om förpackningen är öppnad eller skadad.

Produktsortiment – KilRoid™

Ref nr

67401 1x30 KilRoid™ med 2m slang
67400 1x30 KilRoid™ utan slang

Referenser:

1. Gallo, G et al.: Techniques in Coloproctology (2020) 24:145–164
2. Salgueiro, P et al.: GE Port J Gastroenterol 2020;27:90–102
3. Dickey W, Garrett D, Am J Gastroenterol, 2000;95:1714–16.

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com