



KilRoid®

ENGANGSINSTRUMENT FOR
VAKUUMASSISTERT LIGERING AV
HEMORROIDER

KilRoid™ er et engangsinstrument for vakuumassistert ligering av hemorroider som er klart til bruk. Ingen rengjøring eller desinfisering er nød-vendig. KilRoid opereres med en hånd – operatøren kan kontrollere både proktoskopet og KilRoid uten behov for

assistanse. Dette betyr at KilRoid er både tidsbesparende og kostnadseffektivt (1, 2).


Når bedre sikt ønskes kan KilRoid benyttes sammen med et video-endoskopisk proktoskop som et rimelig alternativ til endoskopisk strikkligering (3).

Bruksanvisning KilRoid


Lading



Før ligeringen starter må KilRoid lades med en silikonstrikk. Ladingen utføres enkelt med den unike ladeadapteren.

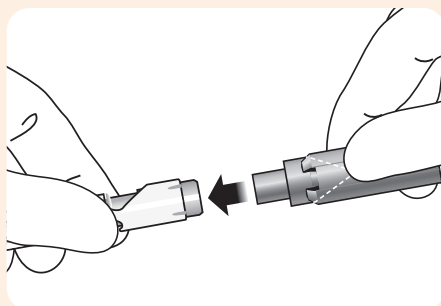


1. Sett ladekonen inn i sugemunnstykket på KilRoid.
NB! Se til at ladekonen og sugemunnstykket er trykket helt sammen og at det ikke finnes noen glippe mellom dem.

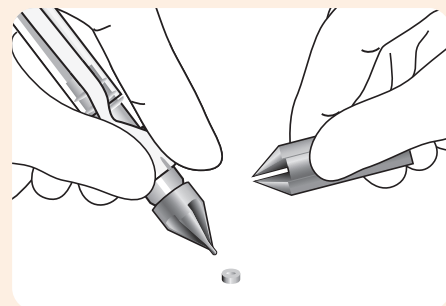


2. Plasser en silikonstrikk på tuppen av ladekonen.


Betjening

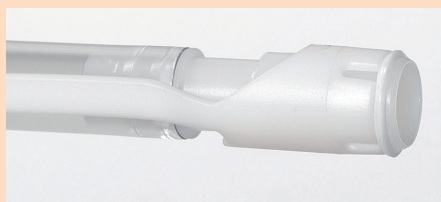

Når den er ladet er KilRoid klar til bruk. Siden KilRoid betjenes med en hånd kan operatøren utføre ligaturen alene. En hånd til proktoskopet og en hånd til KilRoid. Ingen assistanse er nødvendig.

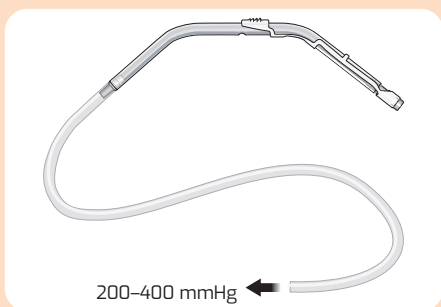


1. Koble KilRoid til sugekilden.

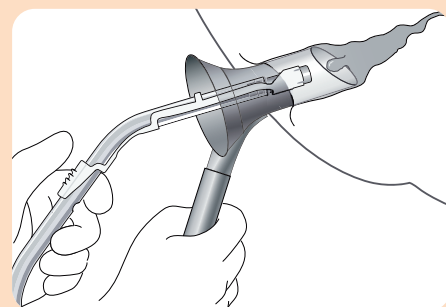


2. Lokaliser hemorroiden gjennom proktoskopet. KilRoid føres gjennom proktoskopet inntil hemorroiden omslutes av sugemunnstykkets lumen.


- **Enkelt** – alltid rent instrument klart til bruk
- **Tidsbesparende** – ingen rengjøring og desinfisering, flere pasienter kan behandles
- **Ingen assistanse nødvendig** – betjenes med en hånd, bedr sikt og økt presisjon
- **Bättre sikt och ökad precision**
- **Hygienisk** – beskytter pasient, opera tør og pleiepersonell mot infeksjoner (2), at produktet destrueres etter bruk eliminerer risikoen for kryss infeksjoner
- **Unik lademekanisme** – enkel lading av strikker
- **Lateksfrie strikker** – reduserer risikoen for allergiske reaksjoner

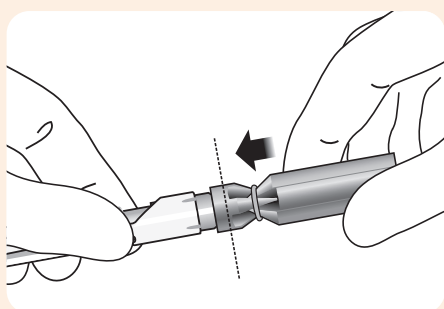


3. Plasser ekspanderkonen på tuppen av ladekonen og skyv de to delene sammen. Dette vil utvide silikonstrikken og skyve den inn på ladekonen.

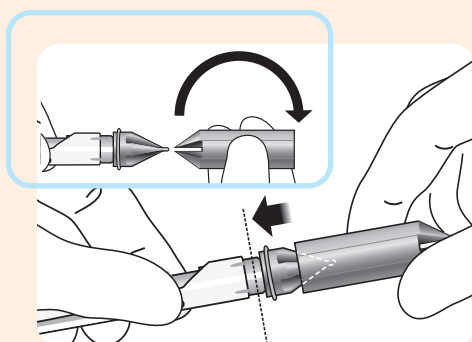


4. Trekk ekspanderkonen fra ladekonen. Snu ekspanderkonen 180° og bruk den flate enden til å skyve silikonstrikken inn på sugemunnstykket.

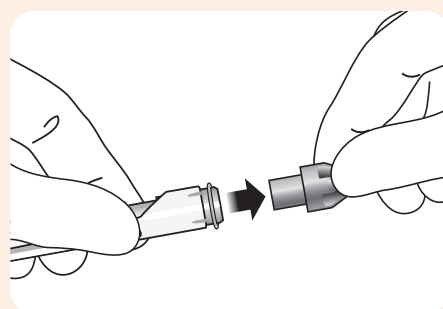


5. Ta bort ladekonen. Silikonstrikken er nå montert på sugemunnstykket og KilRoid er klar til bruk.

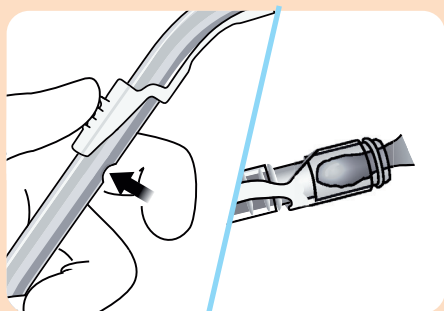


3. Vakuumkontrollhullet stenges (med en finger) og hemorroiden suges inn i sugemunnstykket.

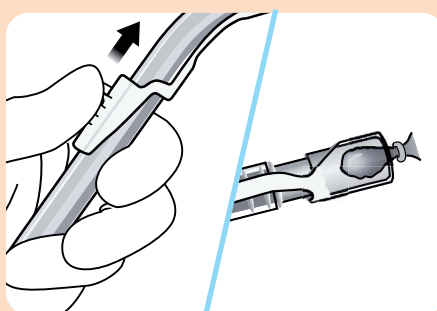

4. Avtrekkeren betjenes ved å skyve den frem over med tommelen. Strikken skytes fra sugemunnstykket og blokkerer hemorroiden ved roten.

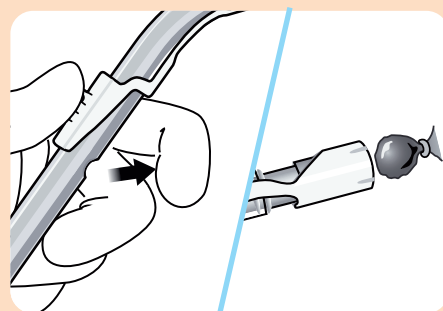

5. KilRoid kan trekkes ut etter at vakuum kontrollhullet er frigjort. Dersom flere hemorroider skal behandles hos samme pasient kan KilRoid lades med en ny silikonstrikk ved hjelp av ladeadapteren. KilRoid destrueres når behandlingen av pasienten er avsluttet.

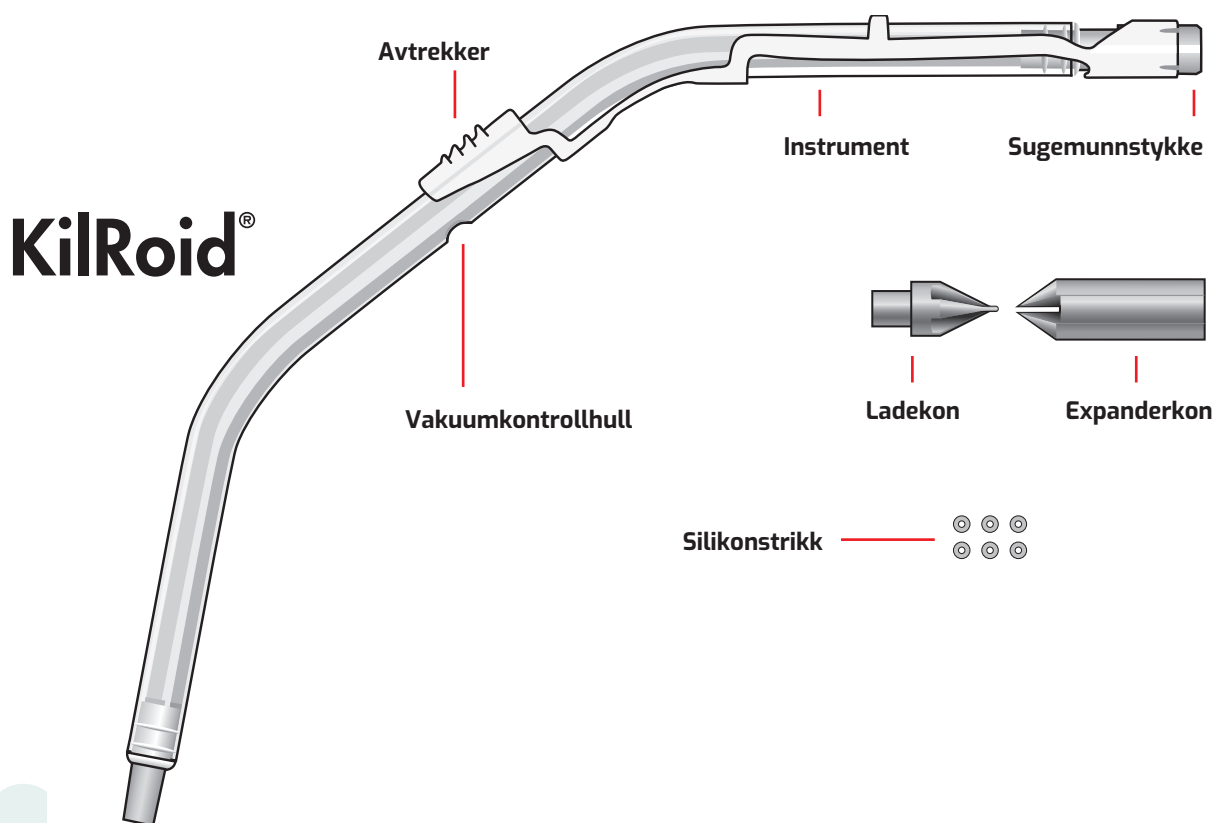

Beskrivelse

Materiale

PETG (instrument), PVC (slange), polyamid (avtrekker), polypropylene (ladekon), ABS (ekspanderkon, konnektor), silikon (strikk).

Engangsbruk

Alle komponenter er ment brukt som engangsutstyr. Brukes ikke dersom pakningen er åpnet eller skadet.

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Produktspekter – KilRoid™

Ref nr

67401 1x30 KilRoid™ med 2m slange
67400 1x30 KilRoid™ uten slange

Referanser:

1. Gallo, G et al.: Techniques in Coloproctology (2020) 24:145–164
2. Salgueiro, P et al.: GE Port J Gastroenterol 2020;27:90–102
3. Dickey W, Garrett D, Am J Gastroenterol, 2000;95:1714–16.