




THORAXDRÄNAGE

Thorax kateter, PVC

rak eller vinklad

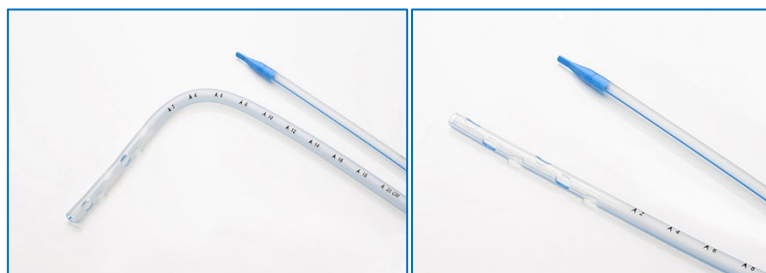

Redax thoraxkateter i PVC är utvecklade med en polyuretantäckt insida som säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation. Katetern är flexibel och följsam vilket minimerar risken för knickbildning.

PRODUKTFAKTA


- Toppen är förseglad med ett blått skyddshölje som förenklar införandet och tillåter att förkortas till önskad längd och/eller vinkel.
- Bi-konisk konnektor passar de flesta thoraxdränage.
- Katetern har 6 ovala hål i olika höjd.
- Katetern har röntgenmarkering tillsammans med tydlig djupmarkering för att underlätta korrekt positionering.
- Finns i storlekar från CH 16 till 40.
- PVC material av medicinsk kvalitet med polyuretantäckt insida för att minska risken för klottnig och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- Thorax katetrarna är 45 cm långa och finns både som raka eller högvinklade.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm	Avd./Trpt fp
6020916	5.3	16	45 - vinklad	10/10
6020920	6.6	20	45 - vinklad	10/10
6020924	8.0	24	45 - vinklad	10/10
6020928	9.3	28	45 - vinklad	10/10
6020930	10.0	30	45 - vinklad	10/10
6020932	10.6	32	45 - vinklad	10/10
6020936	12.0	36	45 - vinklad	10/10
6020940	13.3	40	45 - vinklad	10/10
6021016	5.3	16	45 - rak	25/25
6021020	6.6	20	45 - rak	25/25
6021024	8.0	24	45 - rak	25/25
6021028	9.3	28	45 - rak	25/25
6021030	10.0	30	45 - rak	25/25
6021032	10.6	32	45 - rak	25/25
6021036	12.0	36	45 - rak	25/25
6021040	13.3	40	45 - rak	25/25

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: PVC, mjukgörare DINCH Biokompabilitet och haemokompabilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4 Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i peel-pack med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Thorax kateter, silikon rak eller vinklad

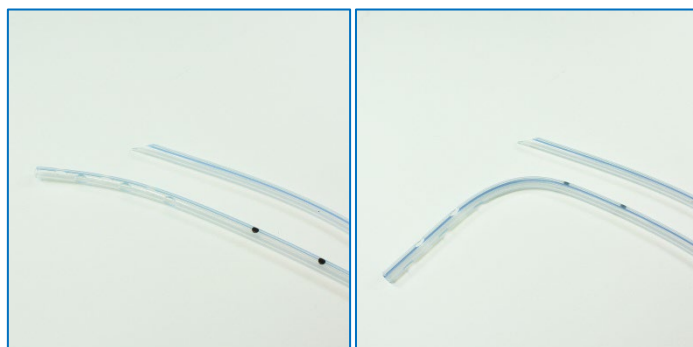

Redax thoraxkateter i Silikon är utvecklade med en polyuretantäckt insida som säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation. Katetern är flexibel och följsam vilket minimerar risken för knickbildning.

PRODUKTFAKTA

- Toppen är avfasad vilket förenklar införandet och tillåter att förkortas till önskad längd och/eller vinkel.
- Katetern har 6 ovala hål i olika höjd.
- Katetern har röntgenmarkering tillsammans med tydlig djupmarkering för att underlätta korrekt positionering.
- Finns i storlekar från CH 12 till 36.
- Silikonmaterialet har medicinsk kvalitet med hög transparens för god visibilitet. Polyuretantäckt insida för att minska risken för klotting och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- Raka thoraxkatetrar finns i längderna 50 samt 70 cm. Högervinklade katetrar är 50 cm långa.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm	Avd./Trpt fp
6020812	4	12	50 - rak	20/20
6020815	5	15	50 - rak	20/20
6020818	6	18	50 - rak	20/20
6020821	7	21	50 - rak	20/20
6020824	8	24	50 - rak	20/20
6020828	9,3	28	50 - rak	20/20
6020830	10	30	50 - rak	20/20
6020833	11	33	50 - rak	20/20
6020836	12	36	50 - rak	20/20
6021824	8	24	50 - vinklad	20/20
6021828	9,3	28	50 - vinklad	20/20
6021830	10	30	50 - vinklad	20/20
6021833	11	33	50 - vinklad	20/20
6021836	12	36	50 - vinklad	20/20
6022824	8	24	70 - rak	20/20
6022828	9,3	28	70 - rak	20/20
6022830	10	30	70 - rak	20/20
6022833	11	33	70 - rak	20/20
6022836	12	36	70 - rak	20/20

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: Silikon, (Latex och ftalatfritt) Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i peel-pack med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Troakarkatetrar spetsig spets



Redax troakarkatetrar är tillverkad av genomskinlig termokänslig PVC över precisionstroakar i metall. Den polyuretantäckta insidan säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation.

PRODUKTFAKTA

- Röntgentät linje underlättar exakt positionering och djupmarkeringar i steg om 2 cm.
- Integrerad trattkoppling.
- Två dräneringsögon med slät finish.
- Finns i storlekar från Ch 16 till 32.
- PVC material av medicinsk kvalitet med polyuretantäckt insida för att minska risken för klottnng och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- Trorakarkatetrarna är 25 eller 42 cm långa.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm	Avd./Trpt fp
	6011216	5.3	16	25	10/10
	6011220	6.6	20	42	10/10
	6011224	8.0	24	42	10/10
	6011228	9.3	28	42	10/10
	6011232	10.6	32	42	10/10

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: PVC, mjukgörare DINCH Biokompabilitet och haemokompabilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4 Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i dubbla peel-pack med papper/plast PET/PE. Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Troakarkatetrar sluten spets



Redax troakarkatetrar är tillverkad av genomskinlig termokänslig PVC över precisionstroakar i metall. Den polyuretantäckta insidan säkerställer ett högt flöde och minskar risken för koagulation.

PRODUKTFAKTA

- Röntgentät linje underlättar exakt positionering och djupmarkeringar i steg om 2 cm.
- Släta sidoögon och atraumatisk trubbig distal spets.
- Integrerad trattkoppling.
- Tre dräneringsögon med slät finish
- Finns i storlekar från CH 8 till 32.
- PVC material av medicinsk kvalitet med polyuretantäckt insida för att minska risken för klottnig och koagulation. Testad för biokompatibilitet och haemokompatibilitet.
- Trorakarkatetrarna finns i längderna 22, 25 och 40 cm.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr	Yttre diameter mm	Storlek CH	Längd cm	Avd./Trpt fp
	6021108	2.6	8	22	10/10
	6021110	3.3	10	22	10/10
	6021112	4.0	12	25	10/10
	6021116	5.3	16	25	10/10
	6021118	6.0	18	25	10/10
	6021120	6.6	20	40	10/10
	6021124	8.0	24	40	10/10
	6021128	9.3	28	40	10/10
	6021132	10.6	32	40	10/10

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: PVC, mjukgörare DINCH Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4 Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i dubbla peel-pack med papper/plast PET/PE. Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Smart drain Coaxial

4-kanaligt Silikon-dränage



Redax har designat Smart drain serien i mjuk silikon som bibehåller vacuum och dränerar såret även om dränaget utsätts för tryck från t ex kroppsrörelse. Smart drain coaxial är särskilt framtagen för kardio-thorax kirurgi. Dränaget har fyra längsgående kanaler på utsidan, en rymlig innerlumen samt fenestrerad ytterprofil som möjliggör dränering längs hela dränet.

PRODUKTFAKTA

- Silikon/Elastomer av medicinsk kvalitet. Vävnadsvänliga thrombo-resistenta silikon-dränage. Dränaget är mjukt och följer lätt kroppens kontur utan att knicka, vilket gör det till ett för patienten behagligt och säkert dränage med utmärkta egenskaper.
- Dränaget har en utmärkt transparens vilket underlättar inspektion.
- Röntgenlinje tillsammans med tydlig djupmarkering för att underlätta korrekt position.
- Dränagen har fyra ytterkanaler, innerlumen, samt fenestrerad ytterprofil.
- Coaxiala dränage är särskilt framtagna för kardio-thorax kirurgi.
- Erbjuds i storlekarna 24 CH och 28 CH.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr.	Typ	Yttre diameter mm	Inre diameter mm	Storlek CH	Troakar	Längd cm	Avd./Trpt fp.
	6024725	coaxial	8.2	5.3	24	NEJ	68	10/10
	6024726	coaxial	10.0	6.8	28	NEJ	68	10/10
	6024727	coaxial	8.2	5.3	24	NEJ	58	10/10
	6024729	coaxial	10.0	6.8	28	NEJ	58	10/10

Tillverkare	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Dränage: Silikon (Latex och ftalatfritt) Biokompatibilitet och haemokompatibilitet enligt den internationella Standarden UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt dubbelpackat i peel-pack med papper/plast PET/PE (yttre) (Inre) plastpåse: LDPE Formgjuten frp: OPA, PP, PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Patent coaxiala drän	PCT/EP2015/069655
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 och UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur 0° ÷ 60°C

Heimlich Ventil



Heimlich-ventilen används för att behandla spontan och spänningspneumothorax i akutsituationer och vid thoraxkirurgi.

PRODUKTFAKTA

- Enheten består av en plaststomme med en intern envägsventil.
- Heimlich-ventilen ansluts till katetern via den avsmalnande anslutningen. Ventilen låter luft ventileras ut från pneumothorax till atmosfären, men förhindrar ett reverserat flöde.
- Heimlich-ventilen finns även som ett komplett set med en förmonterad uppsamlingspåse. Uppsamlingspåsen på 2000 ml har en avtappningsventil för att tömma ut vätska och en luftventilationsventil som frigör luftläckor från patienten.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt fp
	6010530	Heimlich ventil	50/50
	6010531	Heimlich ventil med 2000 ml uppsamlingspåse	10/10

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Ventil: PVC – Mjukgörare TOTM Connection tube: Latexfritt gummi Styrene Ethylene / Botylene Styrene Uppsamlingspåse: PVC med mjukgörare TOTM UNI EN ISO 10993-1 samt UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Peel pack med papper/plast PET/PE (yttre) (inre) plastpåse LDPE Formgjuten frp: OPA PP PE
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	Klassifikation av Medical Equipment Drentech Vacuum Units: Klass II – typ B I enlighet med EN 60601-1 Degree of Protection Provided by Enclosures Code IPX0, I enlighet med EN 60529 Civab Code PERRSLDV, assigned by ITLATBS Tecnologie Biomediche e Scientifiche – Civab Laboratory based in Trieste (ITA)
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Perkutant Dränage Unico Standard



Unico Standard är en minimalt invasiv kateter, avsedd för att evakueras vätska och luft. Unico har en integrerad tvåvägsventil och Verres nål med trubbig infällbar spets för att uppnå säker och effektiv åtkomst.

KLINISKA INDIKATIONER

- Spontan och traumatisk pneumothorax.
- Hemothorax.
- Pleural effusion och återkommande onkologisk pleural effusion.
- Thorax-paracentes.
- Effusion.

PRODUKTFAKTA

- Komplet set innehållande kateter, verres nål, förlängningsslang, spruta, skalpell, klämma, peang samt uppsamlingspåse.
- Röntgentät kateter i Polyuretan.
- Vid långvarig användning kan katetern anslutas till förlängningsslang för enklare hantering.
- Katetern finns i storlekarna CH 9, 12 och 15.
- Går att ansluta till aktivt sugsystem.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

Artikelnr.	Beskrivnin	Längd kateter	CH	Avd./Trpt fp
6010800	Standard	14 cm	9	6/6
6010801	Standard	17 cm	12	6/6
6010802	Standard med förlängningsslang	14 cm	9	6/6
6010803	Standard med förlängningsslang	17 cm	12	6/6
10830	Standard med förlängningsslang	20 cm	15	6/6
10820	Standard XL med förlängningsslang	20 cm	9	6/6
10821	Standard XL med förlängningsslang	25 cm	12	6/6

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: 100 % röntgentät sjukhusklassad polyuretan Verres nål: rostfritt stål Förlängningsslang: PVC med TOTM Spruta: polyetylen och latexfritt gummi Skalpell: ABS och rostfritt stål Uppsamlingspåse med slang: PVC Dränanslutning: PVC Klämma: Nylon Peang: PP Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Steril peel-pack med papper/plast PET/PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax kvalitetssystem efterlever standarderna ISO 9001 och ISO 13485. Redax perkutana drän är certifierade med den CE 0123-märkning som utfärdas av TÜV Product Service (Tyskland).
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Perkutan Dränage Unico Forty



Unico Forty är en minimalt invasiv kateter, avsedd för att evakueras vätska och luft. Unico har en integrerad tvåvägsventil och Verres nål med trubbig infällbar spets för att uppnå säker och effektiv åtkomst.

KLINISKA INDIKATIONER

- Spontan och traumatisk pneumothorax.
- Hemothorax.
- Pleural effusion och återkommande onkologisk pleural effusion.
- Kirurgiska ingrepp på obesa patienter.

PRODUKTFAKTA

- Finns som komplett set innehållande kateter, verres nål, förlängningsslang, spruta, skalpell, klämma, peang samt uppsamlingspåse.
- Röntgentät kateter i Polyuretan.
- Vid långvarig användning kan katetern anslutas till förlängningsslang för enklare hantering.
- Katetern finns i storlekarna CH 9 och 12.
- Går att ansluta till aktivt sugsystem.
- Katetern är 40 cm lång.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr.	Längd kateter	CH	Avd./Trpt fp
	6010810	40 cm	9	6/6
	6010812	40 cm	12	6/6

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: 100 % röntgentät sjukhusklassad polyuretan Verres nål: rostfritt stål Förlängningsslang: PVC med TOTM Spruta: polyetylen och latexfritt gummi Skalpell: ABS och rostfritt stål Uppsamlingspåse med slang: PVC Dränanslutning: PVC Klämma: Nylon Peang: PP Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Steril peel-pack med papper/plast PET/PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax kvalitetssystem efterlever standarderna ISO 9001 och ISO 13485. Redax perkutana drän är certifierade med den CE 0123-märkning som utfärdas av TÜV Product Service (Tyskland).
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Perkutant Dränage Unico Multi



Unico Multi är en minimalt invasiv kateter, avsedd för att evakueras vätska och luft. Unico har en integrerad tvåvägsventil och en verres nål. Katetern har en pig tail funktion som förhindrar vävnadsskador.

KLINISKA INDIKATIONER

- Spontan och traumatisk pneumothorax.
- Hemothorax.
- Pleural effusion och återkommande onkologisk pleural effusion.
- Thorax-paracentes.
- Effusion.
- Ascites och tillämpning i bukhålan.

PRODUKTFAKTA

- Komplet set innehållande kateter, verres nål, förlängningsslang, spruta, skalpell, klämma, peang samt uppsamlingspåse.
- Röntgentät kateter i Polyuretan.
- Vid långvarig användning kan katetern anslutas till förlängningsslang för enklare hantering.
- Katetern finns i storlekarna CH 9, 12 och 15.
- Går att ansluta till aktivt sugsystem.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

Artikelnr.	Beskrivning	Längd kateter	Ch	Avd./Trpt.fp
6010816	Pigtail	22 cm	9	6/6
6010817	Pigtail	22 cm	12	6/6
6010818R	Pigtail med förlängningsslang	22 cm	9	6/6
6010819	Pigtail med förlängningsslang	22 cm	12	6/6
10831	Pigtail med förlängningsslang	22 cm	15	6/6

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: 100 % röntgentät sjukhusklassad polyuretan Verres nål: rostfritt stål Förlängningsslang: PVC med TOTM Spruta: polyetylen och latexfritt gummi Skalpell: ABS och rostfritt stål Uppsamlingspåse med slang: PVC Dränanslutning: PVC Klämma: Nylon Peang: PP Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Steril peel-pack med papper/plast PET/PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax kvalitetssystem efterlever standarderna ISO 9001 och ISO 13485. Redax perkutana drän är certifierade med den CE 0123-märkning som utfärdas av TÜV Product Service (Tyskland).
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Perkutant Dränage Unico J Seldinger



Unico J Seldinger är en minimalt invasiv kateter, avsedd för att evakueras vätska och luft. Unico har en integrerad tvåvägsventil, verres nål och en atraumatisk J-ledare.

KLINISKA INDIKATIONER

- Spontan och traumatisk pneumothorax.
- Hemothorax.
- Pleural effusion och återkommande onkologisk pleural effusion.
- Thorax-paracentes.
- Effusion.

PRODUKTFAKTA

- Komplet set innehållande kateter, verres nål, förlängningsslang, spruta, skalpell, klämma, peang samt uppsamlingspåse.
- Atraumatisk J-ledare för en mer exakt positionering.
- Röntgentät kateter i Polyuretan
- Katetern finns i storlekarna CH 9 och 12.
- Går att ansluta till aktivt sugsystem.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr.	Längd kateter	CH	Avd./Trpt fp
	10823	22 cm	9	6/6
	10824	22 cm	12	6/6

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Kateter: 100 % röntgentät sjukhusklassad polyuretan Verres nål: rostfritt stål Förlängningsslang: PVC med TOTM Spruta: polyetylen och latexfritt gummi Skalpell: ABS och rostfritt stål Uppsamlingspåse med slang: PVC Dränanslutning: PVC Klämma: Nylon Peang: PP Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Steril peel-pack med papper/plast PET/PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax kvalitetssystem efterlever standarderna ISO 9001 och ISO 13485. Redax perkutana drän är certifierade med den CE 0123-märkning som utfärdas av TÜV Product Service (Tyskland).
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C

Perkutant Dränage Unico Base



Unico Base är en minimalt invasiv kateter, avsedd för att evakueras vätska och luft. Försedd med Unico's integrerade tvåvägsventil och 13 Gauge verres nål.

KLINISKA INDIKATIONER

- Spontan och traumatisk pneumothorax.
- Pleural effusion

PRODUKTFAKTA

- Komplet set innehållande, verres nål, spruta, skalpell, samt uppsamlingspåse.
- Går att ansluta till aktivt sugsystem.
- Steril engångsprodukt.

TEKNISK DATA

	Artikelnr.	Längd	Nålstorlek	Avd./Trpt fp
	6010815	20 cm	13G	20/20

Tillverkare	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italy
Material	Verres nål: rostfritt stål Förlängningsslang: PVC med TOTM Spruta: polyetylen och latexfritt gummi Skalpell: ABS och rostfritt stål Uppsamlingspåse med slang: PVC Dränanslutning: PVC Latexfritt
Sterilisation	Ethylen Oxid
Hållbarhet	5 år
Förpackning	Sterilt peel-pack med papper/plast PET/PE Övrigt: PVC-fritt och återvinningsbart
Direktiv	Redax produkter uppfyller det Europeiska direktivet för medicinskt tekniska produkter: CE European Directive 93/42 EC och 2007/47/EC utfört av TÜV Product Service (Germany)
Klassifikation	Klass IIa - MDD 93/42 EC
Standard	UNI EN 1617 samt UNI EN 1618
Förvaring	Temperatur: 0° ÷ 60°C