

serres




Produkt
katalog

SERRES' sugesystemer er blevet fremstillet i Kauhajoki, Finland siden 1970 og distribueres i Sverige, Norge og Danmark af Mediplast.

Sugesystemet er et brugervenligt koncept til håndtering af væsker, og Serres' produkter bruges inden, under og efter godt 40.000 operationer dagligt verden over. De vigtigste egenskaber er:

- Brugervenligt
- Sikkert for patienter og personale
- Praktisk og hygiejnisk
- Miljøbevidst
- Smart emballage og logistik
- Enkelt at bruge

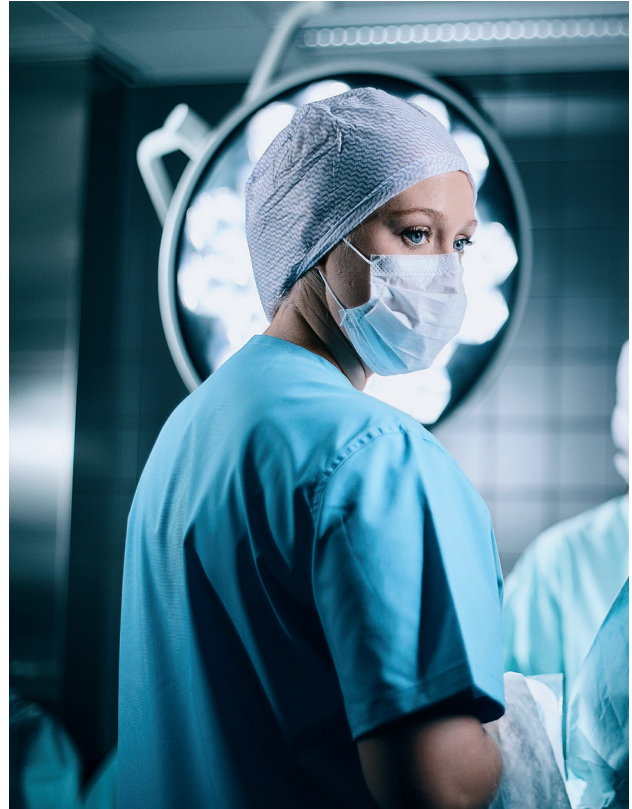

Brugervenligt:

- Poserne har bare én tilkobling, hvilket begrænser risikoen for at gøre noget forkert
- Alle komponenter i systemet er kompatible med hinanden
- At påmontere Serres sugeposer er enkelt og brugervenligt
- Alle instruktioner, tekster, billeder, videoer finder du på www.serres.com

Sikkert for patienter og personale:

- Alle poser testes kontinuerligt under produktionen. Den bløde plast gør Serres' sugepose ekstra holdbar ved ekspansion eller belastning
- Det indbyggede, hydrofobe filter fungerer også som beskyttelse imod overfyldning og lukker for en fuld sugepose

Praktisk og hygiejnisk:

- Lukket system, som kan seriekobles op til en kapacitet på 36 liter
- Kanistrene kan anvendes flere gange og rengøres i en opvaskemaskine ved +95°C eller autoklaveres ved +121°C

Miljøbevidst:

- Serres' sugesystem indeholder ikke latex, PVC eller ftalater
- Den bløde plast gør, at poserne optager mindre plads i emballagen. De optager mindre plads i skraldespandene – hvilket sparer på udgifterne til affaldshåndtering

Emballage og logistik:

- Et smart og pladsbesparende emballagesystem med dispenser-æsker, som kan åbnes fra to retninger. Derved spares plads på hylden!
- Alle æsker er mærket i henhold til ISO EN 15223-1 og med en GS1 128 stregkode
- Selve posen er mærket med et ID-nummer, som gør, at hver pose kan spores

Serres' sugeposer

Serres' standardsugepose

Hygiejnisk og sikkert.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057157	Sugepose 1 liter	36/216
6057167	Sugepose 2 liter	24/144
6057187	Sugepose 3 liter	24/144



Sugeposer med pulver

Ved aflæsning af volumen i forfyldte poser er det vigtigt at huske, at pulverets volumen skal trækkes fra. Pulveret i posen ekspanderer ikke.



Varenummer	Beskrivelse	Volumen pulver	Tørvækt pulver	Emballering
6057557	Sugepose, 1 liter med pulver i posen	25 ml	20 g	32/192
6057567-0	Sugepose, 2 liter med pulver i posen	50 ml	39 g	22/132
6057587-0	Sugepose, 3 liter med pulver i posen	85 ml	65 g	20/120

Superabsorberende pulver, SAP

Kan tilsættes sugeposen før eller efter brug.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057551	SAP 15 g / volumen 23 ml	20/200
6057550	SAP 25 g / volumen 35 ml	24/288
6057553	SAP i beholder 2 kg, 1 skovl 100 ml	1/1



Serres sugepose med tilbageløbsventil

Membranen er placeret på indersiden af låget under patientkoblingen og er testet til at kunne klare et vakuum mellem 15 kPa og 95 kPa. En tilbageløbsventil må aldrig bruges som en prop. Luk altid patientporten med den tilhørende prop.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057157-3	Sugepose, 1 liter m tilbageløbsventil	36/216
6057167-3	Sugepose, 2 liter m tilbageløbsventil	24/144
6057187-3	Sugepose, 3 liter m tilbageløbsventil	24/144



Hvilken pose passer til hvilket kanister:
1 liter 6057308 (transp.), 6057309 (blå)
2 liter 6057328 (transp.), 6057329 (blå)
3 liter 6057348 (transp.)

Sugeposer med dobbeltfilter

Sugeposen anvendes i forbindelse med røg fra laser eller diatermi. Dobbeltfilteret beskytter posen og eliminerer risikoen for, at posens sugeevne reduceres, når røgpartikler suges ind. Ved seriekobling anbefales det, at poser med dobbeltfilter sidder sidst i seriekoblingen.




Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057167-5	Sugepose med dobbeltfilter, 2 liter	24/144
6057187-5	Sugepose med dobbeltfilter, 3 liter	24/144

Materialet i Serres' sugeposer:

Pose og låg: Polyethylen
 Tilbageløbsventil/membran: POM – polyoxymethylen
 Hydrofob filter: indre – PE
 Dobbeltfilter: ydre – PET + PP
 Hvid konnektor: Polypropylen
 Pulver: Superabsorberende polymer SAP

Indeholder ikke latex eller PVC
 Klassificering: Klasse I
 i henhold til 93/42/EØF
 I overensstemmelse med:
 EN ISO 10079-1:2015 Del 1
 ISO 10079-1:2014 Del 3,
 Medicinsk Sugeposeudstyr

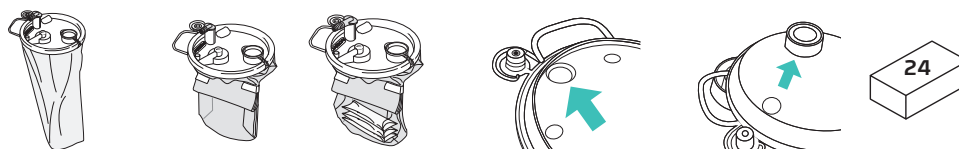

Varenr	Standard	Forfolde	med pulver	Tilbageløbs-ventil	Dobbeltfilter	Emballering
1000 ml						
6057157	X	–	–	–	–	36/216
6057557	–	–	X	–	–	32/192
6057157-3	–	–	–	X	–	36/216
2000 ml						
6057167	X	–	–	–	–	24/144
6057567-0	–	X	X	–	–	22/132
6057167-3	–	X	–	X	–	24/144
6057167-5	–	X	–	–	X	24/144
3000 ml						
6057187	X	–	–	–	–	24/144
6057587-0	–	X	X	–	–	20/120
6057187-3	–	X	–	X	–	24/144
6057187-5	–	X	–	–	X	24/144

Sugeposerne er pakket i dispenser-æsker. 6 dispenser-æsker pakkes i en transportkarton.

Seriekobling

Varenummer	Beskrivelse	Emballering	
6057918	Seriekoblingssslange til sugeposen , inkl. nippel, engangs Materiale: PE + PP	25/150	engangs
6057908	Seriekoblingssslange til vakuumtilslutning , inkl. nippel, flergangs Materiale: Silikoneslange, TPE	10/10	flergangs



6057918



6057908

Silikoneslange

Kan klippes i en ønsket længde, til tilslutning til sugeskilde og omskifterventil til vakuum.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057899	Silikoneslange 5 m ID/YD 6/10 mm	1/10



Lyddæpende ventil til væskeopsamlingspose

Ventilen kobles mellem væskeopsamlingspose og slangen, som går til sugeposen. Ventilen leder kun væske igennem og ingen luft, hvilket betyder at den ofte forstyrrende lyd elimineres helt.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6004479	Lyddæpende, ventil	10/100



Serres' kanistre

Serres' kanistre følger Medicinsk sugestyr Del 1 (ISO 10079-1) og kan vaskes 30 gange. Kanistrene samt de grå vinkelkoblinger kan opvaskes ved +95°C. Alle kanistre bortset fra 6057319 kan autoklaveres ved +121°C.

Kanister, transparent

Brug altid samme størrelse pose (1, 2, 3 l) som på kanisteren.
Materiale: Polycarbonat, TPE.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057308	Kanister, 1 liter, transparent	45/45
6057328	Kanister, 2 liter, transparent	24/24
6057348	Kanister, 3 liter, transparent	16/16



6057308

Kanister, blå

Blåfarvet kanister bruges, hvor indholdet ikke ønskes synligt; volumenet kan aflæses. Materiale: Polycarbonat, TPE.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057309	Kanister, 1 liter, blå	45/45
6057329	Kanister, 2 liter, blå	24/24



Spulekanister

Spulekanistrene kan fyldes med vand og bruges til at suge op/spule sugekateteret. Kan opvaskes ved +95°C. Kan ikke autoklaveres.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057319	Spulekanister, 1 liter, hvid	45/45



Tilbehør til Serres' sugesystem

- **Præparatopsamlingsbeholder** - Når prøvetagningen er klar, fjernes slangen fra beholderen og lukkes med den grønne prop. Beholderen lukkes af posen og sættes på den største bundplade. Til sidst lukkes sugekilden. Kurven inde i beholderen frasorterer genstande over 1 mm Ø. Materiale: PE, PP.
- **Målekop** - Til nøjagtig udmåling af små volumener, <50 ml +/- 5 ml - >50 ml +/- 10 ml. Hænges uden på en sugepose og kobles sammen med en slange, 20 cm lang, med hvid vinkelkobling. Materiale: SAN, PE, PP.
- **Splash-vac gulvsugning** - Til opsugning af overflødig væske på gulvet direkte ned i sugeposen. Dråbeformen garanterer, at man kommer ind i hjørnerne, selve sugeskiven føres rundt med foden eller med et skaft. Leveres med en sugeslange på 3 m. Materiale: Polystyren og PE.
- **Bakterie- og virusfilter** - Beskytter sugekilden mod bakterier og virus. Har et let hydrofobt filter, som beskytter mod væskestænk. Kan sidde i maks. 30 dage, eller udskiftes efter behov. Bakteriefiltret er installeret mellem sugekanistret og vakuumsugerkilden, og mærkeringen "IN" er vendt mod sugeposesystemet. Materiale: Polystyren, PE. Styrolux, porestørrelse 0,027 µm, klasse IIa, maks. tryk 95kPa.
- **Hydrofobisk filterbeskyttelse til sugekilden** - Beskytter mod tilbagestrømning af væske og kontaminering af sugekilden. Har også bakteriefiltrerende effekt. Materiale: PE, SAN.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057242	Præparatopsamlingsbeholder 300 ml uden hvid vinkelkobling	18/108
6057257	Målekop/kanister 250 ml	12/72
6057270	Splash-vac gulvsug, inkl. 3 m sugeslange	25/25
6057702	Bakterie- og virusfilter	10/10
6057710	Røgfilter	15/15
601114	Hydrofobisk filterbeskyttelse til sugekilden	15/15

Omskifterventil til vakuum

Passer i standardophæng og anvendes til at skifte vakuum mellem to forskellige serier af kanistre. Ventilen er til flergangsbrug og rengøres ved aftørring med etanolbaserede rengøringsmidler (kan ikke opbevares i væsken). Kan opvaskes i maskine ved +95°C. Ventilen skal altid testes i henhold til brugsanvisningen efter desinfektion. Materiale: POM, TPE.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057955	Omskifterventil til vakuum	5/5



6057247



6057257



6057270



6057702



6057710



6001114



Specialkoblinger

Koblinger til sugepose og slange, engangs.
Materiale: Polypropylen.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057620	Grøn dobbeltkobling til tilslutning af 2 sugeslanger til samme sugepose. OBS! Sugesevnen aftager noget, hvis begge slanger er tilkoblet. Brug gerne en klemme på den ene slange til at øge sugesevnen	20/100
6057621	Kobling, lige til patienten. Bruges primært til at forhindre tilstopning ved sugning af knoglestykker	20/500
6057618	Grå vinkelkobling til kanistre, flergangs. Kan opvaskes ved 95°. Materiale: Termoplastisk elastomer	20/100



6057620



6057621



6057618

Ventil til kanistre

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057958	Sættes i hullet til den grå vinkelkobling, kan åbne og lukke for suget til hvert enkelt kanister	10/10



Konnektorer til sugeslangen

ved fx trachealsugning. Kan manøvreres med én hånd.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6058280-1	Serres mundstykke, skydelukning som vakuumkontrol. Materiale: Ftalatfri PVC, polyaceta	100/800
6058250	Vakuummundstykke som åbner for vakuum, når man sætter fingeren foran hullet. Suget kan være tilsluttet og suger kun, når mundstykket er aktiveret. Materiale: nitril, styren-butadien, kopolymer	70/70



6058280-1



6058250

Ophæng og holder

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057815	Kanisterholder med lynkobling til skinne med en bredde på 25-50 mm, tykkelse 10-12 mm. Materiale: PA, rustfrit stål. OBS! Ikke MR-sikker	1/25
6057818	Kanisterholder til skinne 20-44 mm, aluminium	1/25
6057817	Kanisterholder til vægophæng, aluminium, inkl. skruer	1/25
6057830	Kanisterholder med kroge sengegærdeophæng, aluminium, rustfrit stål	1/10
6057835	Kanisterholder til 1 liters kanister, aluminium, rustfrit stål	1/10
6057836	Kanisterholder til 2 liters kanister, aluminium, rustfrit stål	1/10
6057820	Kanisterholder, vægophæng, plast (PA)	50/50



6057815



6057818



6057820



6057817



6057830



6057835/36

Holder til sugekatetre

Rummer ca. 10-12 stk., kan hænges på en skinne, har samme tilslutning som Serres' kanistre. Flergangs, kan opvaskes ved +95 °C og autoklaveres ved +121 °C. Materiale: Polycarbonat, PP

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057831	Holder til sugekatetre	1/1



Holder til sugeslanger

Passer til en skinne, der er 10-12 mm tyk. Flergangs, kan opvaskes ved +95 °C og autoklaveres ved +121 °C. Materiale: Polypropylen

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057833	Holder til sugeslanger	10/10



Vogne

Den lave vogn har plads til 3 kanistre og kan stå under et leje. Den anden vogn leveres med en holder med plads til 6 kanistre og kan suppleres med en ekstra holder til yderligere 6 kanistre. Der er to mindre beslag på stolpen til fx omkoblere eller QVac. Begge vogne har 5 hjul. Den høje vogn har bremses på 2 af hjulene. Materiale: stål og plast (PA).

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057940	til 6 kanistre, højde 120 cm	3/3
6057945	til 3 kanistre, højde 55 cm	4/4



Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057941	Holder til 6 kanistre Materiale: Polyamid	6/6



Vogn til Serres sugeposer

En specielt udviklet vogn til nem transport af fyldte sugeposer. Vognens stativ er fremstillet i rustfrit stål med to hjul, der kan låses; kan klare en vægt på 160 kg. Plastikbeholderen på 60 l, lavet af PE, kan rengøres ved maks. +60°. Stativ og beholdere tåler aftørring med ethanol- eller isopropanolbaserede desinfektionsmidler. Mål på beholderen: H 590 mm x B 555 mm x D 285 mm. Rummer 13 fyldte 3-liters sugeposer eller 6 stk. 6 l Saga-posers.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6004833	Vogn til Serres sugeposer	1/1



Ejektorsug Goliat

Bakteriefiltret monteres mellem sugekanistren og vakuumkilden, således at mærkning "IN" er vendt mod sugeposesystemet. Ejektorsuget har lukkeventil og en tydelig aflæsning af undertrykket på manometret. Sug-effekten reguleres ved drejeknappen ovenpå ejektoren.

Produceret så den er effektiv og lydsvag, der er således ikke behov for lyddæmper. Ydersiden rengøres med desinfektionsmiddel. Sug-ejektoren har to års garanti og er normalt vedligeholdelsesfri.



Varenummer	Beskrivelse	Emballering
QMTC7SU3131220	Sugeejektor anvendes med medicinsk trykluft, med beslag og vinklet snapkobling, 2 m. slange.	1/1

Teknisk specifikation:

Installation	Monteres på skinne eller med lynkobling
Tilslutning	Til tryklufstudsstyr
Lydniveau	<40 db
Flow	17 l/min
Sugeeffekt	- 0,5 bar
Maks trykluftforbrug	16 l/min
Maks arbejdsdruk	10 bar
Klassificering	Klasse IIa - 93/42/EEC

Tilbehør Q-Vac

Q-Vac ejektorsug er udgået, men vi tilbyder fortsat reservedele til denne.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6057969	Lyddæmper ti Q-Vac	1/1
6057978	Servicepakke til Q-Vac (inkl. standardlyddæmper)	1/1
6057964	Servicepakke til Q-Vac (inkl. speciallyddæmper)	1/1
6057969	Speciallyddæmper til Q-Vac	1/1



Emballage og logistik



- Et smart og pladsbesparende emballagesystem med dispenser-æsker, som kan åbnes fra to retninger. Pladsbesparende.
- Alle æsker er mærket i henhold til ISO EN 15223-1 og med en GS1 128 strejkode.
- Selve posen er mærket med et ID-nummer, som gør, at hver pose kan spores.

Serres Nemo

Smart løsning fra sug til affaldshåndtering, som hjælper dig med at fokusere på det, der er allermest behov for.

Sparer tid – Serres' sugeposesystem skaber sammen med Serres Nemo en integreret væskehåndteringsløsning fra sug til affaldshåndtering. Serres Nemo er udstyret, som tager sig af affaldet fra Serres' sugeposer på en sikker, smart og omkostningseffektiv måde. Nemo forenkler sygehusets affaldshåndtering og sparer penge og tid.

Begrænser mængden af affald – Da det medicinske sugaffald kan kasseres på sygehuset, og poserne uden indhold kan kasseres med almindeligt affald. Man begrænser affalds-omkostningerne betragteligt. Ud fra et hygiejnisk perspektiv håndterer Serres Nemo dermed affaldet med minimal risiko for kontaminering.

Hygiejnisk og sikker løsning – Serres Nemo tilsluttes vand- og afløbssystemet og spuler indholdet fra en af Serres' 2- eller 3-liters poser på godt 15 sekunder. I slutning af cyklussen kan de tømte poser kasseres efter sygehusets rutiner. Det hjælper arbejdsprocessen på sygehuset, så håndteringen af sugaffaldet effektiviseres kraftigt.

Brugervenligt – Med sit funktionelle design og sin kompakte, pladsbesparende udformning kan Serres Nemo også placeres, hvor pladsen er begrænset. Den eneste vedligeholdelse, som kræves, er en 15 sekunders kørsel med en opvaskekapsel, som rengør udstyret indvendigt.

Regn ud hvor meget man kan spare - serres.com/nemocalculator



Beskrivelse	Serres Nemo
Beregnet til	Tømning af Serres 2- og 3-liters sugeposer
Tilslutninger	Koldt vand: G ½" Afløb: DN 50 El: Jordforbundet hanprop 230V/50Hz, 10A
Materiale	Rustfrit stål, plast
Dimensioner	H: 1010-1060 mm (lukket låg) B: 330 mm D: 780-900 mm
Vægt	Ca. 60 kg
Vandforbrug	6,8 liter / cyklus

Serres Nemo posetømmer

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6003128	Serres Nemo, gulvmodel	1/1

Serres Nemo rengøringskapsel

Materiale: Polypropylen, polyethylen.

Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6005706	Nemo rengøringskapsel	8/40



serres

Medioplast er distributør af Serres' produkter i Sverige, Norge og Danmark.

Medioplast A/S
Marielundvej 46E
2730 Herlev

Tel. 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



MEDI PLAST