



ENGÅNGSDUKAR WETWIPE

Produktspecialist
Mattias Wrengel
Tel 0708 37 91 33
mattias.wrengel@mediplast.com

Produktspecialist
Michael Bejhem
Tel 0706 95 13 86
michael.bejhem@mediplast.com

Chlorine Disinfection + Tvättmedel

Engångsdukar med aktivt klor



Artikelnr.: 6025074



Artikelnr.: 6025058

Bredspektrat

Effektiv mot alla virus

Effektiv mot clostridium difficile.

Alltid korrekt dosering

Wet Wipe Chlorine Desinfektion engångsdukar är impregnerade med klorgranulat

Med Wet Wipe Chlorine Desinfektion får du en optimal och enkel desinfektion. Förpackningen innehåller en brytbar påse med avmineraliserat vatten. När påsen öppnas rinner vattnet in i dukarna där vätskan löser upp klorgranulatet, som omvandlas till aktivt klor. Dukarna är klara för användning efter 7 minuter.

Användningsområden

Används för desinfektion av ytor och kontaktpunkter på olika utrustningar. Desinficerar mot vegetativa bakterier, jäst, alla virus och Clostridium difficile-sporer på 5 min. Effektiv mot norovirus på 5 min.

EN standard

Testmetod		tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Jäst	5 min
EN 16615	Bakterier och jästsvampar	5 min
EN 14348	Svampbakterier & tuberkelbakterier	15 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

CEI-betyg

Wet Wipe Chlorine Desinfektion har omvärderats av CEI 6. november 2014. CEI har bedömt att det finns tillräcklig dokumentation för att Wet Wipe Chlorine Desinfektion kan bedömas som ett bredspektrumdesinfektionsmedel med maximal desinfektionseffekt.

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com



74-059, DK/Se,
Ver 12, Aug 2024

Engångsdukarna tillverkas i två storlekar; maxi och mini.

Artikelnr.: 6025074: Chlorine Disinfection Maxi

Kartong med 24 förpackningar

1 förpackning innehåller 5 dukar, 43×30 cm

Artikelnr.: 6025058: Chlorine Disinfection Mini

Kartong med 20 förpackningar

1 förpackning innehåller 10 dukar, 30×20 cm

Innehåller granulat

100 % natriumdiklorisocyanuratdihydrat

Innehåller aktiverade och färdiga engångsdukar

Aktivt klor > 1000 ppm,
pH 5-6

Observera

De aktiverade och färdiga engångsdukarna behåller sin desinficerande effekt upp till 7 dagar efter aktivering. Dukarna tillverkas i två storlekar.

Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsdatablad kan begäras.

Kom ihåg att alltid läsa bruksanvisningen före användning.

Desinfektionsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Läs alltid märkning och produktinformation innan användning.

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke →

Chlorine Disinfection



Artikelnr.: 60152



Artikelnr.: 60132

Wet Wipe Chlorine Disinfection engångstorkdukar impregnerade med klorgranulat

Med Wet Wipe Chlorine Disinfection får du en optimal och enkel desinfektion.

Förpackningen innehåller en brytbar påse med demineraliserat vatten och torkdukar impregnerade med stabila klorgranulat. När påsen bryts rinner vattnet in i torkdukarna där vätskan löser upp klorgranulaten och omvandlar dem till aktivt desinfektionsmedel.

Dukarna är klara för användning efter 7 minuter.

Användning

Används för desinfektion av hjälpmedel, utrustning och större ytor, t.ex. i isolering av patienter och norovirus.

EN standard

Testmetode		tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Jästmögel	5 min 15 min
EN 16615	Bakterier och jästsvampar	5 min
EN 14348	Svamp- och tuberkelbakterier	5 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

CEI-betyg

Wet Wipe Chlorine Desinfektion har utvärderats av CEI den 6 november 2014. CEI har bedömt att det finns tillräcklig dokumentation för att Wet Wipe Chlorine Desinfektion är effektivt mot vegetativa bakterier, svampar och jästsvampar, virus, mykobakterier och tuberkelbakterier samt sporer.

Engångstorkdukarna tillverkas i två storlekar; maxi och mini.

Artikelnr.: 60152: Chlorine Disinfection Maxi
Kartong med 24 förpackningar
1 förpackning innehåller 5 torkdukar, 43x30 cm.

Artikelnr.: 60132: Chlorine Disinfection Mini
Kartong med 20 förpackningar
1 förpackning innehåller 10 torkdukar, 30x20 cm

Specifikationer:

Innehåller granulat

100 % natriumdiklorisocyanuratdihydrat.

Innehållet i aktiverad och bruksfärdig torkduk

Hypoklorsyra motsvarar 2000 ppm aktivt klor pH 5-6

Räckvidd

Maxi: 60 ml desinfektionsmedel per torkduk; räcker till 8 m².
Mini: 30 ml desinfektionsmedel per torkduk; räcker till 4 m².

Material

Torkduk: 65 % viskos / 35 % polyesterblandning

Ursprungsland / kvalitetscertifikat

Tillverkad i Tyskland under cGMP / ISO 22716

Hållbarhet

2 års hållbarhet. De aktiverade och färdiga engångstorkdukarna behåller sin desinficerande effekt 7 dagar efter aktivering.

Observera

Desinfektionsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Läs alltid märkning och produktinformation innan användning.

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com



DK/SE Ver3
Aug 2024

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke →

Ethanol Disinfection

Engångsdukar med ethanol och tensid



Artikel nr. 6025067



Artikel nr. 6025069

Rengör och desinficerar i ett enda steg
Snabbverkande
Enkel at använda
Effektiv mot Norovirus

Användningsområden

Engångsdukar för rengöring och desinfektion i ett arbetsflöde.
Dukarna används för att torka av ytor, och kontaktpunkter på olika utrustningar.
Verkningstid mot vegetativa bakterier, jästsvampar och viruset är 1 minut enligt europeisk standard.
Testrapport och dokumentation av desinfektionseffekt mot Norovirus vid 30 sekunders påverkan kan begäras.

Experternas recensioner

Jfr CEL:s uttalande, december 2011, Wet Wipe Ethanol Desinfektion används för desinfektion av ytor där en minskning av bakterier eller svampar är önskvärd, och för desinfektionsuppgifter i Norovirus.

Not

Wet Wipes engångsdukar med etanol är klassificerade enligt ADR som UN3175, dvs. fast ämnen som innehåller brandfarliga vätskor. Det innebär att dukarna är mindre brandfarliga än flytande etanolprodukter och dukarna är därför undantagen från den Danska Krisberedskapsmyndighetens tekniska bestämmelser för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor.

Engångsdukarna finns i två storlekar; maxi og mini.

Art. nr. 6025067: Ethanol Disinfection Maxi
Kartong med 12 förp. = 240 dukar
1 förp. innehåller 20 dukar, 43x30 cm

Art.nr. 6025069: Ethanol Disinfection Mini
Kartong med 20 förpackningar = 500 dukar
1 förp. innehåller 25 dukar, 20x30 cm

Innehåll:

Ethanol	70,0 %
Tensid	< 0,1 %

Nettoinnehållet i ett paket är mindre än 1 kg, vilket innebär att produkten kan transporteras utan begränsningar för farligt gods.

Kartong är därför märkt med LQ-etiketten.

Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsdatablad och bruksanvisning finns tillgänglig vid förfrågan.

Kom alltid ihåg att läsa bruksanvisningen före användning.

Ethanol Disinfection

Engångsdukar med hög alkoholkoncentration



Artikelnr.: 51153



Artikelnr.: 51133

Snabbverkande desinfektionsmedel Enkel att använda

Användning

Använd för desinfektion av medicinska enheter kompatibla med etanol och för desinfektion av kontaktytor, t.ex. i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar, undersökningsrum och avdelningar.

Snabbverkande mot vegetativa bakterier och jästsvampar, tack vare hög alkoholkoncentration.

Enligt tester från oberoende laboratorier, Dr. Brill och MikroLab Germany, minskar Wet Wipe Ethanol Disinfection bakterier och jästsvampar.

Testrapport och dokumenterad effektivitet vid 30 sekunders inkubationstid finns tillgängliga på begäran.

Lagring

Wet Wipes engångsdukar impregnerade med etanol uppfyller kraven i UN 3175, d.v.s. fasta ämnen som innehåller brandfarliga vätskor och är därför undantagna tekniska bestämmelser för lagring och hantering av brandfarliga vätskor. Produkten kan lagras och hanteras som ett fast, brandfarligt ämne.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Transport

Nettoinnehållet i en förpackning är mindre än 1 kg fast material innehållande brandfarlig vätska, vilket betyder att produkten kan transporteras som farligt gods i begränsad mängd.

Kartongen är därför LQ-märkt.

Artikelnummer

Engångsdukarna tillverkas i två storlekar.

Artikelnr. 51153: Ethanol Disinfection Maxi

Kartong med 12 förp. = 240 dukar

1 förp. innehåller 20 dukar, 43×30 cm

Artikelnr. 51133: Ethanol Disinfection Mini

Kartong med 20 förp. = 500 dukar

1 förp. innehåller 25 dukar, 20×30 cm

Innehåll

Ethanol 70 %.

Hållbarhet efter öppningsdatum 30 dagar.

Tillverkas utan parfym, färg och denatureringsmedel.
Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsinformation och bruksanvisning finns tillgänglig vid förfrågan.

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

M51-052, SE, Ver. 2
PG, Jan 2022

Återförsäljare
Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®

Triamin Disinfection

Desinficerande engångssdukar utan alkohol



Varenr.: 81153



For at sikre et godt arbejdsmiljø er Wet Wipe Triamin evalueret og vurderet positivt af 2 uafhængige Europæiske Registrerede Toksikologer.
wetwipe.eu/triamin



Varenr.: 81133

Rengöring och desinfektion i en produkt
Verksam vid låga temperaturer och smutsiga förhållanden (förekomst av blod)
Effektiv mot blodburna virus

Användningsområden

Engångsduk med desinfektions- och rengöringsmedel för rengöring och desinficering av ytor kontaminerade med vegetative bakterier, jästsvampar, blodburna virus som HIV och hepatit B/C.

Dukarna rekommenderas även för rengöring av känsliga instrument, som alternativ till blötläggning av instrument i traditionella rengöringsmedel.

Vegetativa bakterier, jästsvampar och blodburna virus inaktiveras inom 5 minuter.

Dukarna är tillverkade av ett perforerat och starkt vattenuppsugande non-woven-material. Den perforerade strukturen säkerställer tillsammans med den höga uppsugningsförmågan en effektiv åter-absorbering av desinfektionsvätska, smuts och mikroorganismer under avtorkning, så att dukarna lämnar kvar så lite desinfektionsvätska som möjligt på den rengjorda ytan.

Desinfektionsmedlet är inte klibbigt. Synliga rester av ämnen som ansamlats vid upprepade avtorkningar kan enkelt avlägsnas med en fuktig duk.

Effektivitetsstudier

Testade vid låga temperaturer och smutsiga förhållanden enligt: EN13624, EN13727, EN16615, EN14776 och DVV/RKI-riktlinje för virustest.

Engångssdukarna finns i två storlekar; maxi och mini.

Artikelnr.: 81153. Triamin Disinfection
Kartong med 12 förpackningar
En förpackning innehåller 20 dukar, 43×30 cm

Artikelnr.: 81133. Triamin Disinfection
Kartong med 20 förpackningar
En förpackning innehåller 25 dukar, 20×30 cm

Specifikation:

Impregnerad engångsduk med inte skummande, färglöst desinfektionsmedel utan färgämnen och parfym med ett pH-värde på 8-9.

Dukarna är tillverkade av ett perforerat non-woven-material med högt viskositetsinnehåll.

Aktivt biocidämne: Laurylamindipropylendiamin. 0,4%

Laurylamindipropylendiamin är ett icke-joniskt ytaktivt ämne som tack vare sin neutrala karaktär är kompatibelt med de flesta typer av rengöringsdukar. Till skillnad från många andra aktiva ämnen binds det inte till viskositetsfibrer, och fördelas därmed bättre i dukarna. Detta säkerställer en optimal desinfektionseffekt vid användning av impregnerade engångssdukar.

2 års hållbarhet. Används upp till 30 dagar efter öppnandet.

Kom ihåg att alltid läsa bruksanvisningen före användning.

Återförsäljare
Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®

01 01 DK v7 da/SE
Sep 2024

Wet Wipe A/S
Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke +

Universal

Rengöringsduk med hudneutralt rengöringsmedel



Art.nr: 6041153



Art.nr.: 6041133

Wet Wipe Universal engångsdukar impregnerad med hudneutralt rengöringsmedel

Dukarna är tillverkade av ett perforerat och högabsorberande material som absorberar mikroorganismer, så att de avlägsnas och inte sprids vid rengöring. Samtidigt uppnås en snabb torkning av rengöringsvätskan på ytan, så att desinfektion med alkoholbaserade desinfektionsprodukter kan utföras omedelbart efter rengöring.

Användning

Rengöring av ytor med rena procedurer före desinfektion med t.ex alkohol- och klorbaserade desinfektionsmedel. Dukarna rekommenderas också för rengöring av kontaktpunkter på material som tål vatten, t.ex bord, stolar, sänggavlar, tvättställ, möbler med konstläder etc.

Märkning

Rengöringsmedel och duk är deklarerade och märkta i samarbete med Astma-Allergi Danmark. Intyg skickas på begäran.

Engångsdukarna finns i två storlekar; maxi och mini.

Art.nr. 6041153: Universal Maxi Kartong med 12 förpackningar. 1 förpackning innehåller 20 dukar, 43x30 cm

Art.nr. 6041133: Universal Mini Kartong med 20 förpackningar. 1 förpackning innehåller 25 dukar, 20x30 cm

Specifikation:

Innehåll

Se förordning (EG) nr 648/2004.
Ingredienser: < 1% ytaktivt tensid
Konserveringsmedel: Natriumbensoat, kaliumsorbat
Parfymfri och utan färgämnen.
Innehåller mjölksyra
pH-värde ca 5,2 (hudneutralt)

Räckvidd

Maxi 4m², Mini 2m²

Material

Duken er båda kors- och z-vikt, så att man kan ta ut enskilda dukar ur förpackningen, vikta och redo att användas.
Duk: Blandning av 65 % viskos och 35 % polyester

Ursprungsland/kvalitetsintyg

Tillverkad i Tyskland enligt cGMP / ISO22716

Produktbeteckning

Universal i säkerhetsdatablad

Hållbarhet

2 års hållbarhet. Används upp till 30 dagar efter öppnandet

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com



DK v2 dk /SE
Sep 2024

Wet Wipe A/S
Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke +

Wet Wipe Chlorine Disinfection

Engångsmoppar impregnerade med klorgranulat



Förpackningen innehåller en brytbar påse med vätska och moppar impregnerade med klorgranulat. När påsen bryts rinner vätskan ut i mopparna, som är klara att användas efter 20 minuter.

Bruksanvisning

1. Fäst sulan på mataren
2. Placera engångsmoppen på golvet
3. Tryck på sulan på engångsmoppen
4. Börja desinficera golvet
5. Engångsmoppen och sulan kasseras efter användning och mataren och teleskopskaftet desinficeras

EN standard

Testmetod	Spektrum	tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Jäst, mögel och svamp	5 min, 15 min
EN 16615	Bakterier, jäst	5 min
EN 14348	Svamp- och tuberkelbakterier	5 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

CEI-betyg

Wet Wipe Chlorine Desinfection har utvärderats av CEI den 6 november 2014. CEI har bedömt att det finns tillräcklig dokumentation för att Wet Wipe Chlorine Desinfection är effektivt mot vegetativa bakterier, svampar och jästsvampar, virus, mykobakterier och tuberkelbakterier samt sporer.

Artikelnr.: 62172:

1 förpackning innehåller 3 moppar, 45×13 cm.

18 paket i en kartong

Innehåll

Klorgranulat: 100 % natriumdiklorisocyanuratdihydrat.
Färdiga moppar: Hypoklorsyra motsvarande 2000 ppm aktivt klor pH 5-6.

3-lagers mopp bestående av: PET/viskos/PP

Räckvidd


100 ml desinfektionsmedel per mopp: lämplig för desinfektion upp till 10 m².

Ursprungsland / kvalitetscertifikat

Tillverkad i Tyskland under cGMP / ISO 22716

Hållbarhet

2 års hållbarhet. De aktiverade mopparna behåller sin desinficerande effekt 7 dagar efter öppnandet.

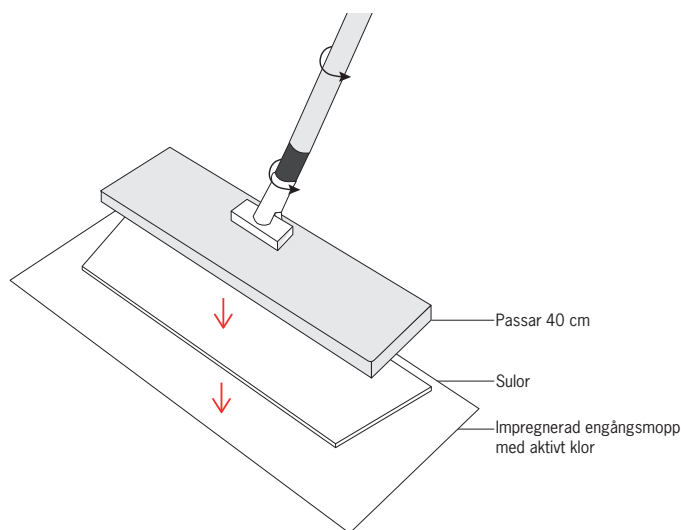

Desinfektionsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Läs alltid märkning och produktinformation innan användning.

Återförsäljare
Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö Tel:
020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®

74-070 DA/se,
Ver3, August 2024

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke →

Chlorine Disinfection + Tvättmedel

Engångsmopp med aktivt klor



Bredspektrum sporicid Alltid korrekt dosering

Wet Wipe Chlorine Disinfection engångsmoppar impregnerade med klor i pulverform

Förpackningen med 3 moppar innehåller en knäckpåse med vätska. När påsen är bruten rinner vätskan ut i mopparna, som är klara att användas efter 20 minuter. Med Wet Wipe Chlorine Disinfection uppnår du en optimal och enkel desinfektion.

Användningsområden

Desinfektion av golv, t.ex. vid patienter i isolering. Desinficerar effektivt mot Norovirus samt t.ex. HIV och Hepatit B, vegetativa bakterier, mögel och jästsvampar och uppfyller kravet för desinfektionsuppgifter vid utbrott av Clostridium difficile.

Bruksanvisning

1. Fäst sulan på mataren
2. Placera engångsmoppen på golvet
3. Tryck på sulan på engångsmoppen
4. Börja desinficera golvet
5. Engångsmoppen och sulan kasseras efter användning och mataren och teleskopskafvet desinficeras

Desinfektionsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Läs alltid märkning och produktinformation innan användning.

Observera

Engångsmopparna behåller sin desinficerande effekt vid >1000 ppm aktivt klor i 7 dagar efter öppning.

Artikelnr.: 60172:


1 paket innehåller 3 moppar, 45×13 cm.

18 paket i en Kartong

Innehåll

Aktivt klor >1000 ppm

Tillverkad i Tyskland. Säkerhetsdatablad kan begäras.

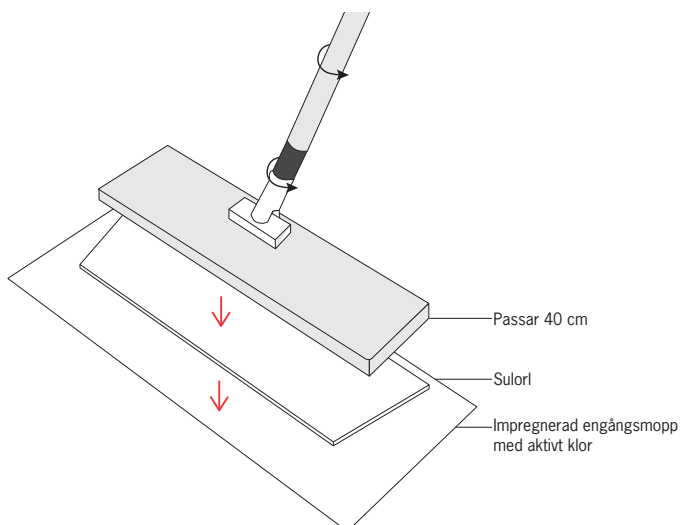

Återförsäljare
Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®

74-070 DA/se,
Ver6, Aug 2024

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke →

Universal Mopp

Engångsmopp med vatten och tensid –
redo at användas



Enkel och snabb golvrengöring av mindre ytor. Klarar upp till 10 m² som linoleum/vinyl/sten och halkfria golv. Mycket lämplig för t.ex. toaletter, laboratorier etc. Optimal hygien - kassera efter användning

Själva moppen:

Är en 3-lagers mopp som består av, en speciell perforerad torkduk i polyester mot golvet, ett smutsabsorberande mellanlager samt ett sista barriärskikt mot mataren.

Så här fungerar det:

Systemet resulterar i en mycket effektiv rengöring där smutsen sugs upp i själva moppen och lämnar ytan helt ren.

Baserat på moppens konstruktion kan den också användas för halkfria golv, där hög friktion vanligtvis är ett stort problem.

Art.no.: 41172, 45 x 13 cm
1 förp. innehåller 10 moppar
9 paket pr. kartong

Innehåll:


Innehåller < 1% ytaktivt ämne.
Konserveringsmedel: Natriumbensoat, Potassuimsorbat.
Parfymfri och färgfri.
Innehåller mjölksyra, pH ca 5,2 (hudneutralt).
Impregnerad med ca 600% vätska.

Tillverkad i Tyskland under cGMP

Tillbehör

Det är möjligt att köpa matare och sula som tillval för denna produkt.

Kom alltid ihåg att läsa bruksanvisningen före användning.

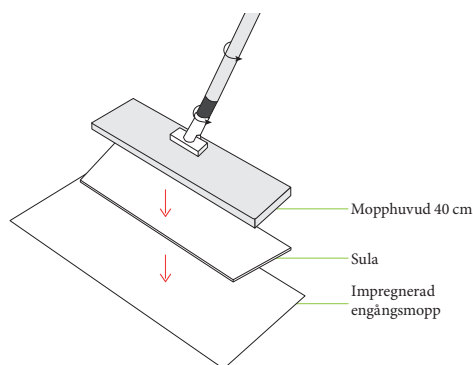

Återförsäljare
Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST®

41-050, DA/se,
Ver. 4
Sep 2024

Wet Wipe A/S
Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

wetwipe®
by schülke +

Surface Disinfection Wipes

Etanolbaserad 70%, Blue

Etanolbaserade desinfektionsdukar för rest- och sköljfri applicering på medicintekniska produkter och kontaktytor för livsmedel.

Produktinformation

Wet Wipe ytdesinfektionsdukar innehåller en 70% alkoholhaltig lösning baserad på etanol i farmaceutisk kvalitet. Etanolen är denaturerad med isopropanol och innehåller inte tensider och andra tillsatser. För rest- och sköljfri desinfektion av medicintekniska produkter och kontaktytor för livsmedel. Dukarna är gjorda av en blå viskos-polyesterväv med en hög och homogen impregnering av dukarna. I kombination med dukens ergonomi möjliggör det en enkel och smidig fördelning av desinfektionsvätskan på torkytor.

Dokumenterade tester

Produkten uppfyller tillämpliga europeiska standarder EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14776 och EN 16615 (vätsketestad med dukar) mot bakterier, mykobakterier och jäst.

	EN test	Verkningsstid
Bakterier	EN 13727 EN 16615	60 s 2 min
Jäst	EN 13624 EN 16615	60 s 2 min
Mykobakterier	EN 14348	60 s

Innehåll (fullständig lista)

Denaturerad etanol 70 volymprocent därav isopropanol (<5%).

Produkten omfattar inte parfym, färg och andra tillsatser och denatureringsmedel än isopropanol.

Använd desinfektionsmedel säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Producerad i Tyskland.


"Den EU-harmoniserade klassificeringen av etanol är endast Flam.Liq.2 och inkluderar inte Eye.Irrit."

Produkten är ADR klassificerad som fasta ämnen som innehåller brandfarlig vätska och kan därför undantas från de tekniska föreskrifterna för lagring och hantering av lättantändlig vätska. Produkter kan transporteras som begränsad mängd (nettoinnehåll i förpackning <1 kg)

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk www.wetwipe.dk

CVR: 30207726

51315, EN, Ver. 1
May 2021

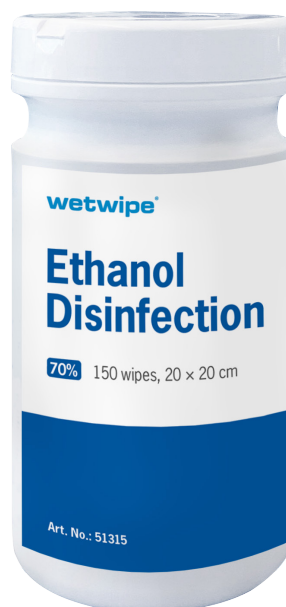

Artikelnr: 51315

Användning

Lämplig för yrkesverksamma inom sjukhus, vårdhem, skolor och barninstitutioner, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, hotell, restauranger och cateringverksamhet, i stora kontor, transportsektorn och den offentliga sektorn. Rekommenderas också för privata användare. Använd till exempel dukarna för desinfektion av hjälpmedel, under resa, i snabbköpet och på gymmet. Används för desinfektion av hårda, icke-permeabla ytor. Behandla inte material som är känsliga för alkohol, t.ex. akrylglas (Plexiglas). Använd dukarna på rengjorda och torra ytor.

Expertutlåtande

Danska smitthygienexperter vid CEI (Central Enhet för Infektionshygien) har utvärderat och rekommenderat användning av etanol desinfektionsprodukter från Wet Wipe.

Artikelnr: 51315: Ethanol Disinfection Wipes
Kartong med 6 burkar
1 burk innehåller 150 dukar 20 x 20 cm

Föreskrift

Produktbeteckning: Wet Wipe Ytdesinfektion 70% blue. Produkten klassificeras som en biocidprodukt i produkttyp 2 och 4. Wet Wipe A/S finns på den europeiska artikel 95-listan över godkända leverantörer av etanolprodukter. Produkten är CLP-klassificerad Flam.Liq.2 och uppfyller H319 (Mycket brandfarlig vätska och ånga).

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

wetwipe®

Etanoldesinfektion 70 %



Godkänt av danska livsmedelsverket (Fødevarestyrelsen) för:

«Användning som desinfektionsmedel inom livsmedelsindustrin»

J.nr: 2014-29-7105-00025

Blå engångsduk med etanol för ytdesinfektion utan eftersköljning med vatten.

Användning

Kan användas för desinfektion av produktions- och köksredskap som kommer i direktkontakt med livsmedel. T.ex. knivar, skärmaskiner, vågar, produktionsband/bord, förpackningsfaciliteter, sonder och mycket mer.

Eftersköljning med vatten är ej nödvändigt (se J.nr.: 2014-29-7105-00025).

Testdokumentation

Produkten uppfyller europeiska standarderna EN 1276, EN 1650 och EN 13697 mot bakterier och jäst.

Innehåll

Etanol 70 volymprocent i farmaceutisk kvalitet. Etanolen är delvis denaturerad med isopropanol (< 5 %)

Wet Wipe A/S
info@wetwipe.eu
Tel: +45 70 266 244
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

Varenr.: 50536 : Wet Wipe Ethanol Disinfection 70 %, Maxi Blue Roll
Levereras i kartong med 2 förpackningar
En förpackning innehåller 400 blå engångsdukar, 30 x 20 cm

Förvaring

Etanolen är absorberad i engångsdukarna och produkterna är därför undantagna från tekniska föreskrifter för förvaring och hantering av brandfarliga vätskor. På så sätt kan ett större antal produkter förvaras, jämfört med flytande etanolprodukter.

Transportföreskrifter

Ska transporteras under regeln om transport av farligt gods.

Leverantör och ursprungsland

Produkten är tillverkad av Wet Wipe A/S i Tyskland. Wet Wipe A/S finns på artikel 95-listan över godkända biocid-produktleverantörer av etanol.

Observera

Biocider måste användas på ett ansvarsfullt sätt. Läs alltid märkning och produktinformation innan användning.

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com

wetwipe®

50-536 01 DK V6 sv
Apr 2022

Vägghållare

Till Wet Wipe engångsdukar



För att göra det ännu enklare att använda Wet Wipe desinfektions- och universaldukar i det dagliga arbetet, kan vi erbjuda två typer av hållare i syrafast rostfritt stål. Vägghållarna kan monteras direkt på väggen.

De två olika hållarna är fjäderbelastade, vilket medför att dukarna är mycket lätta att ta ut ur förpackningarna – oavsett om förpackningarna är fulla eller halvtomma.

Vägghållarna är designade i nära samarbete med användarna och hygiensektionerna på de stora sjukhusen i Danmark.

Detta skall säkra optimal användarvänlighet.

Vägghållare i rostfritt stål:

Til Wet Wipe Mini
Art. nr. 6030065

Til Wet Wipe Maxi
Art. nr. 31066

Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43
info@wetwipe.dk
www.wetwipe.dk
CVR: 30207726

wetwipe®

Återförsäljare
Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
Tel: 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

22-002, SE, Ver. 6
Jan 2018

MEDI PLAST®

