

Pålidelig og intuitiv brugergrænseflade

Specifikke funktioner til patientsikkerhed

Premium kvalitet – "Made in Germany"



Tourniquet Touch

Til sikker regulering af blodtomhed under kirurgi på ekstremiteter

/ Tourniquet Touch TT20 / TT15

Tourniquet Touch er en elektrisk kirurgisk tourniquet. Den regulerer trykket på en tourniquet manchet, som midlertidigt okkluderer blodstrømmen fra patientens øvre eller nedre ekstremitet for at opnå et blodtomt felt. Brugervenlige innovationer som Fast Choice Buttons og det specifikke alarmsystem forenkler brugen af enheden og sikrer patientsikkerheden. Brugergrænsefladen er pålidelig og intuitiv og tillader nem vedligeholdelse for medicoteknisk afdeling (kalibrering, selvtest, lækagetest)

Tourniquet Touch TT20 med to manchetkanaler

Til brug med en manchet, dobbeltmanchet til intravenøs regional anæstesi (IVRA) eller to enkelt-manchetter til bilateral kirurgi.

Tourniquet Touch TT15 med en manchetkanal og en irrigationskanal

Til brug med en manchet og en trykinfusionspose til irrigation.



Specifikationer

Skærm

- 8" (800 x 480 pixel)
- Vidvinkel (170°)
- Lav refleksion, mat, anti-refleks

Touch Screen

- 100 % kvalitetsglas
- Nem rengøring og desinfektion
- Kan bruges med operationshandsker

Kabinet

- Med integreret håndtag
- Meget robust materiale
- Nem rengøring og desinfektion

Batteri

- Lithium-ion (14,4 V – 93,6 Wh)
- Ca. 8 timers backup tid

Manchetkanal

- Trykområde: 80 – 500 mmHg
- Tidsinterval: 15 – 120 minutter

Irrigationskanal (TT15)

- Trykområde: 50 – 300 mmHg



USB-Port

- Softwareopdateringer
- Gemmer logfil til analyse

Egenskaber


Genvejstaster

- Ændrer tryk og tid for forudindstillede værdier med kun to tryk
- Unødvendigt at trykke på pile og bekræftelsesknapper
- Muliggør hurtige trykændringer under operationen.

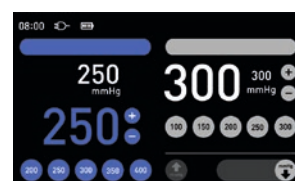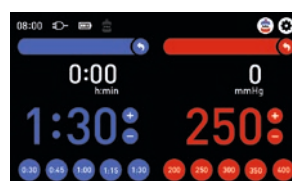

Alarm

- Præcis tidsovervågning under proceduren
- Brugeren advares, når den forud valgte tid udløber
- Forlængelse af alarmtid med 10, 20 eller 30 minutter

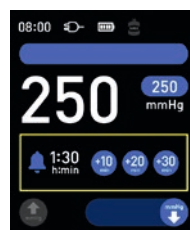

TT20

Intravenøs regional anæstesi (IVRA)

- Sikkerhedslås for at reducere risikoen for utilsigtet manchetdeflation og for at forhindre et pludseligt tab af IVRA



TT15

Kanal til trykinfusion

- Kanal med dedikeret stik til trykinfusionspose for at undgå utilsigtet forbindelse af Tourniquet-manchetter
- Tryk overvåges og justeres konstant for at kompensere tryktab forårsaget af tømning af infusionsposen



Bestillings-information

Tourniquet TT20 / Med 3,0 m spiral tilslutningsslange (blå og rød), 100 – 240 VAC, højde 186 mm, bredde 263 mm, dybde 226 mm, 4,5 kg

Art.nr. Æske
0120000 1

Tourniquet TT15 / Med 3,0 m spiral tilslutningsslange (blå og sort), 100 – 240 VAC, højde 186 mm, bredde 263 mm, dybde 226 mm, 4,5 kg

Art.nr. Æske
0115000 1

/ Mobil trolley med kurv

Egenskaber



Håndtering

- For nem manøvrering

Kabelophæng

- Til placering af ledning under transport

Slangeophæng

- Til placering af forbindelsesslanger under transport

Kurv

- Stor opbevaringskapacitet
- Mulighed for at fastgøre en ekstra kurv

Kabelkanal

- Inde i stativets søjle for korrekt føring af kablet

Bestillings-information

Mobilstativ med kurv / 4 hjul med hjullås (2 inkluderer ESD),
højde 939 mm, bredde 400 mm, dybde 400 mm, 8,2 kg

Art.nr. Æske

0100100 1

Kurv / Kurv med 2 kg bæreevne,
højde 185 mm, bredde 377 mm, dybde 196 mm, 0,73 kg

Art.nr. Æske

0100110 1



Klemme med beslag

Art.nr.	Beskrivelse	Æske
0100200	Klemme med beslag til vandret standardskinne	1
0100300	Klemme med beslag til lodret montering på tykt dropstativ	1

/ Forbindelsesslanger

Bestillings-information



Spiralslanger / Materiale: Polyurethan

Farve	Enhed	Stretched længde 3.0m	Udstrakt Længde 6.0m	Æske
Rød	TT20	Art.nr. 2020742	Art.nr. 0100520	1
Blå	TT20 / TT15	Art.nr. 2020744	Art.nr. 0100510	1
Sort	TT15	Art.nr. 2020740	Art.nr. 0100530	1



Glat forbindelsesslange / Materiale: Silikone

Farve	Enhed	4.5 m	Æske
Rød	TT20	Art.nr. 2020942	1
Blå	TT20 / TT15	Art.nr. 2020944	1

Yderligere information



Application Video

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.
The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



CE / CE 0123

PR0002_7.0_EN

Forhandler:
MEDI PLAST
Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com