

Robust og holdbar

UDI-kode

Latex-fri



Classic Infusor

Trykinfusionsmanchet, genanvendelig

Classic Infusor

500 ml og 1000 ml version

Med dobbelt krog til fiksering af forskellige typer infusionsposer.

- Hurtig administration af en infusionsopløsning til kompensation af væske-/volumenmangel
- Trykovervågning og skylning af slangesystemet under invasiv, arteriel blodtryksmonitorering
- Transfusion

3000 / 5000 ml version

Med lynlås, som muliggør indsættelse af forskellige typer infusionsposer.

- Administration af store væskemængder til brug i operationsfeltet

Classic Infusor's polyamidmateriale muliggør nem rengøring og desinfektion. Det gennemsigtige net giver et klart syn på væskeposen og væskenniveauet. Med UDI-kode for produktsporbarhed.

Egenskaber




Håndpumpe med tre-vejshane

- Ergonomisk håndpumpe til oppustning
- Tre-vejshane til hurtig deflation ved skift af væskeposen



Manometer

- Trykområde fra 0-300 mmHg i intervaller på 10mmHg
- Robust og holdbar til præcis trykovervågning

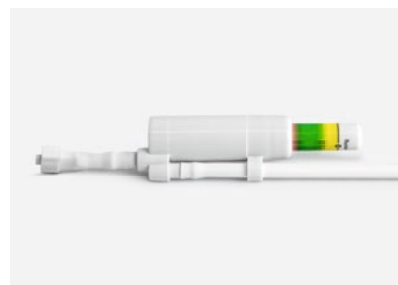

Farvekodet trykindikator

- 360° trykindikator letter trykovervågning
- Overtryksventil for at forhindre overoppustning

Bestillingsinformation

Classic Infusor / Genanvendelig

Version	500 ml	1000 ml	3000 / 5000 ml	Æske
Med håndpumpe, tre-vejshane og farvekodet trykindikator	Art.nr. 5802050	Art.nr. 5802100	-	1
Med håndpumpe, tre-vejshane og manometer	Art.nr. 5808050	Art.nr. 5808100	Art.nr. 5808300	1
Kun med luer lock konnektion	-	-	Art.nr. 5801300	1

Yderligere information



Video

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.

The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



PRO059_2.0_EN

VBM Classic Infusor DK 20231013 rev 1.pdf