

Fokus på det som er viktig

Smart væskehåndtering fra oppsuging til avhending

Serres er banebrytende på smarte væskehåndteringsløsninger rundt oppsuging, slik at helsepersonell rundt om i verden bedre kan fokusere på det som er viktig.

Vår lidenskap er å forbedre hele prosessen rundt oppsuging for å gjøre livet enklere for mennesker som stoler på utstyret vårt dag ut og dag inn.

Serres sugeposer er viktige rundt på sykehuset, noe som gjør væskesamling pålitelig og praktisk. Serres Nemo skaper verdi med tanke på kostnadseffektivitet, arbeidseffektivitet og arbeidssikkerhet, noe som gjør væskedisponering tryggere, renere og enklere enn noen gang før.


Sammen skaper Serres Suction Bag System og Serres Nemo en integrert væskehåndteringsløsning fra oppsuging til avhending.

Stol på det viktigste i væskeoppsamling

Væskeoppsamlingspiller en avgjørende rolle på sykehus; en som helsepersonell må kunne stole helt på. Derfor er pålitelighet den første kvaliteten du ser etter i væskeoppsamling.

Serres Suction Bag Systems støtter over 40 000 operasjoner rundt om i verden hver dag, og har tillit til å tilby sikker og pålitelig væskeoppsamling når feil ikke er et alternativ.

Serres Suction Bag System er designet med brukerne og er enkelt å lære og ta i bruk, noe som letter den daglige arbeidsflyten på sykehusene.

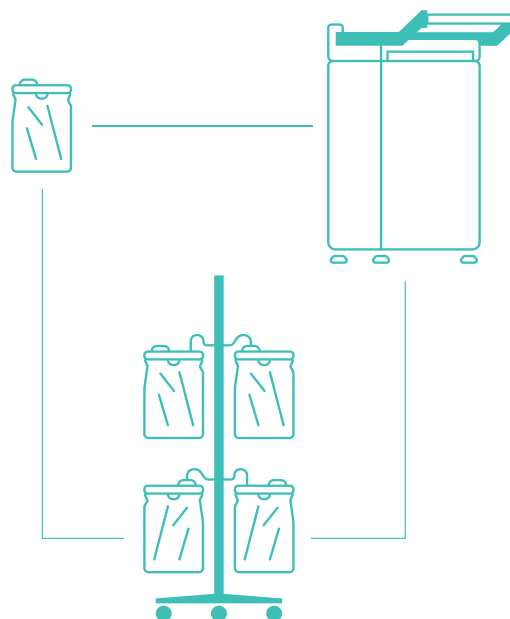

- **Pålitelighet:** Serres sugeposer er klarert for å tilby pålitelig væskeoppsamling over hele verden.
- **Enkelhet:** Designet med brukerne, alle Serres-produkter er intuitive å sette opp og praktiske i bruk.
- **Bærekraft:** Serres-løsningen forbedrer bærekraften ved å redusere avfall og skape ny effektivitet.

Skaper verdier av avfall for avhending

Serres Nemo

Skyller bort væske avfall med Serres Nemo

Serres Nemo er væskeavhendingsutstyr for Serressugeposer og fremmersikrere, smartere og mer kostnadseffektiv væskehåndtering på sykehus, og skaper verdier av avfall for avhending.

Serres Nemo er designet for avhending av risiko-avfall på stedet, ettersom kostnadene for avfallshåndtering bare gjelder tomme sugeposer i stedet for væskeavfall, sykehus drar fordel av opptil 97 prosent kostnadsbesparelser i væskeavhending. Fra hygienesynspunkt skyller Serres Nemo bort risikoavfall og minimerer risikoen for kontaminering.

Nå finnes Nemo i en ny oppdatert versjon med et lettere og sikrere lokk med myk lukking.

Serres Nemo er koblet til en vann- og avløpsnett og skyller innholdet i sugeposen i kloakken på bare 15 sekunder. På slutten av syklusen kan den tomme serres sugeposen håndteres i henhold til sykehusets spesifikasjoner.

Serres Nemo passer inn i trange rom med sin funksjonelle design og kompakte form. Daglig rengjøring av utstyret er gjort enkelt med Serres rengjøringslokk.

Tekniske data	
Egnet for	Tømming av Serres 2000 ml og 3000 ml standard sugeposer
Dimensjoner	H: 1010-1060 mm B: 330 mm D: 630-730 mm
Kontakter	Kald vann: R ½" Kloakk: DN 50 El: jordet støpsel 230V/50 Hz, 10A
Materiale	Rustfritt stål, plast
Vekt	Cirka 60 kg
Vannforbruk	6,3 liter/ syklus



Art.nr.	Beskrivelse	Forpakning
60579842	Serres Nemo, gulvmodell	1/1

“Proessen for avfallshåndtering av væske er nå under kontroll”

Antonella Burtin, hygiene sykepleier
Montpellier Frankrike

- **Verdi:** Serres Nemo genererer verdi for hver gang den brukes, noe som gir opptil 97 prosent kostnadsbesparelser ved avfallshåndtering.
- **Hygiene:** Serres Nemo gjør væskeavhending rent og trygt i et lukket system. Serres sugeposer tømmes i en forseglett beholder.
- **Bekvemmelighet:** Serres Nemo fremskynder din daglige arbeidsflyt med en tømme-syklus på bare 15 sekunder.

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast AS
Tollbugata 115, 3041 Drammen
T 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com

Regn ut hvor mye dere kan spare - serres.com/nemocalculator