

Akut tracheostomi i CICO /nødsituation (kan ikke intuberes- kan ikke iltes)

I henhold til DAS 2015 retningslinjer

Kompakt og let sæt



## ScalpelCric


Sæt til kirurgisk cricothyrotomi i henhold til skalpelteknikken

# / ScalpelCric


ScalpelCric er et kirurgisk sæt til cricothyrotomi i henhold til skalpelteknikken. Sættet er udviklet til at matche anbefalingerne fra DAS (Difficult Airway Society) 2015 retningslinjer.

Baseret på den enkle beskrivelse af "stik, vrid, bougie, tube", er ScalpelCric beregnet til at lette udførelsen af akut tracheostomi i en CICO/ nødsituation (kan ikke intuberes – kan ikke iltes). Sættet er pakket i en steril pose med hver komponent organiseret i den rækkefølge, den skal anvendes. Dette reducerer risikoen for forvirring i den kritiske situation.


## Funktion

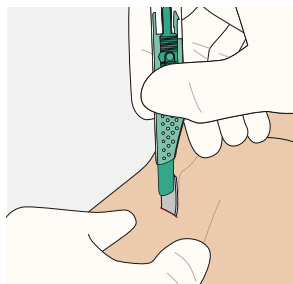


1. Stik

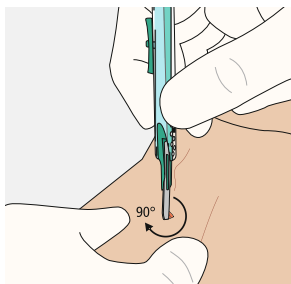

2. Vrid

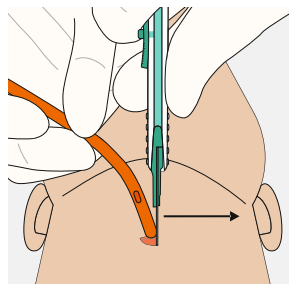

3. Bougie

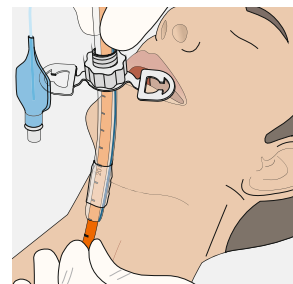

4. Tube

## Egenskaber

### Bougie

- Lav friktionsoverflade for nem indførsel i tuben
- Vinklet og atraumatisk spids
- Centimetermarkeringer til kontrol af indføringsdybden

### 6.0 mm I.D. tube

- Cuff til beskyttelse mod aspiration
- Bevægelig flange
- Atraumatisk, afrundet tubespids

### Tube forlænger

- Med sugemulighed ≤ 16 Fr

### Tracheostominakkeband

- Sikker fiksering af tuben



1 2 3 4 5 6

### Indhold

- 1 Skalpel # 10
- 2 14 Fr bougie (40 cm)
- 3 6.0 mm I.D. tube med cuff
- 4 Tube forlænger
- 5 Sprøjte 10 ml
- 6 Nakkeband

Robust emballage og kompakt pakkestørrelse, som passer til nødtasker, rygsække, akuttvogne osv.

### Pakkestørrelse:

31,5 cm (L) x 15,2 cm (B) x 5,0 cm (H)

### Udfoldet størrelse / sterilt felt:

56 cm (L) x 39 cm (B)

## Bestillingsinformation

ScalpelCric / Engangsbrug, steril

| Art.nr.  | Æske |
|----------|------|
| 30084471 | 1    |

## Yderligere information



Video

Forhandler:  
**MEDI PLAST**

Medioplast A/S  
Marielundvej 46E, 2730 Herlev  
T 43 44 40 00  
info.dk@mediplast.com  
www.mediplast.com

This product is manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.  
This product does not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.