

# SILIKONEMANCHET MED VELCRO

- ENKELTPORT
- TIL FLERGANGSBRUG
- AUTOKLAVERBAR

Silikonemanchetterne med velcro er et godt valg, når det kommer til sikre, pålidelige og økonomiske løsninger.

Designet og specifikationerne gør, at manchetterne kan modstå alle former for bearbejdning f.eks. manuel/aftørring og automatisk/termisk rengøring og desinfektion.

Silikonemanchetterne med velcro er også valideret til sterilisering med dampautoklave ved en temperatur på 134 °C i 5 minutter.

TIL  
TOURNIQUET

**VBM**


### Manchetdesign

- Robust fremstillingsproces for lang levetid
- VBMs egen løsning af aftagelig silikoneblære; let at tørre af - tørrer hurtigt
- 86 cm lang slange af kink-resistent silikone-materiale
- Farvekodet for let valg af størrelse på manchet
- PVC-fri



### Konisk form

- Konisk design med en mindre diameter distalt end proksimalt
- Okkluderer blodgennemstrømningen ved lavere manchettryk på grund af en forbedret tilpasning til koniske ekstremiteter
- Særligt blæredesign (bølgeformet mønster) for at forhindre manchetmigrering

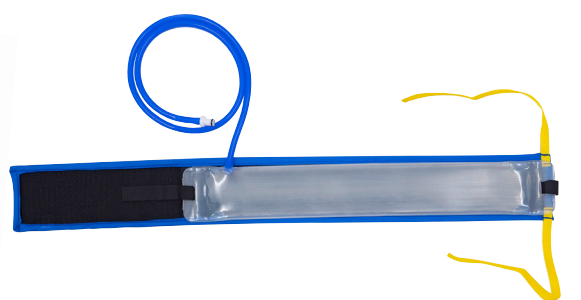








### Lige form

- Cylindrisk design
- Ingen forskel i diameter mellem proksimal og distal manchetkant

### Silikonemanchet med velcro

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Længde	Bredde	Farve	Æske/Trsp.karton
2064700	20 cm	2,5 cm	-	1/1
2064710	30 cm	4,0 cm		1/1
2064611	35 cm	6,0 cm		1/1
2064612	46 cm	7,5 cm		1/1
2064512*	46 cm	11,0 cm		1/1
2064522*	61 cm	11,0 cm		1/1
2064527*	78 cm	11,0 cm		1/1
2064528*	86 cm	11,0 cm		1/1

\*Konisk form

Video:  
Armmanchet



Video:  
Benmanchet

