



Dimensioner: SERRES NEMO

Beskrivelse	Serres NEMO, enhed til tømning af sugeposer	
Anvendelse	Serres Nemo er designet til at tømme og gennemskylle to- og treliters standardsugeposer fra Serres. Enheden tømmer sugeposernes indhold i afløbet.	
Produkt	Serres NEMO	6003128 (DK) 60579842 (SE NO)
Teknisk specifikation	Installationstype	Gulvmodel
	Elektrisk tilslutning	220-240V / 50 Hz, type F and E (Schuko)
	Koldt vandstilslutning	G ½" (tilslutningsslange 1.5 m inkluderet)
	Afløbstilslutning	DN 50 (vinkelbøjet tilslutning)
	Vandtryk	1-8 bar
	Tømningscyklus	15 sekunder
	Strømforbrug (220-240V / 50 Hz)	Opstart (momentant) 1932 W Ved brug 450 W Slumretilstand 5W
	Vandforbrug ved en tømningscyklus	6,8 Liter
	Luftspalte	AB-type luftspalte som beskyttelse til vandforsyningen

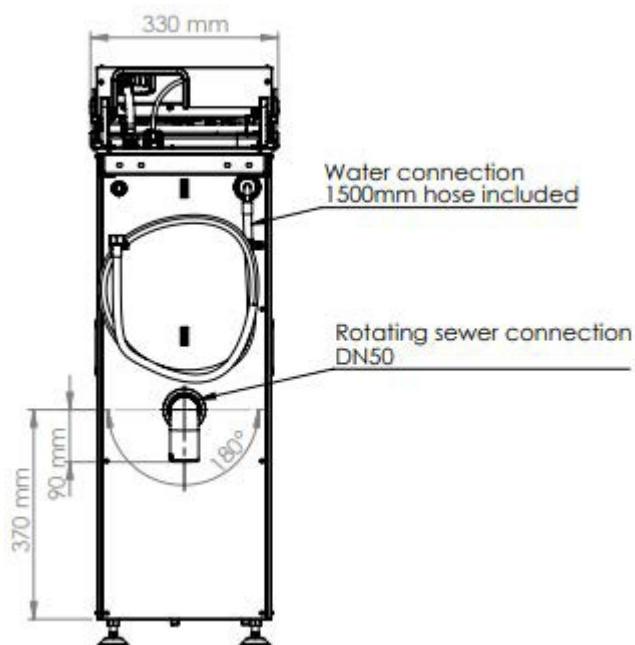

serres

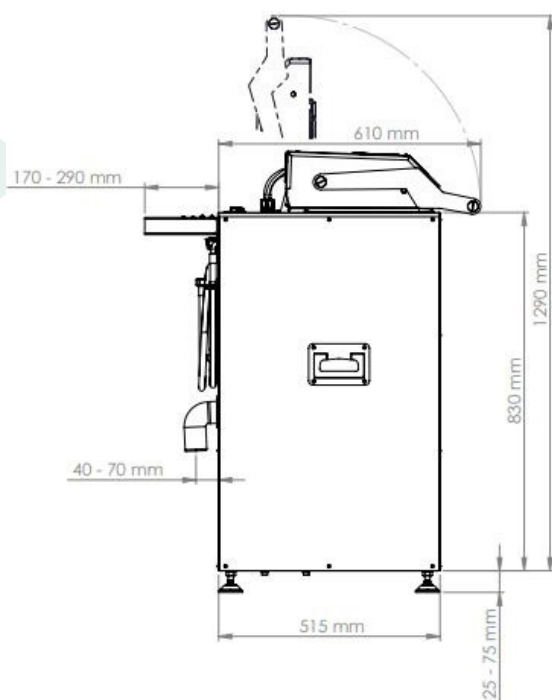