


## SUGKATETRAR

Rak, coudé (böjd)  
samt med vacuumkontroll

Medioplast har ett av Nordens största sortiment av sugkatetrar med hög kvalitet, tillverkade för alla olika behov i vården. Beroende på vilket användningsområde så erbjuder vi inte bara olika längd och storlek, utan även olika design, material och förpackning.

## DESIGN


Coudé katetern har en **vinklad spets**, som gör det möjligt att styra riktningen på katetern ned i bronkialträdet. En liten knopp på konnektorn markerar åt vilket håll spetsen är böjd åt.

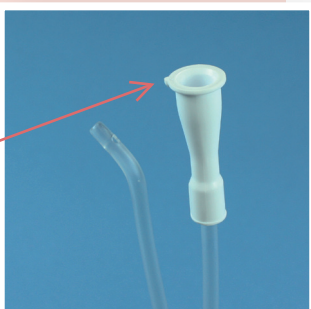



Alla sugkatetrar har ett centralt, mjukt rundat hål i spetsen, **utan vassa kanter**. Det finns även två motsatta avlastningshål ca en cm upp från änden, allt för att åstadkomma en atraumatisk sugning.



Det finns sugkatetrar med inbyggd **vacuumkontroll** för att genom intermitterent sugteknik enkelt kunna styra sugstyrkan med fingertoppen.

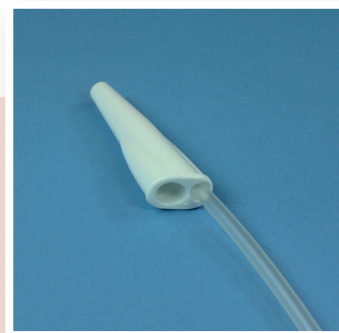


Alla sugkatetrar har en färgkodad konnektor enligt standarden för sugkatetrar **EN ISO 8836:2019** för att underlätta identifiering av rätt storlek.

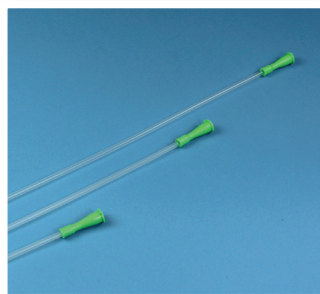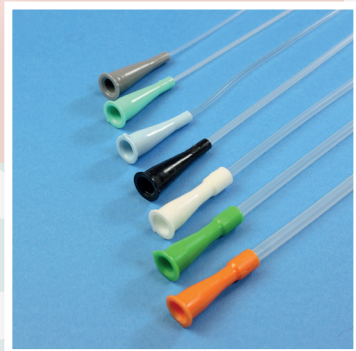

Raka katetrar finns i **3 längder**, inklusive konnektor (4 cm), 25 cm, 40 cm, 53 cm.

Sugkatetrar med vacuumkontroll finns i **två längder** inklusive konnektor (6 cm): 35 cm sugkateter med centimetergradering samt 53 cm utan gradering.

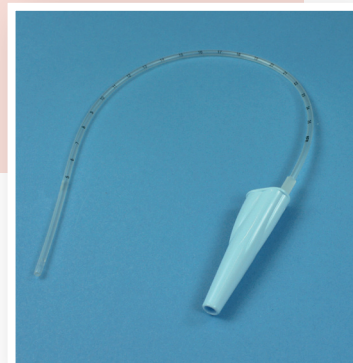

Coudé sugkateter (böjd) finns som 53 cm längd, inkl. konnektor (4 cm).



Alla sugkatetrar är en engångsprodukt som levereras sterila med **hållbarhet 5 år**. Steriliseringsmetod Etylenoxid.

## MATERIAL


Mediplast erbjuder sugkatetrar i två olika material, **PVC utan ftalater eller TPE** som är ett PVC-fritt material. Mjukgöraren som används för PVC är en non-ftalat som heter ATBC.

Materialet i en sugkateter återvinns sällan utan skickas i de flesta fall till förbränning. Idag strävar man av miljömässiga skäl bort från användandet av PVC eftersom detta är en klorerad plast som vid förbränning bildar saltsyra (HCl). Det krävs speciella åtgärder för att hantera den saltsyra som uppstår och i de fall där det finns PVC-fria alternativ, rekommenderas dessa i stället.

För användaren finns det även en liten försumbar skillnad i de båda materialen. Det PVC-fria alternativet är något mer stabilt, där sugkatetern i PVC är något mjukare och mer följsam. Skillnaden går knappt att urskilja, men när användningsområdet varierar, kan även val av material ha betydelse.

## FÖRPACKNING


Produktförpackningen är en sk **peelpack** som är gjord av papper och plast. Den har ett hål i toppen för att kunna hängas upp.

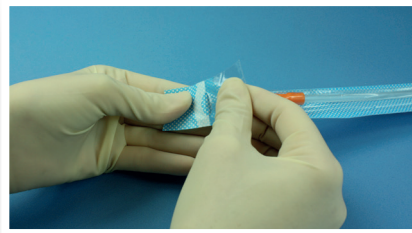


Förpackningen har även en blå prickig insida som är en beläggning som gör att pappret lätt skiljs från plasten **utan att det rivs itu**. En säker och aseptisk öppning säkras.

Produkterna förpackas enligt tre-lagersprincipen. 100 st sugkatetrar ryms i en avdelningsförpackning, 6 avdelningsförpackningar med 600 sugkatetrar i en transportkartong. Minsta beställningsbara enhet är 100 st = MBE.

För att förenkla uttagandet ur avdelningsförpackningen kan Mediplast nu erbjuda **sugkatetrar singelförpackade**. Produkten är lättare att få ut, samtidigt som man kan vara förvissad om att katetrarna förvaras rakt och platt inuti kartongen.

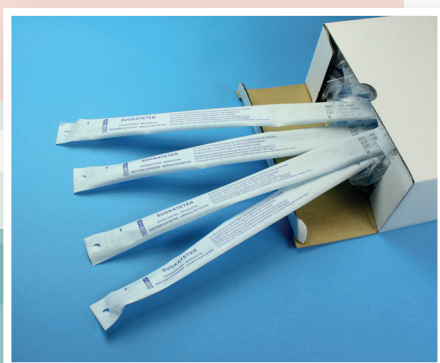

Standardförpackningen är annars att sugkatetrarna ligger i **perforerade ark** i avdelningskartongen, som fortfarande möjliggör att kunna ta ut en sugkateter åt gången, men förenklar distributionen i de fall man vill sätta katetrarna i en hållare.

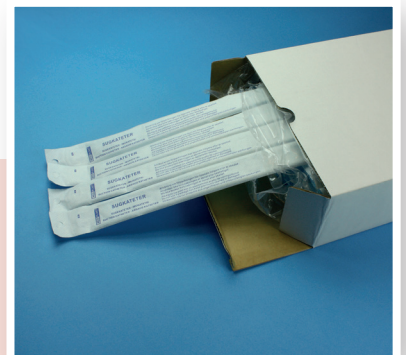

**SUGKATETER RAK, 25 CM**

PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
	60880525	60130525-1	05	grå	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	ljusgrön	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	ljusblå	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	svart	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	vit	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	grön	100/600
	60881625		16	orange	100/600


**SUGKATETER RAK, 40 CM**

PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
	60880540		05	grå	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	ljusgrön	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	ljusblå	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	svart	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	vit	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	grön	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	orange	100/600

**SUGKATETER RAK, 53 CM**


PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
608806531	60880653	60130653-1	06	ljusgrön	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	ljusblå	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	svart	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	vit	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	grön	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	orange	100/600
		60131853-1	18	röd	100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

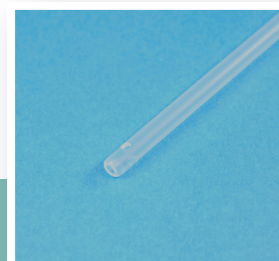

## SUGKATETER, COUDÉ, 53 CM

PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
608708531	60870853	60170853-1	08	ljusblå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	svart	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	vit	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grön	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600

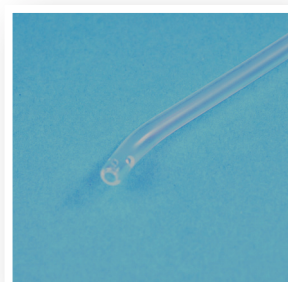

## SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, CM-GRADERAD, 35 CM

PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
60151804-1	04	lila	100/600
60151805-1	05	grå	100/600
60151806-1	06	ljusgrön	100/600
60151808-1	08	ljusblå	100/600
60151810-1	10	svart	100/600

## SUGKATETER, MED VAKUUMKONTROLL, 53 CM

PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
60150653-1	06	ljusgrön	100/600
60150853-1	08	ljusblå	100/600
60151053-1	10	svart	100/600
60151253-1	12	vit	100/600
60151453-1	14	grön	100/600
60151653-1	16	orange	100/600
60151853-1	18	röd	100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning



**Att arbeta med människors hälsa är ett viktigt uppdrag. Vi på Mediplast möter dagligen dedikerade människor inom sjukvården som gör sitt yttersta för att leverera bättre och säkrare vård. Ett arbete som allt oftare ska ske till fler patienter, på kortare tid och med knappare resurser.**

För att förbättra sjukvården finns Mediplast vid din sida, alltid redo att leverera kunskap och innovativa lösningar.

Vi tror nämligen på nära relationer. Genom att dagligen befina oss ute i olika vårdmiljöer ser vi dina behov och kan ta till oss dina önskemål. Och genom att ha en hög, samlad kompetens och år av erfarenhet kan vi leverera tillbaka kunskap och råd som verkligen gör skillnad. Allt för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård.

### **Nära partner till nordisk sjukvård**

Mediplast är en svensk leverantör av medicintekniska produkter, med i huvudsak Norden som marknad. Vårt produktsortiment består dels av egna produkter av hög kvalitet, ofta utvecklade i nära samarbete med våra kunder inom sjukvården, dels av utvalda produkter från välkända leverantörer.

Vårt produktsortiment är brett och innehåller allt från engångsprodukter till avancerad utrustning av investeringskaraktär. Produkterna finns inom område såsom Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/ Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård.

### **Avfallssortering**

Peelpack: Delas i två delar - Papper → pappersåtervinning  
Plast (PP/PE) → plaståtervinning  
Innerpåse i avdelningsförpackning: LDPE → plaståtervinning  
Avdelningsförpackning, vit: → pappersåtervinning  
Transportkartong, brun: → pappersåtervinning