


Infusjonssett med flytregulator

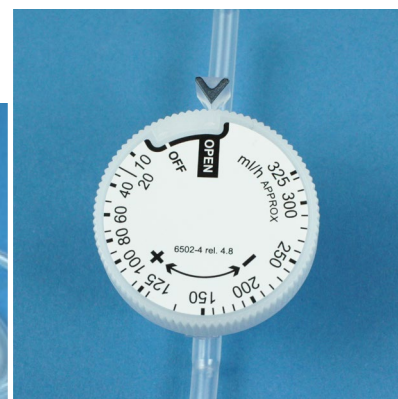

- Flytregulator forhindrer at infusjonen går inn for raskt
- Måleren kan stilles inn med 10 ml gradering mellom 10-325 ml/h
- Spiss uten silikon som sikrer god tilkobling til infusjonsposen/flasken
- Væskefilter på 15 µm og luftfilter på 0,2 µm
- Flowstop med hydrofobt filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- Selvutløsende, roterende luer-lock
- Air-Guard forhindrer luft i å komme inn i slangen når det er tomt for infusjon
- MR-kompatibel

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500156F	Infusjonssett, 180 cm, med lufting og flytregulator	PVC-fri	10/100*
60MR60500156FV	Infusjonssett, 180 cm, med lufting, flytregulator og tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusjonssett, 180 cm, med lufting, flytregulator og Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60MR60500161F	Infusjonssett, 320 cm, med lufting og flytregulator	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: TPE Dråpekammer: SB Spiss: ABS Luftfilter: PP	Væskefilter: PA Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Klype: PP Tilbakeslagsventil: MABS/silikon Flytregulator: PC/POM	Sterilisering: EO Infusjonssett, 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
--	---	---