

Fokusera där det behövs allra mest

Smart lösning från sug till avfallshantering

Serres utvecklar nya smarta lösningar för vätskehantering, med syfte att vårdpersonal i hela världen kan lägga sitt fokus där det behövs allra mest.

Vår passion är att förbättra hela hanteringsprocessen av sugavfall och underlätta tillvaron för alla som är beroende av vår utrustning varje dag.

På sjukhuset har Serres sugpåsar en avgörande betydelse för att göra vätskeuppsamlingen tillförlitlig och trygg. Serres Nemo skapar värde genom att vara kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Även utifrån arbetsmiljösynpunkt gör den kasseringen av sugavfall säkrare, renare och enklare än någonsin.


Tillsammans skapar Serres sugpåssystem och Serres Nemo en integrerad vätskehanteringslösning – från sugning till kassering.

Lita på en säker vätskeuppsamling

Vätskeuppsamlingen spelar en avgörande roll på sjukhusen och vårdpersonalen måste kunna lita helt på att den fungerar. Därför är tillförlitlighet den viktigaste egenskapen när det gäller vätskeuppsamling.

Runt om i världen används Serres sugpåssystem på över 40 000 operationer dagligen och gör vätskeuppsamlingen trygg och tillförlitlig där misslyckande inte är något alternativ.

Serres sugsystem har utformats med användaren i fokus och är enkelt att lära sig hantera vilket underlättar det vardagliga arbetsflödet.

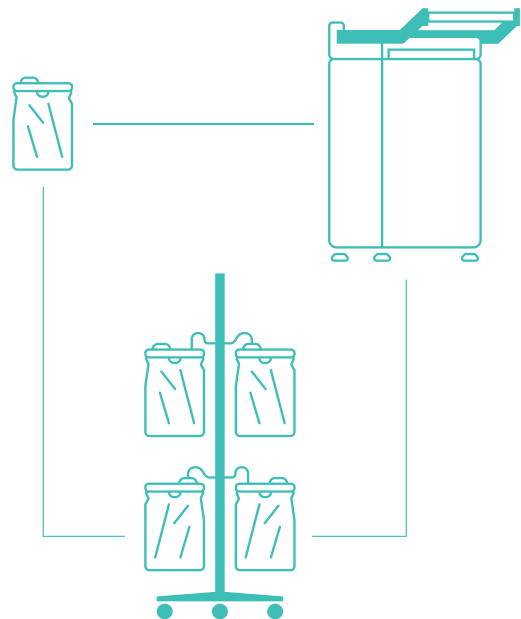

- **Tillförlitlighet:** Över hela världen står Serres sugpåsar för tillförlitlig vätskeuppsamling.
- **Enkelhet:** Tack vare att alla produkter från Serres är utformade i samarbete med användarna, är installationen intuitiv och produkterna praktiska att använda.
- **Hållbarhet:** Serres lösning förbättrar hållbar hantering genom att minska avfallet och öka effektiviteten.

Skapa värde genom smart avfallshantering

Serres Nemo

Samla upp vätskeavfall med Serres Nemo

Serres Nemo är utrustningen som tar hand om avfallet från Serres sugpåsar på ett säkrare, smartare och mer kostnadseffektivt sätt. Detta skapar värde genom att förenkla sjukhusets avfallshantering.

Serres Nemo har utformats för att medicinskt sug-avfall ska kunna kasseras på sjukhuset. Sjukhusen kan minska sina avfallskostnader med upp till 97% eftersom sugpåsar kasseras tömda, snarare än med sugavfall i. Utifrån ett hygienperspektiv hanterar Serres Nemo sugavfall med minskad risk för kontaminering.

Nu finns Nemo i en ny uppdaterad version med ett lättare och säkrare lock med mjuk stängning.

Serres Nemo ansluts till vatten- och avloppssystemet och spolar ner innehållet från Serres sugpåsar i avloppet på bara 15 sekunder. I slutet av cykeln kan de tömda sugpåsarerna återvinnas i enlighet med sjukhusets rutiner.

Med sin funktionella design och kompakta utformning kan Serres Nemo placeras även i begränsade utrymmen. Diskplattan gör utrustningens dagliga rengöring enkel.

Tekniska data	
Avsedd för	Tömning av Serres 2- och 3-liters sugpåsar
Mått	H: 1010-1060 mm (stängt lock) B: 330 mm D: 780-900 mm
Anslutningar	Kallvatten: G ½" Avlopp: DN 50 El: jordad stickpropp 230V/50 Hz, 10A
Material	Rostfritt stål, plast
Vikt	Cirka 60 kg
Vattenförbrukning	6,8 liter/ cykel



Art.nr.	Beskrivelse	Forpakning
60579842	Serres Nemo, golvmodell	1/1

“Nu har vi kontroll över vår hantering av sugavfall”

Antonella Burtin, hygiensjuksköterska, Montpellier Frankrike

- Kortare tömningscykel. Nu töms en påse på bara 15 sekunder (tidigare 18 sek)
- Ett nytt "soft-closing" lock med betydligt mjukare stängning, där man dessutom minskar risken för klämskador
- Längre väggfäste för att ge större flexibilitet vid installation
- 15% lägre vattenförbrukning, nu endast 6,8L vatten per sköljning mot de tidigare 8L.
- På Nemo finns nu en etikett med QR-kod som leder direkt till de senaste användarinstruktionerna på Serres hemsida. Alltid till hands!

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

Räkna ut hur mycket ni kan spara - serres.com/nemocalculator