



# danumed® Matningsset för gastrostomiknapp

*Matningsset för tillförsel av enteral näring, flytande medicin och dekompression.*

*Innovativa funktioner optimerar flödes-hastigheten och förenklar hanteringen för användaren.*

*Kostnadseffektiv lösning med användning i upp till 14 dagar.*



## KOMFORT




### Innovativ roterande koppling ENSwivel

- Gör det möjligt att lätt, snabbt och bekvämt ansluta och lossa ENFit® kopplingar med enhandsfattning.
- Endast den roterande Swiveln vrids och inte hela anslutningen. Med denna funktion undviks vridning av enteralslangen, vilket är både smärtsamt för patienten och obekvämt för användaren.
- Alla danumed ENFit® kopplingar erbjuder fördelarna med ENSwivel®: ENFit®, Y-ENFit® och Bolus-ENFit®.

### Högkvalitativ knappkoppling

- Låsmekanismen med optimerad design garanterar enkel, säker och tät anslutning till knappen.

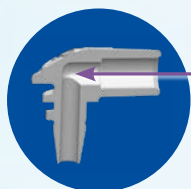

Den rundade vinkeln i den inre lumen optimerar flödes-hastigheten.



Ergonomisk form och ribbade kanter för bra grepp till knappen.

## SÄKERHET

### Maximal säkerhet för patienten

- ENFit® kopplingen enligt DIN EN ISO 80369-3 undviker felkopplingar av slangar och ökar patientsäkerheten avsevärt.
- Alla ENFit® kopplingar från danumed är tillverkade av TRITAN, ett plastmaterial som är motståndskraftigt mot aggressiva lösningar/läkemedel.
- Alla matningsset med ENFit® kontakt är fria från latex, PVC, DEHP och BPA.
- Slangen är tillverkade av knickfri, biokompatibel polyuretan. Kan användas i upp till 14 dagar.



## danumed® Matningsset med vinklad koppling



| REF          | Beskrivning                                            | Längd (cm) | Koppling | Latexfri | PVC fri | DEHP fri | BPA fri |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| DA 1011 3011 | Matningsset <b>steril</b> , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®   | 30 cm      | ENFit®   | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 6011 | Matningsset <b>steril</b> , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®   | 60 cm      | ENFit®   | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 0521 | Matningsset <b>steril</b> , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®  | 5 cm       | Y-ENFit® | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 3021 | Matningsset <b>steril</b> , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel® | 30 cm      | Y-ENFit® | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 6021 | Matningsset <b>steril</b> , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel® | 60 cm      | Y-ENFit® | •        | •       | •        | •       |

Levereras med vinklad koppling och standard diameter på slang. Individuellt förpackade. 10 stycken i en låda, 10 lådor i en transportförpackning.



## danumed® Matningsset med rak koppling



| REF          | Beskrivning                                                  | Längd (cm) | Koppling       | Latexfri | PVC fri | DEHP fri | BPA fri |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|---------|----------|---------|
| DA 1011 3032 | Matningsset <b>steril</b> , 30 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®   | 30 cm      | ENFit® Bolus   | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 6032 | Matningsset <b>steril</b> , 60 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®   | 60 cm      | ENFit® Bolus   | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 3022 | Matningsset <b>steril</b> , 30 cm, Y-ENFit® Bolus, ENSwivel® | 30 cm      | Y-ENFit® Bolus | •        | •       | •        | •       |
| DA 1011 6022 | Matningsset <b>steril</b> , 60 cm, Y-ENFit® Bolus, ENSwivel® | 60 cm      | Y-ENFit® Bolus | •        | •       | •        | •       |

Levereras med rak koppling och bred diameter på slang. Individuellt förpackade. 10 stycken i en låda, 10 lådor i en transportförpackning. Matningsseten kan på begäran fås med trattkoppling i stället för ENFit®-koppling.

## Relaterade produkter till danumed® Matningsset:



danuButton®  
Gastrostomi knapp



danumed®  
Enteral sprutor

Återförsäljare:

**MEDI PLAST**

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

info.se@mediplast.com

www.mediplast.com

**danumed Medizintechnik GmbH –  
Individuella lösningar är vår standard.**

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Tyskland  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • [www.danumed.com](http://www.danumed.com)



INNOVATORS IN ENTERAL CARE