

A photograph of a surgical procedure in progress. A surgeon in blue scrubs and gloves is using a surgical instrument to work on a patient's back. Another person in blue scrubs is holding a metal cup and a bottle. The patient is lying on a table, covered with a blue drape. The background is a blurred operating room.

MEDI PLAST

SÅRDÆNAGE

Indholdsfortegnelse

Silikonedræn View	4
Silikonedræn Jackson Pratt.....	6
Silikonedræn Smart dræn	8
Silikone Spiral dræn	10
Silikone T-dræn	12
Silikone Fladt kanaldræn.....	14
Silikone Kapillædræn Penrose.....	16
PVC Redon dræn.....	18
Lukket drænagesæt Robinson	20
Silikone Bolde.....	22
Silikonebold 100 ml med pose.....	24
Silikonebold 200 ml med tømbar pose.....	26
Silikonebold 400 ml med forlænger og tømbar pose.....	28
Bælg 50 ml	30
Bælg lukkede.....	32
Bælg med pose	34
Opsamlingsposer	36



Silikonedræn View

Redax silikonedræn type View består af et vævsvenligt blødt materiale, der giver lav friktion og dermed højere gennemstrømning og minimal risiko for koagulation.

PRODUKTFAKTA

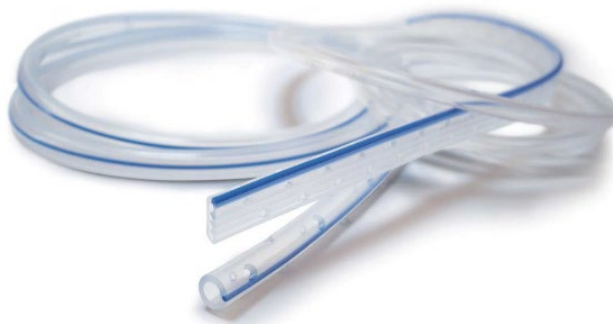
- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, som letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i drænhullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- 6 ovale drænhuller (3 på hver side) forskudt af hinanden
- Røntgenmarkering samt tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Størrelser fra CH 9 til CH 36 (CH 3 mellem hver størrelse)
- Dræn findes ikke med trokar
- Silikonedrænet er 50 cm langt
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Længde cm	Antal/æske
6024309	3.0	9	50	20
6024312	4.0	12	50	20
6024315	5.0	15	50	20
6024318	6.0	18	50	20
6024321	7.0	21	50	20
6024324	8.0	24	50	20
6024328	9.3	28	50	20
6024330	10.0	30	50	20
6024333	11.0	33	50	20
6024336	12.0	36	50	20

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: HDPE Støbt emballage: OPA, PP, PE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Marksedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Silikonedræn Jackson-Pratt-Type

Redax silikonedræn type Jackson-Pratt består af et vævsvenligt blødt materiale, der giver lav friktion og dermed højere gennemstrømning og minimal risiko for koagulation. Jackson-Pratt silikonedrænet findes i en rund og i en flad udgave.

PRODUKTFAKTA

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, som letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i drænhullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- Fås som runde eller flade dræn med huller/perforering på 20 cm af drænet
- Runde dræn er 110 cm lange og er fremstillet i ét stykke uden samlinger, med røntgenfast linje og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering. Med eller uden trokar
- Flade dræn er 110 cm lange og er fremstillet i ét stykke uden samlinger med røntgenfast linje og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering. Det flade dræn er indvendigt forsynet med riller på ene side og glat på den modsatte side. Drænet har ydermere talrige hulperforeringer i det drænerende stykke
- Flade dræn kan fås med perforering/huller 20 cm fra spidsen eller med såkaldt $\frac{3}{4}$ perforering, hvor kun 15 cm af det flade dræn er perforeret. Formålet med dette er at lette udtagningen
- Dræn findes med og uden trokar
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Type	Str. CH/mm	Trokar	Længde cm	Antal/ æske
6024200	Rund	CH 7	Nej	110	20
6024210	Rund	CH 10	Nej	110	20
6024220	Rund	CH 15	Nej	110	20
6024230	Rund	CH 19	Nej	110	20
6024201	Rund	CH 7	Ja	110	20
6024211	Rund	CH 10	Ja	110	20
6024221	Rund	CH 15	Ja	110	20
6024231	Rund	CH 19	Ja	110	20
6024110	Flad	3 x 7 mm	Nej	110	20
6024111	Flad	3 x 7 mm	Ja	110	20
6024130	Flad	4 x 10 mm	Nej	110	20
6024131	Flad	4 x 10 mm	Ja	110	20
6024140	Flad	4 x 13 mm	Nej	110	20
6024141	Flad	4 x 13 mm	Ja	110	20
6024100	Flad	3 x 7 mm med ¾ perforering	Nej	110	20
6024101	Flad	3 x 7 mm med ¾ perforering	Ja	110	20
6024120	Flad	4 x 10 mm med ¾ perforering	Nej	110	20
6024121	Flad	4 x 10 mm med ¾ perforering	Ja	110	20

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbelt pakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: HDPE Støbt emballage: OPA, PP, PE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Marksedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.


REDAX®



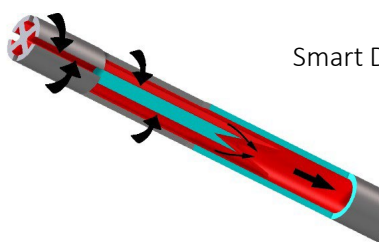
Silikonedræn 4-kanals Smart drain

Redax SMART Drain-serien i blød silikone bevarer vakuum og drænerer såret, selv om drænet udsættes for tryk fra f.eks. kropsbevægelser. Silikone er et vævsvenligt blødt materiale, der giver lav friktion og dermed højere gennemstrømning og minimal risiko for koagulation.

PRODUKTFAKTA

SMART Drain er patenteret af Redax med et avanceret, såkaldt "centerfrit" design. Dette design giver mulighed for at opnå en effektiv, høj og jævn drænering fra hele drænet. SMART Drain er et gennemsigtig silikonedræn med røntgenfast linje og fire kanaler uden skarpe kanter. Drænen foregår i hele drænets længde med deraf følgende minimering af indvækst og ubehag for patienten i forbindelse med sårheling og drænfjernelse.

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, hvilket letter inspektion
- Røntgenmarkering og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Fås i en række størrelser: CH 10, 12, 15, 19 og 24 med eller uden trokar
- Redax SMART Drain er 100 cm lange
- Sterilt engangsprodukt



Smart Drain – centerfrit

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Trokar	Længde cm	Antal/ æske
6024710	3.3	10	Nej	100	10
6024712	4.0	12	Nej	100	10
6024715	5.0	15	Nej	100	10
6024719	6.3	19	Nej	100	10
6024724	8.0	24	Nej	100	10
6024702	3.3	10	Ja	100	10
6024705	4.0	12	Ja	100	10
6024703	5.0	15	Ja	100	10
6024704	6.3	19	Ja	100	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Trokar: rustfrit stål Biokompatibilitet og hæmokompabilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Støbt emballage: OPA, PP, PE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Marksedsintroduktion	2001
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Spiral dræn

4-kanals spiraldræn, silikone

Redax unikke Spiral dræn i blødt silikone er patenteret. Drænet består af et vævsvenligt blødt materiale, der giver lav friktion og dermed højere gennemstrømning og minimal risiko for koagulation. Det bevarer vakuum og drænerer såret, selv om drænet udsættes for tryk f.eks. fra kropsbevægelser.

PRODUKTFAKTA

SPIRAL Drain er patenteret af Redax med et avanceret design. Drænarealet er samlet set større end et standard dræn. Dette sikrer en meget høj, jævn gennemstrømning fra hele drænet, som gør det muligt at vælge en mindre diameter, hvilket er mere skånsomt for patienten. Silikonematerialet i SPIRAL Drain kaldes StatSil®Elastomer. Spiral Drain er et røntgenfast dræn med fire kanaler uden skarpe kanter. Drænen foregår i hele drænets længde med deraf følgende minimering af indvækst og ubehag for patienten i forbindelse med sårheling og drænfjernelse.

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i hullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- Drænet har god gennemsigtighed, hvilket letter inspektion
- Røntgenmarkering og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Fås i en række størrelser: CH 7, 10, 12, 15 og 19 med eller uden trokar
- Redax SPIRAL Drain er 100 cm lange
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Trokar	Længde cm	Antal/æske
6024607	2.3	7	Nej	100	10
6024610	3.3	10	Nej	100	10
6024612	4.0	12	Nej	100	10
6024615	5.0	15	Nej	100	10
6024619	6.3	19	Nej	100	10
6024601	2.3	7	Ja	100	10
6024602	3.3	10	Ja	100	10
6024605	4.0	12	Ja	100	10
6024603	5.0	15	Ja	100	10
6024604	6.3	19	Ja	100	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Trokar: rustfrit stål Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Støbt emballage: OPA, PP, PE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Markedsintroduktion	2001
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.





Silikone T-dræn

Redax silikone T-dræn er udviklet specifikt til drænage i galdegangen. Drænet består af et vævsvenligt blødt materiale, der giver lav friktion og dermed højere gennemstrømning og minimal risiko for koagulation.

PRODUKTFAKTA

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, som letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i hullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- Røntgenmarkering og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Den vandrette del (180 mm) er blødere og fikseret på den faste lodrette del (500 mm) med en speciel teknik
- Størrelser fra CH 9 til 24, hvor yerdiameteren varierer fra 3 til 8 mm
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Længde cm	Antal/ æske
6024409	3.0	9	50	10
6024412	4.0	12	50	10
6024415	5.0	15	50	10
6024418	6.0	18	50	10
6024421	7.0	21	50	10
6024424	8.0	24	50	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Støbt emballage: OPA, PP, PE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Markedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Fladt Kanaldræn Silikone

Silikonedrænet, som er et fladt kanaldræn, har en fast kerne og fire kanaler, som løber langs hele drænet. Slidserne i drænet tillader drænage langs hele drænet med deraf følgende minimering af indvækst og ubehag for patienten, når såret er helet, og drænet skal fjernes.

PRODUKTFAKTA

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, hvilket letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i hullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen.
- Røntgenmarkering og tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Fås i to størrelser: 3 x 7 mm og 4 x 10 mm
- Fås med eller uden trokar
- Redax flade kanaldræn er 100 cm lange
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Trokar	Længde cm	Antal/ æske
6024622	4 x 10	Nej	100	10
6024623	3 x 7	Nej	100	10
6024624	4 x 10	Ja	100	10
6024625	3 x 7	Ja	100	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Trokar: rustfrit stål Biokompatibilitet og hæmokompabilitet i henhold til den internationale standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Markedsintroduktion	2001
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Kapillædræn Penrose

Silikone

Penrose kapillædræn kan anvendes i forbindelse med kontamineret væv eller væskefyldte kaviteter og abscesser.

PRODUKTFAKTA

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, hvilket letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- Røntgenmarkering
- Bølgeformet indervæg, fungerer ved tyngdekraften, uden sug
- Størrelser fra 6 til 16 mm samt 40 mm
- Penrose er 30 eller 50 cm lang
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Længde cm	Antal/ æske
6022006	6	50	20
6022008	8	50	20
6022010	10	50	20
6022012	12	50	20
6022014	14	50	20
6022016	16	50	20
6022040	40	50	20
6022206	6	30	20
6022208	8	30	20
6022210	10	30	20
6022212	12	30	20
6022214	14	30	20
6022216	16	30	20
6022240	40	30	20

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Biokompatibilitet og hæmokompabilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sterilt dobbelt pakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Markedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Redon - Dræn

Fremstillet i Phtalatfrit PVC af medicinsk kvalitet

PRODUKTFAKTA

- Kinker ikke og har gode dræneringsegenskaber
- Drænet har god gennemsigtighed, som letter inspektion
- Drænhullerne er let konkave og forskudt i forhold til hinanden
- Drænhullerne er placeret i 14 cm fra den afrundede top
- Røntgenmarkering samt tydelig dybdemarkering for at lette korrekt placering
- Fås i størrelser mellem CH 6 og CH 18 med eller uden trokar
- Redon-dræn er 50 cm lange
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Trokar	Længde cm	Antal/ æske
6024020	2,0	6	Nej	50	100
6024022	2,2	8	Nej	50	100
6024032	3,2	10	Nej	50	100
6024042	4,2	12	Nej	50	100
6024047	4,7	14	Nej	50	100
6024057	5,7	16	Nej	50	50
6024060	6,0	18	Nej	50	50
6024006	2,0	6	Ja	50	25
6024007	2,2	8	Ja	50	25
6024010	3,2	10	Ja	50	25
6024013	4,2	12	Ja	50	25
6024014	4,7	14	Ja	50	25
6024017	5,7	16	Ja	50	25
6024018	6,0	18	Ja	50	25

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Medicinsk ren PVC, DINP-blødgører (latex- og ftalatfri) Trokar: Rustfrit stål Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sæt sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Marksedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Lukket Drænagesæt

Med opsamlingspose og passivt silikonedræn, Robinson

PRODUKTFAKTA

- Silikone/elastomer i medicinsk kvalitet. Vævsvenlig thrombo-resistent. Drænet er blødt og følger let kroppens kurver uden at kinke. Det gør det til et sikkert og patientvenligt dræn
- Drænet har god gennemsigtighed, hvilket letter inspektion
- Silikone er vævsvenlig og giver minimal celleadhæsion inde i drænet og i hullerne. Drænet fastholder sin fleksibilitet uanset kropstemperaturen
- Røntgenmarkering
- Det passive silikonedræn af Robinson-typen er sikkert og effektivt og fungerer ved hjælp af tyngdekraften
- Drænagesættet består af et 100 cm lang silikonedræn sammenkoblet med en tømbar opsamlingspose
- Opsamlingsposen kan indeholde 600 ml og er udstyret med en tilbageløbsventil
- Drænet har 6 ovale huller forskudt for hinanden
- Drænet er 100 cm lang
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Udvendig diameter mm	Str. CH	Pose 600 ml Tømbar	Længde cm	Antal/ æske
6021409	3	9	Ja	100	10
6021412	4	12	Ja	100	10
6021415	5	15	Ja	100	10
6021418	6	18	Ja	100	10
6021420	7	20	Ja	100	10
6021424	8	24	Ja	100	10
6021428	9.3	28	Ja	100	10
6021430	10	30	Ja	100	10
6021433	11	32	Ja	100	10
6021436	12	36	Ja	100	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.p.A. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Dræn: Silikone (latex- og ftalatfri) Opsamlingspose: PVC med DEHP-blødgører Biokompatibilitet og hæmokompatibilitet i henhold til international standard UNI EN ISO 10993-1 og UNI EN ISO 10993-4
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Sæt sterilt dobbeltpakket i peel-open papir/plast PET/PE (udvendigt) (Indvendigt) plastpose: LDPE Andet: PVC-frit og genvindingsbart
Direktiver	Redax-produkter overholder det europæiske direktiv om medicinsk udstyr: CE europæisk direktiv 93/42 EØF og 2007/47/EF udført af TÜV Product Service Tyskland
Klassifikation	Class IIa - MDD 93/42 CEE
Markedsintroduktion	1999
Standard	UNI EN 1617 og UNI EN 1618
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Silikone Bold lukket

Et lukket drænesystem til opsamling af mindre volumen

PRODUKTFAKTA

- Bolden er lukket og består af silikone og har tilbageløbsventil mod tilslutning til patienten
- Bolden er let transparent som gør det muligt at inspicere indholdet. Den er udstyret med en gradueret måleskala
- På den koniske del i toppen af Bolden tilkobles drænet. Ved små dræn skal den medfølgende konnektor anvendes
- Bolden er forsynet med tøjklæmmekrog, så opsamlingssystemet kan fastgøres til patients tøj
- Bolden er ergonomisk udformet og nem at aktivere til vakuum
 - Vakuum ved 100 ml Bold er mellem ± 22 - ± 29 mmHg
 - Vakuum ved 200 ml Bold er mellem ± 25 - ± 37 mmHg
 - Vakuum ved 400 ml Bold er mellem ± 29 - ± 44 mmHg
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen	Antal/ æske
6010400	Bold 100 ml	10
6010410	Bold 200 ml	10
6010420	Bold 400 ml	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bold: Silikone (latex- og ftalatfri)
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH Germany
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE: A0601010102 RDM: 1127715/R Class: I - FDA CFR 878.4680
Markedsintroduktion	2000
Standard	Dræn og tilslutninger overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Silikone Bold 100 ml med pose

PRODUKTFAKTA

- Bolden tilsluttes opsamlingspose 200 ml – denne er ikke tømbar. Bolden består af silikone og har tilbageløbsventil mod tilslutning til patienten
- Bolden er let transparent som gør det muligt at inspicere indholdet. Den er udstyret med en gradueret måleskala
- På den koniske del i toppen af Bolden tilkobles drænet. Ved små dræn skal den medfølgende konnektor anvendes
- Bolden er forsynet med tøjklæmmekrog, så opsamlingssystemet kan fastgøres til patients tøj
 - Bolden er ergonomisk udformet og nem at aktivere til vakuum
 - Vakuum ved 100 ml Bold er mellem $\div 22$ - $\div 29$ mmHg
- Posen skrues nemt på bolden og kan aflæses fra 5 ml
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen Bold	Volumen Pose	Antal/ æske
6022610	100 ml	200 ml	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bold: Silikone (latex- og ftalatfri) Pose: PVC Alle de anvendte materialer er godkendt til medicinsk brug og indeholder ingen stoffer eller blæk, der kan være giftige for mennesker. REDAX er latexfri/DEHP-fri.
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film. Emballagen er PVC-fri
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH, Tyskland
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE CND
Markedsintroduktion	2000
Standard	Overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Silikone Bold 200 ml med tømbar pose

PRODUKTFAKTA

- Bolden tilsluttes opsamlingspose 600 ml, som er tømbar. Bolden består af silikone og har tilbageløbsventil mod tilslutning til patienten
- Bolden er let transparent som gør det muligt at inspicere indholdet. Den er udstyret med en gradueret måleskala
- På den koniske del i toppen af bolden tilkobles drænet. Ved små dræn skal den medfølgende konnektor anvendes
- Bolden er forsynet med tøjklæmmekrog, så opsamlingssystemet kan fastgøres til patients tøj
 - Bolden er ergonomisk udformet og nem at aktivere til vakuum
 - Vakuum ved 200 ml bold er mellem $\div 25$ - $\div 37$ mmHg
- Den tømbara pose skrues nemt på bolden og kan aflæses fra 10 ml
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen Bold	Volumen Pose	Antal/ æske
6022645	200 ml	600 ml	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bold: Silikone (latex- og ftalatfri) Pose: PVC Alle de anvendte materialer er godkendt til medicinsk brug og indeholder ingen stoffer eller blæk, der kan være giftige for mennesker. REDAX er latexfrie/DEHP-fri.
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film. Emballagen er PVC-fri
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH Tyskland
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE CND
Markedsintroduktion	2000
Standard	Overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Silikone Bold 400 ml med forlængerslange og tømbar pose

PRODUKTFAKTA

- Bolden tilsluttes opsamlingspose 600 ml, som er tømbar. Bolden består af silikone og har tilbageløbsventil mod tilslutning til patienten
- Bolden er let transparent som gør det muligt at inspicere indholdet. Den er udstyret med en gradueret måleskala
- Bolden har påmonteret forlængerslange på 125 cm, som passer til PVC dræn
- Bolden er forsynet med tøjklæmmekrog, så opsamlingssystemet kan fastgøres til patients tøj
 - Bolden er ergonomisk udformet og nem at aktivere til vakuum
 - Vakuum ved 400 ml bold er mellem $\div 29$ - $\div 44$ mmHg
- Den tømbar pose skrues nemt på bolden og kan aflæses fra 10 ml
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen Bold	Volumen Pose	Antal/ æske
6010600	400 ml	600 ml	10

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bold: Silikone (latex- og ftalatfri) Pose: PVC Alle de anvendte materialer er godkendt til medicinsk brug og indeholder ingen stoffer eller blæk, der kan være giftige for mennesker. REDAX er latexfrie/DEHP-fri.
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film. Emballagen er PVC-fri
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH Tyskland
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE CND
Marksintroduktion	2000
Standard	Overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Bælg, lukket

Et lukket drænegesystem fremstillet i PE

PRODUKTFAKTA

- Drænegesystemet har en opsamlingskapacitet på op til 50 ml.
- Bælgen er udstyret med en multi-gauge konnektor, der kan tilpasses til PVC Redon dræn i størrelserne CH 6, 8 og 10
- Vakuum ved 50 ml Bælg er ± 50 mmHg
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen	Antal/ æske
6020000	Bælg 50 ml	25

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bælg: PE Medical device DEHP fri og Latex fri
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH Tyskland
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 – MD Directive 93/42 CEE
Markedsintroduktion	2000
Standard	Dræn og tilslutninger overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Bælg lukket

Et lukket drænairesystem fremstillet i PE

PRODUKTFAKTA

- Drænairesystemet har en opsamlingskapacitet på 200 ml, 500 ml og 700 ml
- Drænairesystemet er udstyret med en fjeder placeret inde i opsamlingsbælgen. Fjederen tillader et konstant sugeniveau
- Bælgen har forlængerslange, som gør det muligt at anvende PVC dræn mellem CH 6 og CH 18
- Vakuum ved 200 ml Bælg op til $\div 100$ mmHg
- Vakuum ved 500 ml Bælg op til $\div 115$ mmHg
- Vakuum ved 700 ml Bælg op til $\div 130$ mmHg

- 200 ml og 500 ml findes ligeledes uden fjeder
- Vakuum ved 200 ml Bælg op til $\div 15$ mmHg
- Vakuum ved 500 ml Bælg op til $\div 35$ mmHg
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen	Fjeder	Antal/ æske
6021200	Bælg 200 ml	Med	20
6020200	Bælg 500 ml	Med	20
6020700	Bælg 700 ml	Med	20
6020120	Bælg 200 ml	Uden	20
6020500	Bælg 500 ml	Uden	20

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bælg: PE Medical device DEHP fri og Latex fri
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH (Tyskland).)
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 – Directive 93/42/CEE
Markedsintroduktion	2000
Standard	International Standard UNI EN ISO 10993-1 and UNI EN ISO 10993-4.
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.



Bælg med pose

Drænagesystem i PE med tilhørende pose

PRODUKTFAKTA

- Bælgen har en opsamlingskapacitet på 200 ml og 500 ml
- Bælgen er udstyret med en fjeder, som tillader et konstant sugeniveau
- Bælgen har forlængerslange 120 cm lang, som gør det muligt at anvende PVC dræn fra CH 6 til CH 18
- 200 ml Bælg vakuum $\div$ 100 mmHg
- 500 ml Bælg vakuum $\div$ 115 mmHg
- Bælgen kan anvendes med pose
- Bælg og pose er begge udstyret med en tilbageløbsventil
- På Bælgen er påmonteret en strip til fiksering
- Sterilt engangsprodukt

SORTIMENT

Varenr.	Volumen	Pose 600 ml	Antal/ æske
6021230	Bælg 200 ml	Tømbar	20
6021290	Bælg 200 ml	Lukket	20
6020660	Bælg 500 ml	Tømbar	20

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Bælg: PE Medical device DEHP fri og Latex fri
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH (Tyskland).)
Klassifikation	Class: IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE
Marksindsintroduktion	2000
Standard	International Standard UNI EN ISO 10993-1 and UNI EN ISO 10993-4.
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.

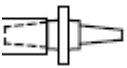
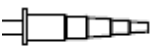
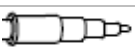
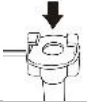


Opsamlingsposer til sådrænagesystem

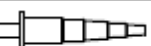
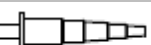
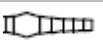
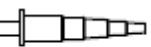
PRODUKTFAKTA

- Opsamlingspose i PVC lukket eller tømbar
- Opsamlingskapaciteter: 200, 600, 2000 ml
- Gradueret aflæsningsskala
- Indeholder tilbageløbsventil
- Opsamlingsposen fås med eller uden forlængerslange
- Sterilt engangsprodukt

STANDARD SORTIMENT

Varenr.	Beskrivelse / Passer til	CH	Konnektor-profil	Forlænger slange	Volumen	Tømbar	Antal/ æske
6012017	Silikonedræn	9-10		50 cm	600 ml	Ja	25
6012012	Silikonedræn	12-19		50 cm	600 ml	Ja	25
6012002	Silikonedræn	10-36		90 cm	600 ml	Ja	25
6012009	Silikonebold	-		0	600 ml	Nej	25
6012011	Silikonebold	-		0	600 ml	Ja	25
6012015	Silikonebold	-		0	200 ml	Nej	50
6012020	PVC dræn	6-18		50 cm	600 ml	Ja	25
6012004	Bælg	-		0	600 ml	Ja	25
6012014	Bælg	-		0	600 ml	Nej	25

ØVRIGT SORTIMENT

Varenr.	Beskrivelse / Passer til	CH	Konnektor-profil	Forlænger slange	Volumen	Tømbar	Antal/ æske
6012000	Silikonedræn	10-36		90 cm	2000 ml	Ja	25
6012003	Silikonedræn	20-36		90 cm	600 ml	Ja	25
6012016	Silikonedræn	12-19		50 cm	200 ml	Nej	25
6012021	Silikonedræn	10-36		70 cm	200 ml	Nej	25
6012006	Silikonedræn	15-24		90 cm	2000 ml	Ja	25
6012007	Silikonedræn	24-36		90 cm	2000 ml	Ja	50
6012008	Silikonedræn	12-36		90 cm	2000 m	Ja	25
6012010	Silikonedræn 2 vejs	24-36		50 cm	600 ml	Ja	25
6012018	Silikonedræn	12-19		90 cm	2000	Ja	25

TEKNISK DATA

Producent	REDAX S.r.L. - Via Galileo Galilei, 46025 Poggio Rusco, Mantova, Italien
Materialer	Pose: PVC med eller uden DEHP Slange: PVC (DEHP-fri) eller gummi
Sterilisation	Ethylenoxid
Holdbarhed	5 år
Emballering	Steril enkeltpakning: inderpose i plastfilm og yderpose i medicinsk papir og PET/PP-film. Emballagen er PVC-fri
Direktiver	Redax Kvalitet System overholder ISO 9001 og ISO 13485 standarder. Redax-enheder er certificeret med CE-mærke 0123, udstedt af TÜV SÜD Product Service GmbH (Tyskland.)
Klassifikation	Class IIa/Rule 2 - Directive 93/42 CEE CND
Markedsintroduktion	2000
Standard	Overholder UNI EN ISO 20697:2018 og UNI EN 1618:1997
Opbevaring	Temperatur: 0° ÷ 60 °C, fugtighed 10%-90%.