


# Horizon Clips

- titaniumclips til åben og endoskopisk kirurgi.

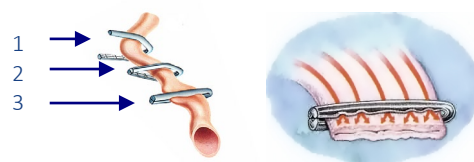


## Design

Horizon clips har en unik hesteskoform, som sikrer en "tip to tip" lukning. Clipsen omslutter hele karret, inden den lukkes sammen (se billede ovenfor).

Den fysiske udformning og dimensionering af clipsens inderside (se billede) sikrer, at karvægens yderste lag (tunica externa) forbliver velperfunderet, hvilket forhindrer vævsnekrose og clipsmigration. Karlumen vil altid være fuldstændigt ligeret.

I clipsens ender er der konstrueret små riller, som gør, at vævet ikke kan slippe ud af lukningen, da disse riller virker som modhager.

Hjerteformet lukning

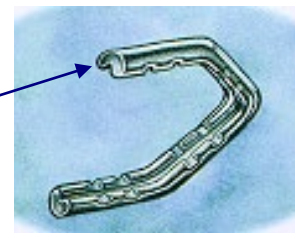

Kærv

Enderne er ikke spidse og kantede som på traditionelle clips, men designet som runde lukninger. Clipsen vil ikke irritere det omkringliggende væv og dermed forårsage lokale traumer.

På grund af Horizon clips design med en kærv, der passer i applierens kanal i kæben, minimeres risikoen for, at clipsene tabes efter ladning – en ladning, som er meget nem og sikker.

## Magasiner

Clipsene sidder i magasiner, der er designet, så clipsene ikke tabes. De er låst fast på en sådan måde, at clipsene kun kan komme ud med en applier. En sikker måde, som holder clipsene sterile. Magasinet leveres bl.a. med dobbelklæbende tape i bunden. Derved kan kirurgen klistre det fast på et sted, hvor det vil være let tilgængeligt. Derved kræves ikke ekstra personale til denne del af den operationelle procedure.

Varenummer	Farve	Størrelse	Antal clips / magasin	Antal magasiner	Clips i alt	Bemærkninger
60HZ5200		Micro	6	30	180	
60HZ1200	Yellow	Small	6	30	180	
60HZ1204	Yellow	Small	24	25	600	
60HZ1201	Red	Small	6	30	180	Bred
60HZ1205	Red	Small	24	25	600	Bred
60HZ2200	Blue	Medium	6	30	180	
60HZ2204	Blue	Medium	24	25	600	
60HZ3200	Green	Medium/Large	6	20	120	
60HZ3204	Green	Medium/Large	24	15	360	
60HZ4200	Orange	Large	6	20	120	
60HZ4204	Orange	Large	24	15	360	

Teleflex Medicals appliere open/endskopsk er kun designet for Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex medical kan ikke garantere sikkerheden, hvis andre clips fabrikater anvendes i Teleflex appliere.


**Teleflex®**