

Bellovac[®]
Exudrain[®]
Abdovac[®]
Sårdræn



**Et produktprogram
af sårdræn, der
opfylder forskellige
behov**



Forskellige kirurgiske indgreb kræver forskellige dræn.

Meget praktisk dræn



Medioplast dræn er sikre og nemme at bruge samt enkle at forstå.

Nemt at anvende

Medioplast dræn med lavt vakuum er meget nemme at anvende. De behøver intet dyrt udstyr eller specialuddannet personale. Kontraventiler i både ind- og udløb på bælge og blærer minimerer håndteringsproblemer og sparer efterfølgende plejetid. De leveres som komplette og sterile sæt.

Et program, der opfylder forskellige behov

Medioplast produktprogrammet af dræn tilpasses behovene i forskellige kirurgiske indgreb og optimerer potentialet for problemfri og hurtig opheling. Hvert sæt har sine egne egenskaber, således at du altid inden for vores produktprogram kan finde et dræn, der opfylder dine krav til volumenkapacitet og sugkraft.


Meget venlig dræning

Lavtryksvalget

Der er ikke længere grund til at ikke vælge Mediplast dræn med lavt vakuum. Der er faktisk mange fordele ved at bruge dræn med lavt vakuum og vores produkter i særdeleshed.

- Effektiv sugning¹
- Reduceret blodtab²
- Bedre drænageopsamling³
- Tidligere fjernelse af drænet⁴
- Mindre vævsaspiration⁵

Hvis der anvendes et for højt vakuum, kan væv og små kar blive aspireret ind i drænet og forårsage stort blodtab så vel som større ubehag for patienten. Med Mediplast dræn med lavt vakuum får du effektiv drænage, men færre bivirkninger.⁶

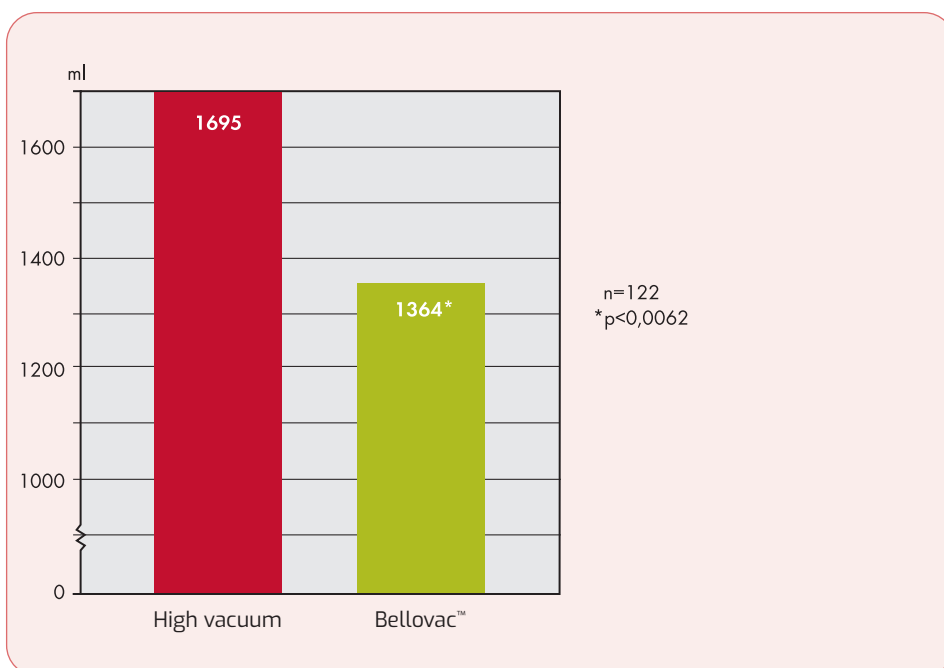


Reduceret blodtab med Bellovac²

Fordelagtigt for både patienter og personale

Mediplast dræn er helt lukkede systemer, der minimerer risikoen for postoperativ infektion og lange hospitalsophold.

- Alle drænede væsker forbliver sikkert indkapslet i systemet
- Kontraventiler i bælge/blærer og opsamlingsposer
- Sikre forbindelser i hele systemet
- Minimal risiko for kontaminering af patient eller personale⁷
- Bedre patientpleje - bedre sygepleje⁷

Hvad betyder det for patienten: For det første mindre smerte, for det andet hurtigere sårheling og for det tredje kortere tid på hospitalet.

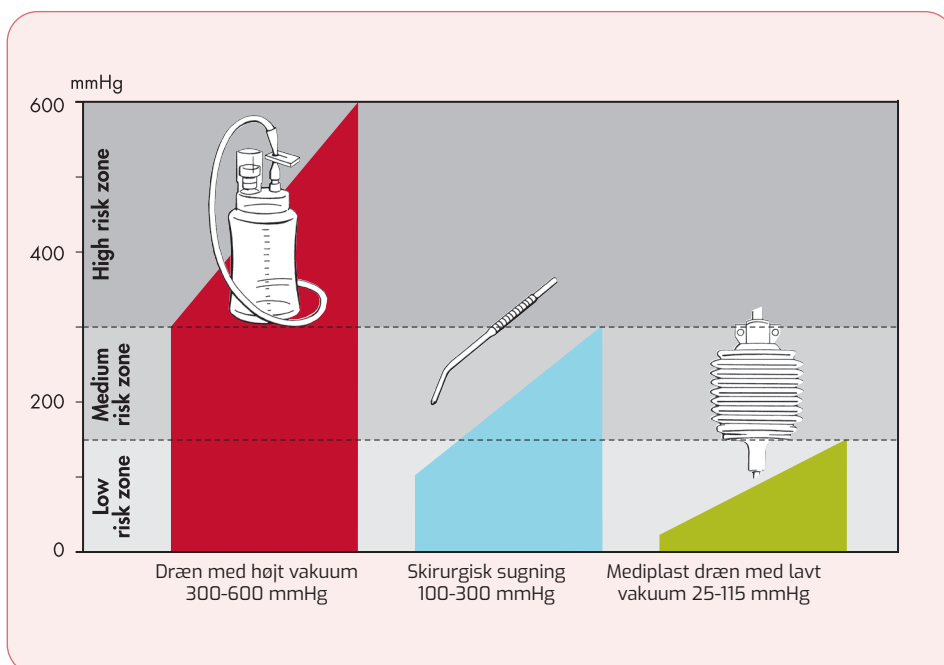

Højt vakuum, som i allerede udtømte flasker, kan nemt forårsage vævsgreb. Sammenlign dette med kirurgisk sugning, hvor der er gjort alt for at undgå vævsaspiration


Bellovac®



Exudrain®



Exudrain® Mini

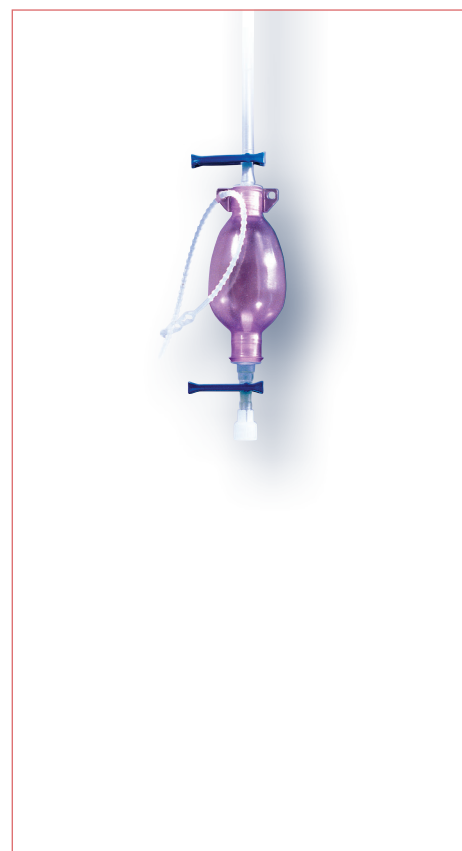

Drænage med stor volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 115 mmHg/15 kPa
Volumen, bælg: 220 ml
Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Ortopædi Gynækologi
Almen kirurgi

Drænage med middel volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
Volumen, blære: 110 ml
Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Almen kirurgi
Brystkirurgi, f.eks. mastektomier
Sårdræn in- situ

Drænage med lille volumen

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
Volumen, blære: 110 ml

Kirurgiske procedurer:

Håndkirurgi
Biopsier Sammedagskirurgi

Vare nr.	Beskrivelse
68390 2x15	Bellovac® sæt FG 10
68391 2x15	Bellovac® sæt FG 14
68392 2x15	Bellovac® sæt FG 18
68393 2x15	Bellovac® sæt FG 10 with trocar
68394 2x15	Bellovac® sæt FG 14 with trocar
68395 2x15	Bellovac® sæt FG 18 with trocar

Vare nr.	Beskrivelse
68406 3x10	Exudrain® sæt FG 10
68407 3x10	Exudrain® sæt FG 14
68408 3x10	Exudrain® sæt FG 18
68409 3x10	Exudrain® sæt FG 10 med trokar
68410 3x10	Exudrain® sæt FG 14 med trokar
68411 3x10	Exudrain® sæt FG 18 med trokar
68428 3x10	Exudrain® Passive FG 10
68425 3x10	Exudrain® Passive FG 14

Vare nr.	Beskrivelse
68412 3x10	Exudrain® Mini sæt FG 8
68419 3x10	Exudrain® Mini sæt FG 8 with trocar

Abdovac®



Nænsom sugedrænage

Gennemsnitligt, indledende, negativt tryk ved aktivering: 25 mmHg/3,3 kPa
Volumen, blære: 110 ml Volumen, pose: 700 ml

Kirurgiske procedurer:

Abdominalkirurgi

Vare nr.	Beskrivelse
68413	3x10 Abdovac® sæt FG 10
68414	3x10 Abdovac® sæt FG 14
68415	3x10 Abdovac® sæt FG 18
68416	3x10 Abdovac® sæt FG 10 med trokar
68417	3x10 Abdovac® sæt FG 14 med trokar
68418	3x10 Abdovac® sæt FG 18 med trokar

Tilbehør

Ekstraposer

Vare nr.	Beskrivelse
68337	12x50 Ekstrapose
68480	4x25 Steril ekstrapose

Y-stykker

Vare nr.	Beskrivelse
68376	4x25 Y-stykke med FG 10 kateter
68377	4x25 Y-stykke med FG 14 kateter
68378	4x25 Y-stykke med FG 18 kateter
68385	4x25 Y-stykke med FG 10 kateter og trokar
68386	4x25 Y-stykke med FG 14 kateter og trokar
68387	4x25 Y-stykke med FG 18 kateter og trokar

Silikonedræn

Vare nr.	Beskrivelse
68367	4x15 Rundt dræn FG 10 med trokar
68368	4x15 Rundt dræn FG 14 med trokar
68369	4x15 Rundt dræn FG 18 med trokar
68361	4x15 Fladt dræn FG 14, 7 mm med trokar
68362	4x15 Fladt dræn FG 14, 10 mm med trokar

Fluted Drains

Vare nr.	Beskrivelse
68460	4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 10 med trokar
68461	4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 14 med trokar
68462	4x15 Rundt, kanneleret dræn FG 18 med trokar
68463	4x15 Fladt, kanneleret dræn FG 14, 7 mm med trokar
68464	4x15 Fladt, kanneleret dræn FG 14, 10 mm med trokar

Alle silikonedræn og kannelerede dræn leveres med forskruninger

Referencer

1. Loder P, Smith G et al. Aust. NZJ Surg 1987;57:531-5.
2. Morgan-Jones RL, Perko MMJ, Cross M. The Knee 2000;7:149-50.
3. Giordano G, Abib A. Presented as a poster at Chirurgie de la Hanche – Hip Surgery Developments & Future prospects, Sep 1999.
4. Van Heurn LWE, Brink PRG. Br J Surg 1995;82:931-2.
5. Gerngoss H, Marquardt K. Chirurg 1992;63:447-53.
6. Seely MF. Br J Surg 1979;66:657-9.
7. Zerbe M, Mc Ardie A, Goldrick B. Am J Infect Control 1996;24(5):346-52.

Bellovac[®]

Exudrain[®]

Abdovac[®]

Sårdræn

Medioplast produktprogrammet af dræn tilpasses behovene i forskellige kirurgiske indgreb og optimerer potentialet for problemfri og hurtig opheling. Hvert sæt har sine egne egenskaber, således at du altid inden for vores produktprogram kan finde et dræn, der opfylder dine krav til volumenkapacitet og sugekraft.