



**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™

## Semplicemente il migliore

*Bellovac® ABT si è sviluppato fino ad essere una delle scelte più condivise nel campo della reinfusione di sangue autologo. Questo grazie all'elevata qualità di un sistema chiuso e sicuro unita alla semplicità e maneggevolezza di un set completo di tutto il necessario per la raccolta e la reinfusione.*

### **La sicurezza prima di tutto**

La reinfusione di sangue autologo è indicata per la perdita ematica post-operatoria soprattutto in seguito a chirurgia ortopedica. Bellovac ABT è un sistema chiuso, sicuro, dotato di tre valvole di non ritorno. Questo garantisce la massima sicurezza per il paziente così come per lo staff.

### **Lo apprezzerai**

Bellovac ABT fa della semplicità la sua forza. Non necessita di apparecchiature costose o di personale appositamente addestrato. Grazie alla sua doppia funzione non occorrono ulteriori set di drenaggio. Una volta provato, lo apprezzerai.

### **Tutto in uno**

Il set Bellovac ABT è completo e pronto all'uso. Contiene catetere con trocar, soffietto d'aspirazione, sacca di autotrasfusione e deflussore. Tutti i componenti (escluso il trocar) sono monouso. E' inoltre disponibile una completa gamma di accessori.

# Bellovac ABT


**Clamp di ingresso e di uscita**  
Clamp di sicurezza per una semplice gestione manuale.

**Tre valvole di non ritorno**  
Per garantire la massima sicurezza per il paziente così come per lo staff, Bellovac ABT è dotato di tre valvole di non ritorno, una all'ingresso del soffietto, una alla sua uscita e la terza nella sacca di autotrasfusione.

**Soffietto d'aspirazione**  
Il soffietto in aspirazione si può riempire fino ad un massimo di 220 mL. La depressione iniziale prodotta corrisponde a 90 mmHg/12 Kpa.

**Clamp di uscita**  
Clamp di sicurezza per una semplice gestione manuale

**Due filtro**  
Nella sacca di autotrasfusione si trova un macro filtro da 200 µm, altri due filtri da 40 µm sono presenti nel deflussore.

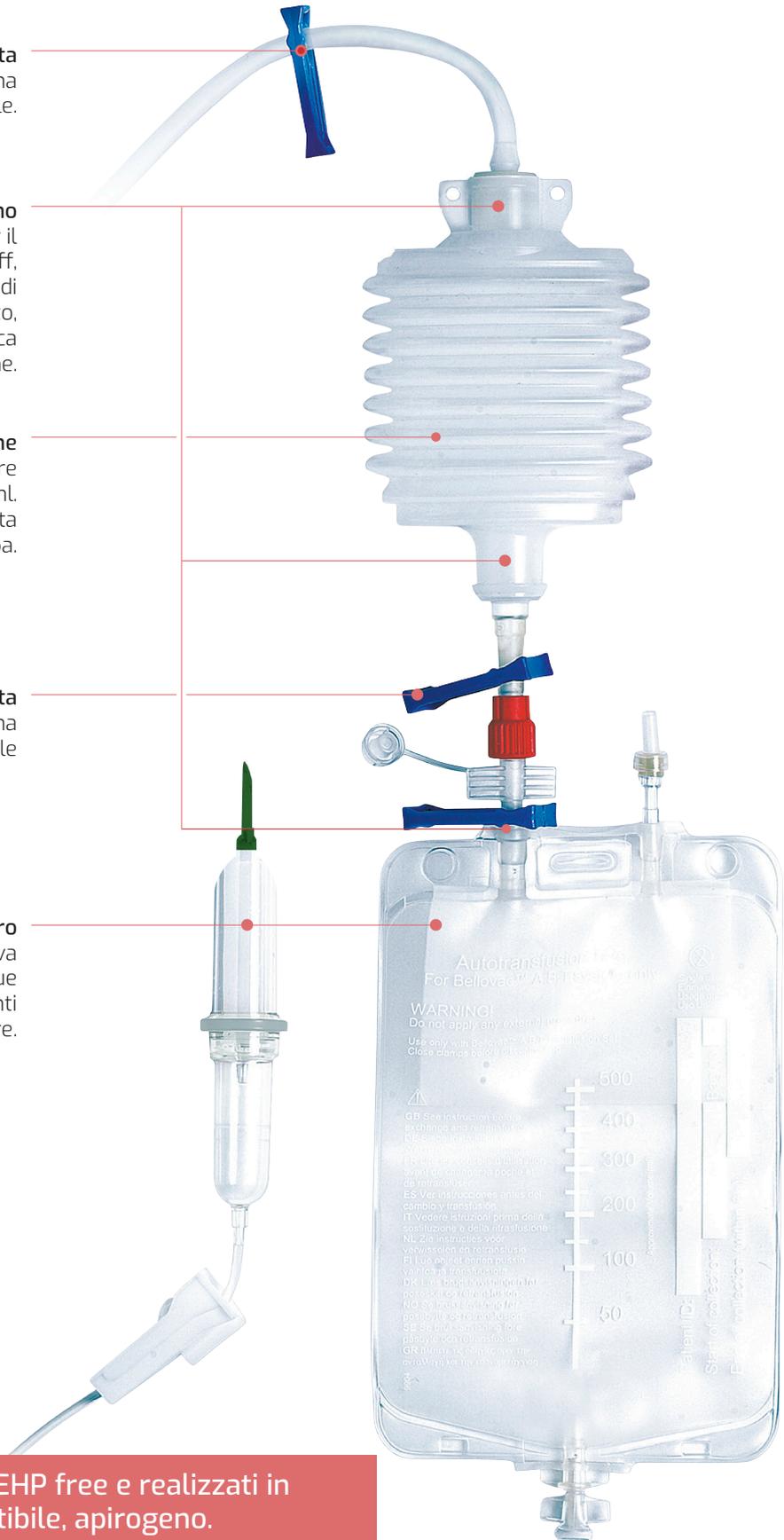

Tutti i componenti sono DEHP free e realizzati in materiale biocompatibile, apirogeno.

# La gamma di Bellovac ABT



## Completo e pronto all'uso.

Il set Bellovac® ABT completo per la raccolta e la reinfusione di una unità di sangue autologo è in confezione sterile pronta all'uso.

Codice	
68306	2x10
68307	2x10
68308	2x10

## Système Bellovac® ABT set

Bellovac® ABT set FG 10 con trocar  
Bellovac® ABT set FG 14 con trocar  
Bellovac® ABT set FG 18 con trocar



## Sacca di autotrasfusione, per la raccolta e la reinfusione di una ulteriore unità.

Se il paziente dovesse perdere più di una unità di sangue (500 ml), si può utilizzare questo set che comprende una sacca di autotrasfusione e un deflussore.

Codice	
68309	4x5

## Bellovac® ABT Accessori

Sacca di autotrasfusione (500 ml) e deflussore




## Linea di estensione

Garantisce che il sangue del paziente venga reinfuso in continuo, procedura che può essere richiesta anche per motivi religiosi.

Codice	
68380	4x5

Linea di estensione

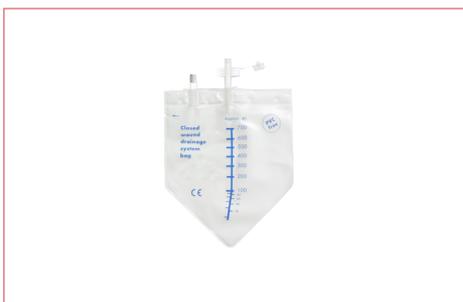

## Sacca di ricambio per drenaggio.

Dopo sei ore dall'intervento termina la raccolta di sangue e la sacca di ricambio consente di continuare il drenaggio.

Codice	
68337	12x50

Sacca di ricambio per drenaggio PVC-free

## Bibliografia

Slappendel R et al. Acta Orthop Scand. 2003 Oct;74(5):569-75.  
Weber EWG et al. Medical Thesis 2003: Optimized blood management for elective orthopaedic surgery. ISBN 90 5278 394 2.  
Andersson I et al. Can J Anesth. 2001 Mar;48(3):251-5.  
Moonen A.F. et al. Transfusion 2007 Mar;47(3):379-84.

## Altri accessori

Connettore a Y con catetere FG 10  
Connettore a Y con catetere FG 14  
Connettore a Y con catetere FG 18  
Connettore a Y con catetere e trocar FG 10  
Connettore a Y con catetere e trocar FG 14  
Connettore a Y con catetere e trocar FG 18

Codice	
68376	4x25
68377	4x25
68378	4x25
68385	4x25
68386	4x25
68387	4x25

# Fidati del tuo sangue

I rischi della trasfusione di sangue omologo sono noti. Molto spesso, a causa della carenza di donatori, il sangue disponibile viene riservato per situazioni di emergenza.

La trasfusione di sangue autologo si può praticare attraverso la predonazione, l'emodiluizione e l'autotrasfusione intra e postoperatoria.

Bellovac ABT è stato studiato per la trasfusione autologa del sangue recuperato dal paziente dopo un intervento chirurgico.

Medioplast rappresenta il desiderio di offrire, insieme ai nostri prodotti, servizio ed assistenza. Non forniamo infatti solo prodotti adatti ad un ampio numero di procedure chirurgiche, ma anche assistenza con una moderna organizzazione e training di formazione tecnica. Contattateci per ogni esigenza relativa alla trasfusione di sangue autologo e saremo lieti di aiutarvi.

**Bellovac® ABT**  
YOUR OWN BLOOD™