

Gennemsigtigt materiale

UDI-kode

Latex-fri



## Clear Infusor

Trykinfusionsmanchet, genanvendelig

# / Clear Infusor

## 500 ml og 1000 ml version

- Hurtig administration af en infusionsopløsning til compensation af væske-/volumenmangel
- Trykovervågning og skylning af slangesystemet under invasiv, arteriel blodtryksmonitorering
- Transfusion

## 3000 ml version

- Administration af store væskemængder til brug i operationsfeltet

Wrap-around design tillader fiksering af de fleste væskeposekonfigurationer og jævn trykfordeling. Den glatte overflade af PU-materialet muliggør nem rengøring og desinfektion. Det gennemsigtige materiale giver et klart 360° syn på væskeposen og væskenniveauet. Med UDI-kode for produktsporbarhed.

### Egenskaber




#### Håndpumpe med tre-vejshane

- Ergonomisk håndpumpe til oppustning
- Tre-vejshane til hurtig deflation ved skift af væskeposen



#### Manometer

- Trykområde fra 0-300 mmHg i intervaller på 10mmHg
- Robust og holdbar til præcis trykovervågning

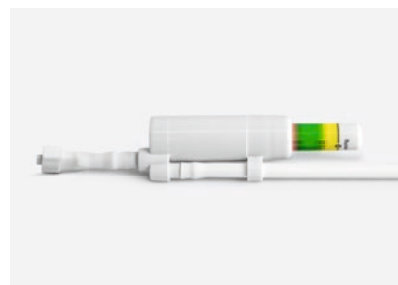

#### Farvekodet trykindikator

- 360° trykindikator letter trykovervågning
- Overtryksventil for at forhindre overoppustning



### Bestillingsinformation

#### Clear Infusor / Genanvendelig

| Version                                                 | 500 ml          | 1000 ml         | 3000 ml         | Box |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Med håndpumpe, tre-vejshane og farvekodet trykindikator | Art.nr. 5702050 | Art.nr. 5702100 | -               | 1   |
| Med håndpumpe, tre-vejshane og manometer                | Art.nr. 5708050 | Art.nr. 5708100 | Art.nr. 5708300 | 1   |
| Kun med luer lock konnektion                            | -               | -               | Art.nr. 5701300 | 1   |

### Yderligere information



Video

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.

The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

#### Forhandler:

**MEDI PLAST**

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

**VBM** Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



PRO061.2.0\_EN

VBM Clear Infusor DK 20231012 rev 1.pdf