


IMUKATETRIT

Suora, coudé (taivutettu)
sekä imunsäätelijällä


Medioplastilla on yksi Pohjoismaiden laajimmista ja korkealaatuisimmista imukatetrivalikoimista, josta löytyy tuotteita kaikkiin terveydenhuollon tarpeisiin. Käyttöalueesta riippuen valikoimassa on paitsi eri pituuksia ja kokoja, myös erilaisia malleja, materiaaleja ja pakkausvaihtoehtoja.

MUOTOILU


Taivutetussa katetrissa on viisto kärki, joka mahdollistaa katetrin **suunnan säätämisen hengitysteihin**. Eliittimessä oleva pieni merkki osoittaa kärjen taipumissuunnan.

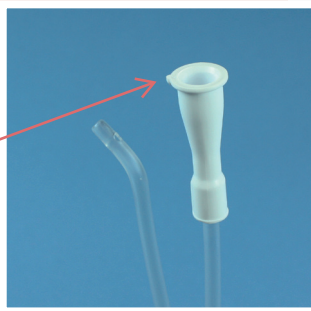



Kaikissa imukatetreissa on värikoodattu liitin imukatetrin standardin **EN ISO 8836:2019** mukaisesti oikean koon tunnistamista varten.

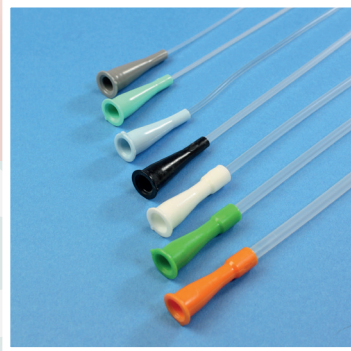


Taivutettua imukatetria on saatavana 53 cm:n pituisena, liitin (4 cm) mukaan lukien.

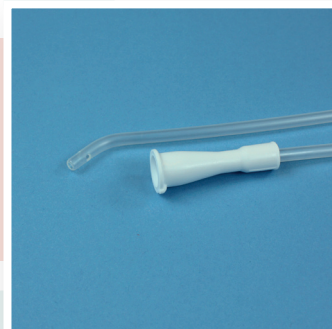


Kaikkien imukatetrin kärjessä on keskellä pehmeästi pyöristetty aukko, **ilman teräviä reunoja**. Noin yhden cm:n etäisyydellä kärjestä on myös kaksi vastakkaista imuaukkoa atraumaattisen imun varmistamiseksi.

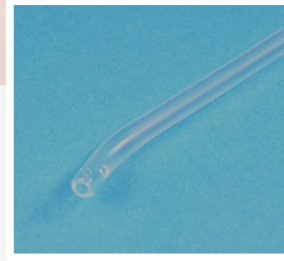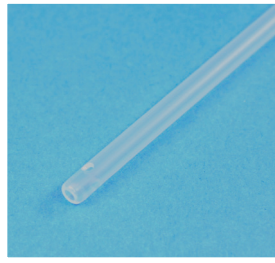


Joissain imukatetreissa on sisäänrakennettu **imunsäätelijä**, jolla imuvoimakkuutta voidaan hallita helposti sormenpäällä.

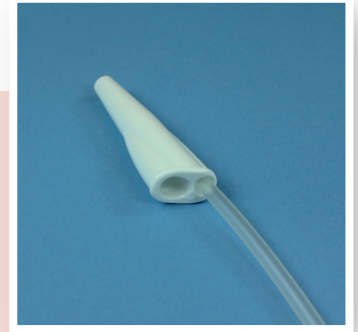

Suoria katetreja on saatavana **kolmena eri pituutena** 25 cm, 40 cm, 53 cm, liitin (4 cm) mukaan lukien.

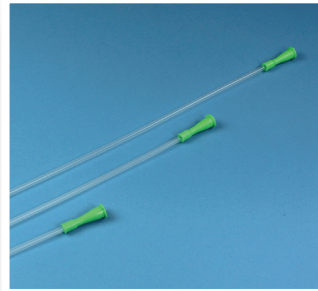

Imukatetreja imunsäätelijällä on saatavana **kahtena pituutena**, liitin (6 cm) mukaan lukien:
35 cm:n imukatetri senttimetriasteikolla ja 53 cm:n pituinen ilman asteikkoa.

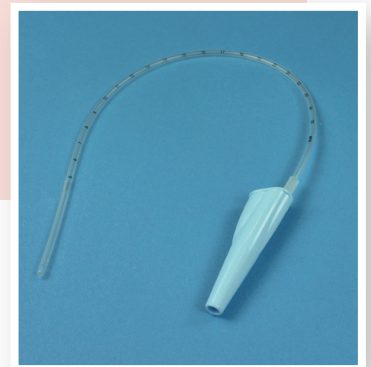

Kaikki imukatetrit ovat kertakäyttöisiä tuotteita ja ne toimitetaan steriileinä, säilyvyysaika on **5 vuotta**. Sterilointimenetelmä Etyleenioksidi.

MATERIAALI


Mediplastin imukatetreja on saatavana kahdessa eri materiaalissa, **PVC ilman ftalaatteja tai TPE** (PVC-vapaa materiaali). PVC:ssä käytetty ftalaattivapaa pehmitin on ATBC.

Imukatetrin materiaalia kierrätetään harvoin, useimmissa tapauksissa se hävitetään polttamalla. Nykyään PVC:n käyttöä pyritään vähentämään ympäristösyistä, sillä kloorattu muovi muodostaa suolahappoa (HCl) palamisen aikana. Syntyvän suolahapon käsittelemiseksi tarvitaan erikoislaitteita. Mikäli tarjolla on PVC-vapaita vaihtoehtoja, on niitä suositeltavaa käyttää.

Näiden kahden materiaalin välinen ero on käyttäjälle vähäinen. PVC-vapaa vaihtoehto on jonkin verran vakaampi, ja PVC-imukatetri on hieman pehmeämpi ja joustavampi. Ero on tuskin havaittavissa, mutta materiaalin valinta voi myös olla tärkeää käyttöalueesta riippuen.

PAKKAUS


Tuotepakkaus on ns. **repäisy pakkaus**, joka on valmistettu paperista ja muovista. Sen yläosassa on reikä ripustusta varten.

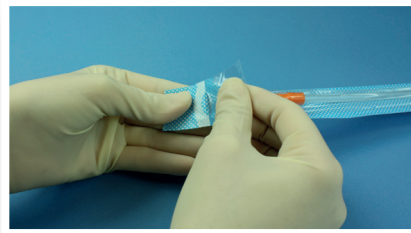


Pakkauksen sisäpuolen pinta on sinistä pistekuviota, jotta paperi voidaan helposti irrottaa muovista **repimättä sitä**. Näin varmistetaan turvallinen ja aseptinen avaaminen.

Tuotteet on pakattu kolmikerrospakkauksiin. Osastopakkausissa on 100 imukatetria, kuljetuslaatikossa 6 osastopakkausta eli yhteensä 600 imukatetria. Pienin tilausmäärä on 100 kpl.

Mediplastin valikoimassa on myös yksittäispakattuja imukatetreja helpottamaan **katetrien ottamista osastopakkausista**. Yksittäinen tuote on helpompi ottaa pakkauksesta, samalla muut katetrit pysyvät paikallaan ja suorana laatikossa.

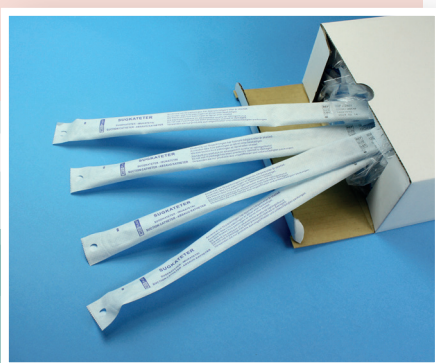

Standardissa osastopakkausissa imukatetrit ovat repäisyarkeissa, josta ne voidaan myös irrottaa yksi kerrallaan, mutta repäisyarkki helpottaa tuotteen jakelua mikäli ne halutaan ripustaa pidikkeeseen.

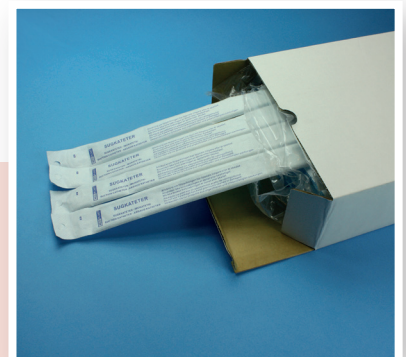

IMUKATETRI SUORA, 25 CM

PVC.tön yksittäispakattu	PVC.tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
	60880525	60130525-1	05	harmaa	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	vaal.sininen	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	musta	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	valkoinen	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	vihreä	100/600
	60881625		16	oranssi	100/600


IMUKATETRI SUORA, 40 CM

PVC.tön yksittäispakattu	PVC.tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
	60880540		05	harmaa	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	vaal.sininen	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	musta	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	valkoinen	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	vihreä	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	oranssi	100/600

IMUKATETRI SUORA, 53 CM


PVC.tön yksittäispakattu	PVC.tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
608806531	60880653	60130653-1	06	vaal.vihreä	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	vaal.sininen	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	musta	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	valkoinen	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	vihreä	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	oranssi	100/600
		60131853-1	18	punainen	100/600

Os.pakkaus = pienin toim.erä

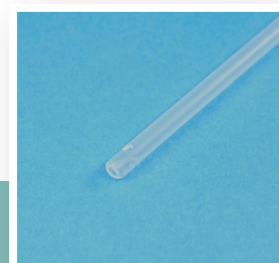

IMUKATETRI, COUDÉ, 53 CM

PVC:tön yksittäispakattu	PVC:tön yksittäispakattu repäisyarkki	PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
608708531	60870853	60170853-1	08	vaal.sininen	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	musta	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	valkoinen	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	vihreä	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	oranssi	100/600

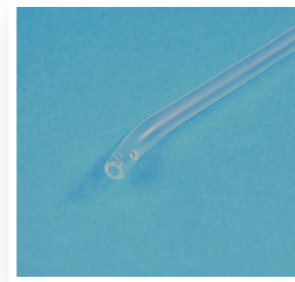

KATETRIT SAATAVILLA IMUNSÄÄTELIJÄLLÄ, MITTA-ASTEIKOLLA, 35 CM

PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
60151804-1	04	lila	100/600
60151805-1	05	harmaa	100/600
60151806-1	06	vaal.vihreä	100/600
60151808-1	08	vall.sininen	100/600
60151810-1	10	musta	100/600

KATETRIT SAATAVISSA IMUNSÄÄTELIJÄLLÄ, 53 CM

PVC ATBC yksittäispakattu repäisyarkki	Koko / Ch	Väri	Os./Kulj.pakkaus
60150653-1	06	vaal.vihreä	100/600
60150853-1	08	vaal.sininen	100/600
60151053-1	10	musta	100/600
60151253-1	12	valkoinen	100/600
60151453-1	14	vihreä	100/600
60151653-1	16	oranssi	100/600
60151853-1	18	punainen	100/600

Os.pakkaus = pienin toim.erä



Terveydenhuollon parissa työskentely on tärkeä tehtävä. Me Mediplastilla tapaamme päivittäin terveydenhuollossa työskenteleviä työlleen omistautuneita ihmisiä, jotka tekevät parhaansa paremman ja turvallisemman hoidon toteuttamiseksi. He tekevät työtä yhä useammille potilaille, entistä lyhyemmässä ajassa ja niukemmilla resursseilla.

Terveydenhoidon parantamiseksi Mediplast on tukenasi, aina valmiina toimittamaan osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja.

Uskomme läheisiin yhteistyösuhteisiin. Kun olemme päivittäin läsnä eri hoitoympäristöissä, näemme tarpeesi ja voimme huomioida toiveesi. Korkeatasoisen, kokonaisvaltaisen osaamisemme ja vuosien kokemuksemme avulla voimme tarjota tietojamme ja neuvojamme, jotka todella ovat merkityksellisiä. Tämä kaikki voidaksemme tarjota potilaille parhaan mahdollisen hoidon.

Läheinen yhteistyökumppani pohjoismaiselle terveydenhuollolle

Mediplast on ruotsalainen lääkinnällisten tuotteiden toimittaja ja pääasialliset markkinamme ovat Pohjoismaissa. Tuotevalikoimamme muodostuu osittain omista korkealaatuisista tuotteistamme, jotka on usein kehitetty läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon asiakkaidemme kanssa, sekä osittain muiden tunnettujen toimittajien tuotteista.

Tuotevalikoimamme on laaja ja sisältää kaiken kertakäyttöisistä tuotteista huipputeknisiin, investointiluonteisiin tarvikkeisiin ja laitteisiin. Tuotteita on saatavana eri erikoisaloille, kuten kirurgia, thorax/neuro/ortopedia, radiologia/neuroradiologia/kardiologia, sidonta, tehohoito/anestesia, korva-nenä-kurkku, avanteenhoito sekä kotisairaanhoido.

Hävittäminen

Repäisyypakkaus: jaetaan kahteen osaan – paperi → paperinkeräykseen
Muovi (PP/PE) → muovinkeräykseen
Osastopakkaus sisäpakkaus: LDPE → muovinkeräykseen
Osastopakkaus, valkoinen: → paperinkeräykseen
Kuljetuspakkaus, ruskea: → paperinkeräykseen