

Akut tracheostomi i CICO /nødsituation (kan ikke intuberes- kan ikke iltes)

Alle komponenter samlet i ét sæt

Kompakt pakkestørrelse




Surgicric II

Sæt til kirurgisk cricothyrotomi anvendes til den klassiske, kirurgiske teknik

/ Surgicric II

Surgicric II er et cricothyrotomisæt til den klassiske kirurgiske teknik og muliggør sikring af luftvejene i tilfælde af øvre luftvejsobstruktion som "Ultima Ratio", hvis alle andre forsøg på at ventilere patienten mislykkes. Sættet er pakket i steril indpakning med lommer og giver et klart overblik over alle komponenter. Det særlige ved Surgicric II er kombinationen af tube og dilatator. Den forudindsatte dilatator i tuben muliggør en hurtig og nem procedure.

Anvendelse

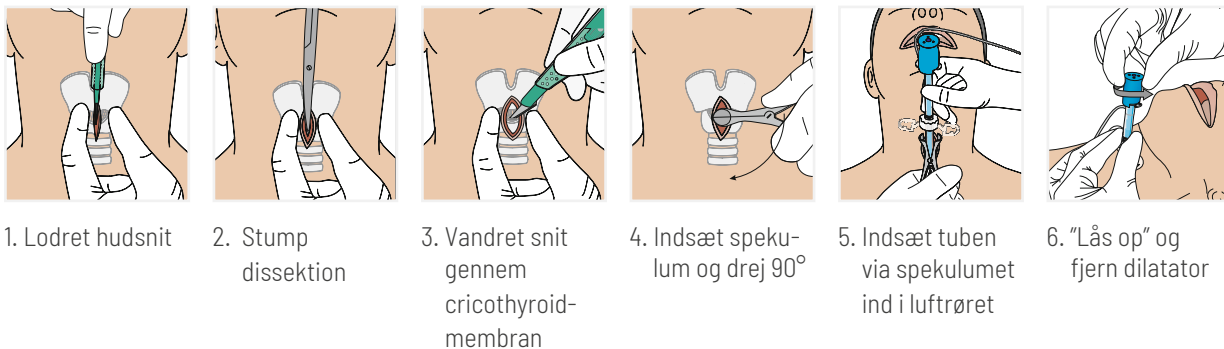

Egenskaber

Saks

- Til stump dissektion op til cricothyroidmembranen

Spekulum og trachealkrog

- Til at holde incisionen åben

Dilatator

- Blød spids for at forhindre skade på den bageste trachealvæg
- Glat overgang mellem dilatator og tubespids
- Låsemekanisme reducerer risikoen for utilsigtet dislokation af dilatatoren fra trachealtuben

6.0 mm I.D. tube


- Cuff til beskyttelse mod aspiration
- Bevægelig flange
- Atraumatisk, afrundet tubespids

Tube forlænger

- Med sugemulighed ≤ 16 Fr

Tracheostomi nakkeband

- Sikker fastgørelse af tuben

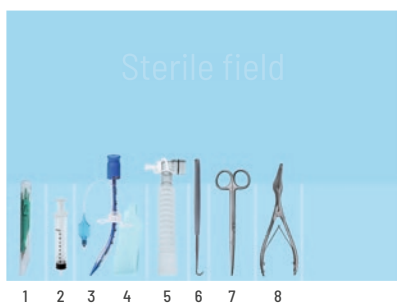

Indhold

- 1 Skalpel # 11
- 2 Sprøjte 10 ml
- 3 6,0 mm I.D. tube med cuff og dilatator
- 4 Tracheostomi nakkeband
- 5 Tube forlænger
- 6 Trachealkrog
- 7 Saks
- 8 Spekulum

Pakkestørrelse:

31.5 cm (L) x 15.2 cm (W) x 5.0 cm (H)

Udfoldet størrelse / sterilt felt:

56 cm (L) x 39 cm (W)

Solid emballage og kompakt pakkestørrelse, der passer til nødtasker, rygsække, akutvogne osv.

Bestillingsinformation

Surgicric II / Til engangsbrug, steril

Art.nr.	Æske
30081171	1

Yderligere information



Video

This product is manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.
This product does not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

VBM SurgiCric II 20231010 Sold by MP DK rev 1.pdf