

Hold fokus på rette sted

Smart væskehåndtering fra opsamling til bortskaffelse

Serres er pionerer inden for intelligente løsninger til væskehåndtering- og opsugning, der lader sundhedsfagligt personale verden over fokusere på det vigtigste.

Vi brænder for at optimere hele processen omkring væskeopsamling for derigennem at lette hverdagen for de mennesker, der arbejder med vores udstyr dag ud og dag ind.

Serres Suction Bags sikrer pålidelig og praktisk opsamling af kliniske affaldsvæsker, og hører derfor til blandt hospitalets vigtigste udstyr. Serres Nemo er en attraktiv løsning ud fra parametrene; omkostningseffektivitet, arbejds effektivitet og arbejds sikkerhed, idet systemet gør væskebortskaffelsen mere sikker, hygiejnisk og ukompliceret end nogensinde før.


Tilsammen udgør Serres Suction Bag System og Serres Nemo en integreret væskehåndteringsløsning, der varetager hele processen fra opsugning til bortskaffelse.

Væskeopsamling der virker

Væskeopsamling spiller en kritisk rolle på hospitaler, og det sundhedsfaglige personale skal til hver en tid kunne stole fuldt og fast på funktionaliteten. Pålidelighed er derfor det vigtigste kvalitetsparameter inden for løsninger til væskeopsamling.

Sundhedsfagligt personale verden over sætter dagligt deres lid til Serres Suction Bag System, der hver dag yder sikker og pålidelig væskeopsamling i forbindelse med over 40.000 operationer.

Serres Suction Bag System er designet i samarbejde med brugerne, og systemet er derfor nemt at lære at betjene og tage i brug. Disse forhold letter hospitalets daglige arbejdsgange.

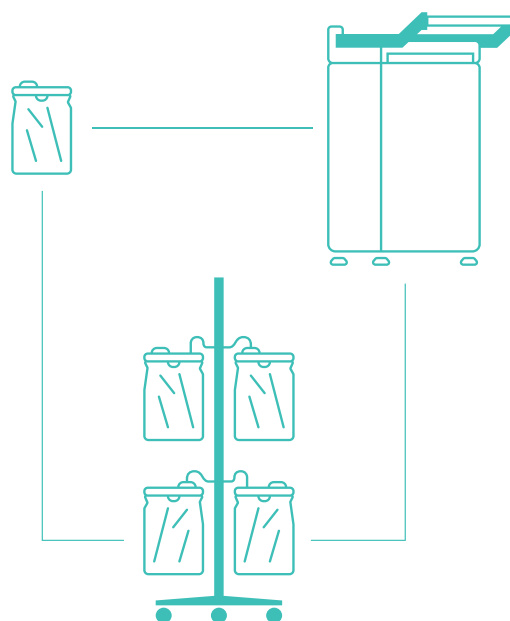

- **Pålidelighed:** Sundhedsfagligt personale verden over stoler på Serres Suction Bags til pålidelig og sikker væskeopsamling.
- **Brugervenlighed:** Alle produkterne fra Serres er designet i samarbejde med brugerne, og de er derfor intuitive at sætte op og nemme at bruge.
- **Bæredygtighed:** Serres løsningen øger bæredygtigheden ved at begrænse affaldsmængden og skabe nye, effektive processer.

opnå besparelser ved hver eneste tømmingscyklus med Serres Nemo

Bortskaffelse af affaldsvæsker med Serres Nemo

Serres Nemo systemet til bortskaffelse af Serres sugeposerne hjælper hospitaler med at opnå en mere sikker, intelligent og omkostningseffektiv væskehåndtering. Hver eneste tømningscyklus udgør en besparelse.

Serres Nemo er designet til intern destruktion af kliniske affaldsvæsker. Udgifterne til affaldsbortskaffelse gælder kun de tomme sugeposer og ikke selve væsken, og derfor sparer hospitalerne op til 97% ved at destruere væsken på denne måde. Ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt minimerer Serres Nemo desuden risikoen for kontaminering.

Nu fås Nemo i en ny opdateret version med en lettere og sikrere låg med soft close.

Forbundet til en vand- og kloakledning tømmer Serres Nemo indholdet af Serres Suction Bag ud i kloakken på bare 15 sekunder. Herefter kan den tomme Serres Suction Bag tilføres genanvendelseskredsløbet i henhold til hospitalets specifikke retningslinjer.

Serres Nemo er udført i et funktionelt design med en kompakt form, der kun kræver meget lidt plads. Den daglige rengøring af udstyret klares nemt og enkelt med den integrerede vaskekapsel.

Tekniske data	
Egnet til	Tømning af Serres 2000 ml and 3000 ml standard sugeposer
Målangivelser	H: 1010-1060 mm (lukket låg) B: 330 mm D: 780-900 mm
Tilslutninger	Koldt vand: G ½" Afløb: DN 50 Net spænding: stik med jordforbindelse 230V/ 50 Hz, 10A
Materiale	Rustfrit stål, plast
Vægt	Ca. 60 kg
Vandforbrug	6,8 liter/ cyklus

Forhandler:
MEDI PLAST

Mediplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com



Varenummer	Beskrivelse	Emballering
6003128	Serres Nemo, gulvmodel	1/1

“Vores procedure for bortskaffelse af affaldsvæsker er nu under kontrol”

Antonella Burtin, hygiejnesygeplejerske i Montpellier, Frankrig

- Kortere tømningscyklus. Nu tømmes en pose på kun 15 sekunder (tidligere 18 sekunder).
- Et nyt “soft-closing” låg med en markant blødere lukning, hvor også risikoen for klemmeskader reduceres.
- Længere vægbeslag for at give større fleksibilitet ved installation.
- 15% lavere vandforbrug- nu kun 6,8 liter vand pr. skylning mod tidligere 8 liter.
- På Nemo er der nu etiket med QR-kode, som linker direkte til de seneste brugsanvisninger på Serres’ hjemmeside. Altid lige ved hånden!

Beregn jeres besparelse -
serres.com/nemocalculator