


Välinehuollon tuoteopas

Kattava tuotevalikoima ja -tuki



MEDI PLAST

Sterilointia Parhaim- millaan

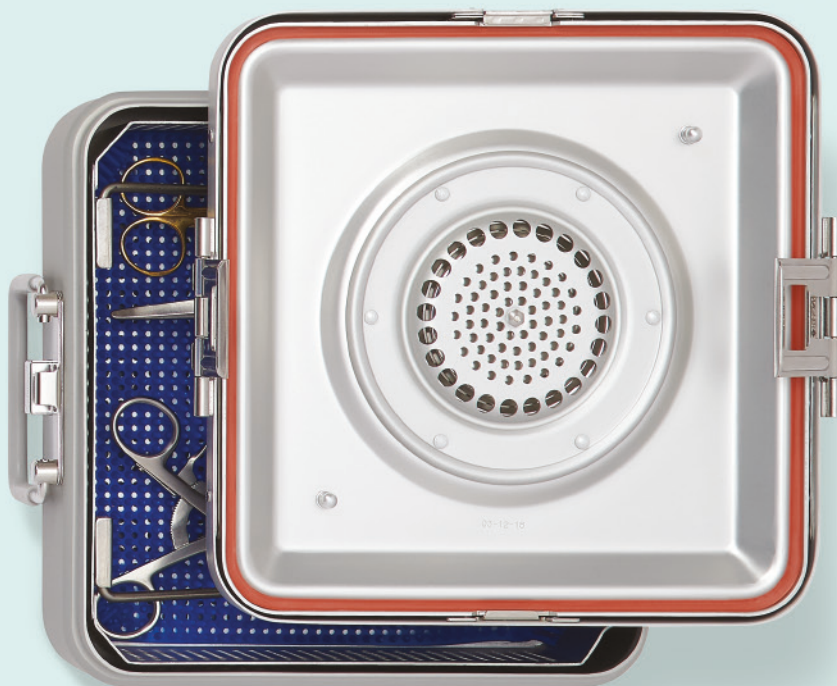



Käytä tätä kattavaa opasta työskennellessäsi Medline-edustajan kanssa.
Yhdessä voitte varustaa keskitetyn välinehuollon laadukkailla tuotteilla.
järjestelmällisen toimintanne tueksi

Tarkkaa huolellisuutta

Vain harva ymmärtää, kuinka vaativaa on keskitetty sterilointiprosessi, jossa tavoitteena on poistaa 99,999 % taudinaiheuttajista.

Medline ei pidä kirurgisten instrumenttien steriiliyttä itsestään selvyytenä. Me ymmärrämme siihen liittyvät haasteet ja pyrimme järjestelmällisesti tarjoamaan kattavia tuotevalikoimia sterilointiprosessin jokaiseen vaiheeseen.

Sterilointi

SteriSet® -sterilointikontainerit	5
Sterilointikorit	6
Steriloinnin lisätarvikkeet	9
Sterilointikääreet	10
Sterilointikääreiden lisätarvikkeet	12

Suoja-asut

Käsineet	14
Takit ja kengänsuojat	16
Kasvosuoja	19
Lattiaturvallisuus	
Lattiamatto	20

Sterilointi

Yksittäisten komponenttien steriloinnista siirtyminen valmiiksi koottuihin ja steriileihin setteihin tarkoittaa keskitetyn välinehuollon siirtymistä yksittäisten tuotteiden valmistelusta erinomaisen potilashoidon mahdollistamiseen. Medline auttaa saavuttamaan turvallisuus-, kestävyys- ja kustannustavoitteesi.

SteriSet® -sterilointikontainerit¹

Kaksinkertainen suojakansi

- Kestävä ruostumaton teräs/alumiini suojaa arvokkaita välineitä ja sisäventtiiliä
- Tilaa säästävä muotoilu mahdollistaa jopa 3 kontainerin pinoamisen sterilointilaitteeseen
- Suojaa pölyltä, liialliselta kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta, mikä parantaa hygieniaa

Venttiili ruostumatonta terästä

- Auttaa takaamaan steriiliyden ja vähentää jätettä
- Ei tarvetta kertakäyttöisiin paperisuodattimiin
- Avautuu automaattisesti painetoiminnon avulla esityhjiöhöyrysterilointisyklin aikana
- Venttiili pysyy kiinni steriloinnin jälkeen muodostaen läpäisemättömän sulun, joka pitää sisällön steriilinä

Turvalukitus


- Lämpöherkkä ThermoLoc-älylukitusjärjestelmä lukitsee kannen paikalleen sterilointisyklin ajaksi
- Ei tarvetta kertakäyttöisille muovilukoille
- Luvattoman käsittelyn estävä turvalukitus
- Varmistaa, että kontaineri pysyy suojattuna, kunnes se avataan leikkaussalissa
- Selkeästi värikoodatut kahvat ja etiketit helpottavat kontainerin valintaa

Kondensaatioveden tyhjennys painaville kuormille

- Ihanteellinen yli 8 kg painaville sarjoille tai olosuhteisiin, joissa on kosteaa höyryä
- Avautuu, kun sterilointilaitteen lämpötila on 130 °C, jolloin jäljellä oleva kondensaatiovesi pääsee vapautumaan kontainerista
- Kun sterilointilaitte on jäähtynyt 110 °C:seen, poistovenktiili sulkeutuu varmistaen, että instrumentit pysyvät kuivina ja täysin suojattuina



Ennen

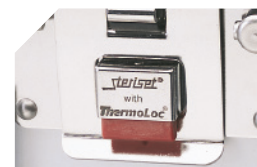

Jälkeen

SteriSet, 1/1 -koko

Suunniteltu kokonaisille instrumentaatioille.
Alla ulkomitat: pituus x leveys x korkeus.

Tasainen pohja

Tuotenumero Alumiinikansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA60	TVE60	59.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/kpl
TVA61	TVE61	59.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/kpl
TVA62	TVE62	59.6 x 27.5 x 16.0 cm	1/kpl
TVA64	TVE64	59.6 x 27.5 x 21.0 cm	1/kpl
TVA66	TVE66	59.6 x 27.5 x 27.0 cm	1/kpl

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

Tuotenumero Alumiinikansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA67	TVE67	59.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/kpl
TVA68	TVE68	59.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/kpl
TVA69	TVE69	59.6 x 27.5 x 18.0 cm	1/kpl
TVA6A	TVE6A	59.6 x 27.5 x 23.0 cm	1/kpl
TVA6B	TVE6B	59.6 x 27.5 x 29.0 cm	1/kpl

SteriSet, 3/4 -koko

Tasainen pohja

Tuotenumero Alumiinikansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA41	TVE41	45.6 x 28.0 x 14.0 cm	1/kpl
TVA42	TVE42	45.6 x 28.0 x 16.0 cm	1/kpl

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

Tuotenumero Alumiinikansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA48	TVE48	45.6 x 28.0 x 14.0 cm	1/kpl
TVA49	TVE49	45.6 x 28.0 x 18.0 cm	1/kpl



TVA60

TVA67

TVA41

SteriSet, ½-koko

Tasainen pohja

Tuotenumero Alumiini- kansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA30	TVE30	29.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/kpl
TVA31	TVE31	29.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/kpl
TVA32	TVE32	29.6 x 27.5 x 16.0 cm	1/kpl
TVA34	TVE34	29.6 x 27.5 x 21.0 cm	1/kpl
TVA36	TVE36	29.6 x 27.5 x 27.0 cm	1/kpl

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

Tuotenumero Alumiini- kansi	Tuotenumero Ruostumaton teräskansi	Kuvaus	Pakkaus
TVA37	TVE37	29.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/kpl
TVA38	TVE38	29.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/kpl
TVA39	TVE39	29.6 x 27.5 x 18.0 cm	1/kpl
TVA3A	TVE3A	29.6 x 27.5 x 23.0 cm	1/kpl
TVA3B		29.6 x 27.5 x 29.0 cm	1/kpl

TASKIT-kontaineri

Mini – Sopii erinomaisesti oftalmologisille instrumenteille

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkaus
KVA10	28.5 x 13.5 x 6.0 cm	1/kpl
KVA11	28.5 x 13.5 x 8.0 cm	1/kpl
KVA12	28.5 x 13.5 x 10.0 cm	1/kpl

Turvasinetti

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkaus
DPKSIE1	Vihreä	500/ltk
DPKSIE2	Sininen	500/ltk
DPKSIE3	Punainen	500/ltk
DPKSIE4	Keltainen	500/ltk
DPKSIE5	Valkoinen	500/ltk

DPKSIE3



SteriSet-steriloinnin värikoodit

Näkyviä tuloksia leikkaussalissa. Korit voidaan järjestää värin mukaan. Kontainerit voidaan luokitella toimenpiteen tai leikkaustiimin mukaan värikoodittain.

- Edistää parhaiden käytäntöjen standardeja: Setit voidaan järjestää toimenpiteen, lääkärin, erikoisalan tai leikkaustiimin mukaan.
- Parantaa tehokkuutta: Auttaa henkilökuntaa varastoinnissa ja oikeiden instrumenttisetien valinnassa.

Kahvat



Tunnistetarrat



Sterilontikorit

Metalliverkkokorit ruostumatonta terästä

Valitse sopiva koko käytetyimmille instrumenttisetuille

½ -kontainereihin

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
SCD 333	24.5 x 24.5 x 3.0 cm	1/kpl
SCD 336	24.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/kpl
SCD 3310	24.5 x 24.5 x 10.0 cm	1/kpl

SteriSet, ¾ -koko

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
SCD 433	40.0 x 25.0 x 3.0 cm	1/kpl
SCD 436	40.0 x 25.0 x 6.0 cm	1/kpl
SCD 4310	40.0 x 25.0 x 10.0 cm	1/kpl



SteriSet, 1/1 -koko


Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
SCD 633	51.5 x 24.5 x 3.0 cm	1/kpl
SCD 636	51.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/kpl
SCD 6310	51.5 x 24.5 x 10.0 cm	1/kpl
SCDD 636	48.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/kpl

Sterilointikontainereiden lisätarvikkeet

Silikonimatot

Silikonimatot suojaavat herkkiä kirurgisia instrumentteja. Koot yhteensopivia Medline-kontainereiden kanssa.

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
MDNSNS315	12.7 x 24.1 cm	1/kpl
MDNSNS335	24.1 x 24.1 cm	1/kpl
MDNSNS435	39.4 x 24.1 cm	1/kpl
MDNSNS635	47 x 24.1 cm	1/kpl

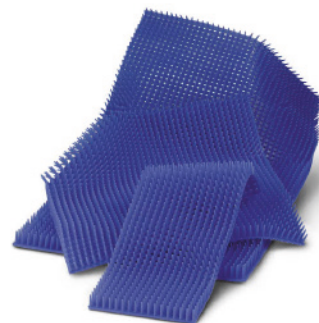

Tietokortit

Sopivat SteriSet-kontainerin päädysssä olevaan kehykseen

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
DPCIS13	lukko oikealla puolella	500/ltk
DPCIS02	lukko päällä	500/ltk



Gemini-sterilointikääreet²

Laskeutuva ja kestävämpi

Gemini-kääre on kestävämpi kuin tavalliset SMS-kääreet, eikä siihen tule helposti repeämiä tai reikiä. Se on erittäin pehmeä ja helposti käärittävässä, mikä helpottaa työskentelyä.

Vähänukkainen ja paremmin kiinnittyvä

Sterilointiteippi tarttuu pintaan. Luonnostaan lähes nukkaantumaton, mikä auttaa säilyttämään steriilien pakkausten eheyden.

Valmistettu ainutlaatuisesta SSMMS-kankaasta, joka todistetusti luo suojaesteen

Geminiin kestävä monikerroksinen ja 100 prosenttisesti polypropyleenistä (EN 11607-1- ja EN 868-2 -testattu) koostuva rakenne suojaa erinomaisesti nesteiltä ja hiukkasilta.

Monipuolinen

Medlinen Gemini-kääreet on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa merkittävimmissä sterilointiohjelmissa, kuten:

GEMO-GEM5

- esityhjiöhöyryohjelmat
- painovoimahöyryohjelmat

GEM1-GEM5

- etyleenioksidisterilointi (ETO-sterilointi)
- STERRAD®-sterilointi
- STERIS V-PRO® matalan lämpötilan sterilointi
- STERIZONE® VP4 -sterilointi.

WRAP-luokitus

Gemini-kääreet on valmistettu WRAP-sertifioidussa laitoksessa. Työntekijöiden ja ihmisoikeuksien edistäminen ja kunnioittaminen tuotantoketjuissa on osa Medlinen yhteiskuntavastuuta.

Tarkempia tietoja WRAPin 12 periaatteesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.wrapcompliance.org.



Gemini-sterilointikääre, yksinkertainen

Yksittäinen Gemini-sterilointikääre soveltuu yksiköihin, joissa käytetään kahta käärettä lääkinnällisten laitteiden tai instrumenttisarjojen käärimiseen.



YKSINKERTAINEN

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1,000 kpl/Itk	GEM1118-EU 1,000 kpl/Itk	GEM2118-EU 1,000 kpl/Itk	GEM3118-EU 600 kpl/Itk		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1,000 kpl/Itk	GEM1120-EU 1,000 kpl/Itk	GEM2120-EU 500 kpl/Itk	GEM3120-EU 250 kpl/Itk		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 kpl/Itk	GEM1124-EU 500 kpl/Itk	GEM2124-EU 500 kpl/Itk	GEM3124-EU 250 kpl/Itk	GEM4124-EU 250 kpl/Itk	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 kpl/Itk	GEM1130-EU 300 kpl/Itk	GEM2130-EU 300 kpl/Itk	GEM3130-EU 200 kpl/Itk	GEM4130-EU 250 kpl/Itk	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 kpl/Itk	GEM1136-EU 300 kpl/Itk	GEM2136-EU 300 kpl/Itk	GEM3136-EU 150 kpl/Itk	GEM4136-EU 150 kpl/Itk	GEM5136-EU 144 kpl/Itk
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 kpl/Itk	GEM1140-EU 250 kpl/Itk	GEM2140-EU 250 kpl/Itk	GEM3140-EU 150 kpl/Itk	GEM4140-EU 150 kpl/Itk	GEM5140-EU 96 kpl/Itk
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 kpl/Itk	GEM1145-EU 250 kpl/Itk		GEM3145-EU 100 kpl/Itk	GEM4145-EU 100 kpl/Itk	GEM5145-EU 96 kpl/Itk
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 kpl/Itk	GEM1148-EU 250 kpl/Itk	GEM2148-EU 100 kpl/Itk	GEM3148-EU 50 kpl/Itk	GEM4148-EU 50 kpl/Itk	GEM5148-EU 48 kpl/Itk
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 kpl/Itk	GEM1154-EU 100 kpl/Itk	GEM2154-EU 100 kpl/Itk	GEM3154-EU 50 kpl/Itk	GEM4154-EU 50 kpl/Itk	GEM5154-EU 48 kpl/Itk
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 kpl/Itk			GEM3172-EU 50 kpl/Itk	GEM4172-EU 50 kpl/Itk	

Gemini Interleaved –lomitettu sterilointikääre

Gemini Interleaved -arkkien monikerrosrakente eri värisillä kerroksilla soveltuu yksiköihin, joissa käytetään kaksoiskäärintä. Tässä ratkaisussa yhdistyvät repeytymättömyys ja varmuus. Se on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä sterilointiohjelmassa



INT

	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 kpl/Itk	GEM2124INT-EU 500 kpl/Itk	GEM3124INT-EU 250 kpl/Itk	GEM4124INT-EU 250 kpl/Itk
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 kpl/Itk	GEM2130INT-EU 300 kpl/Itk	GEM3130INT-EU 200 kpl/Itk	GEM4130INT-EU 250 kpl/Itk
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 kpl/Itk	GEM2136INT-EU 300 kpl/Itk	GEM3136INT-EU 150 kpl/Itk	GEM4136INT-EU 150 kpl/Itk
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 kpl/Itk	GEM2140INT-EU 250 kpl/Itk	GEM3140INT-EU 150 kpl/Itk	GEM4140INT-EU 150 kpl/Itk
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 kpl/Itk	GEM2148INT-EU 100 kpl/Itk	GEM3148INT-EU 50 kpl/Itk	GEM4148INT-EU 50 kpl/Itk
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 kpl/Itk	GEM2154INT-EU 100 kpl/Itk	GEM3154INT-EU 50 kpl/Itk	GEM4154INT-EU 50 kpl/Itk
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 kpl/Itk

Yhteensaumattu Gemini-sterilointikääre



Yhteensaumattu Gemini-kääre tuo varmuutta sterilointiprosessiin. Kaksi yhteenliitettyä arkkia tekevät siitä poikkeuksellisen kestävä ja parantavat tehokkuutta. Kaksi väriä helpottavat reikien havaitsemista ja instrumenttisarjojen erottamista toisistaan.

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEMO118T-EU 500 kpl/ltk	GEM1118T-EU 500 kpl/ltk	GEM2118T-EU 500 kpl/ltk	GEM3118T-EU 300 kpl/ltk		
51 x 51 cm	GEMO120T-EU 500 kpl/ltk	GEM1120T-EU 500 kpl/ltk	GEM2120T-EU 250 kpl/ltk	GEM3120T-EU 125 kpl/ltk		
61 x 61 cm	GEMO124T-EU 250 kpl/ltk	GEM1124T-EU 250 kpl/ltk	GEM2124T-EU 250 kpl/ltk	GEM3124T-EU 100 kpl/ltk	GEM4124T-EU 100 kpl/ltk	
76 x 76 cm	GEMO130T-EU 150 kpl/ltk	GEM1130T-EU 150 kpl/ltk	GEM2130T-EU 150 kpl/ltk	GEM3130T-EU 75 kpl/ltk	GEM4130T-EU 100 kpl/ltk	
91 x 91 cm	GEMO136T-EU 150 kpl/ltk	GEM1136T-EU 150 kpl/ltk	GEM2136T-EU 150 kpl/ltk	GEM3136T-EU 75 kpl/ltk	GEM4136T-EU 75 kpl/ltk	GEM5136T-EU 72 kpl/ltk
102 x 102 cm	GEMO140T-EU 100 kpl/ltk	GEM1140T-EU 100 kpl/ltk	GEM2140T-EU 100 kpl/ltk	GEM3140T-EU 75 kpl/ltk	GEM4140T-EU 75 kpl/ltk	GEM5140T-EU 48 kpl/ltk
114 x 114 cm	GEMO145T-EU 100 kpl/ltk	GEM1145T-EU 100 kpl/ltk		GEM3145T-EU 50 kpl/ltk	GEM4145T-EU 50 kpl/ltk	GEM5145T-EU 48 kpl/ltk
122 x 122 cm	GEMO148T-EU 100 kpl/ltk	GEM1148T-EU 100 kpl/ltk	GEM2148T-EU 50 kpl/ltk	GEM3148T-EU 30 kpl/ltk	GEM4148T-EU 30 kpl/ltk	GEM5148T-EU 24 kpl/ltk
137 x 137 cm	GEMO154T-EU 50 kpl/ltk	GEM1154T-EU 50 kpl/ltk	GEM2154T-EU 50 kpl/ltk	GEM3154T-EU 30 kpl/ltk	GEM4154T-EU 30 kpl/ltk	GEM5154T-EU 24 kpl/ltk
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 kpl/ltk	GEM4172T-EU 30 kpl/ltk	GEM5172T-EU 24 kpl/ltk

Lisätarvikkeet

Pölysuoja

Suojaamaan instrumenttikoreja pölyltä ja muilta ympäristön epäpuhtauksilta. Valmistettu lujasta, ja laadukkaasta polyeteenistä. Itsesulkeutuva.

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Sterilointikorin irtosuojaja³

Paperiset sterilointikorin irtosuojat edesauttavat kondensaatioveden imeytymistä steriloinnin aikana.

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Kuljetusalusta⁴

- Tukeva muovi on suunniteltu sallimaan ilman virtaus
- Auttaa vähentämään avoimia lankahyllyjä
- Auttaa suojaamaan instrumenttialustaa rei'iltä tai repeytymiltä steriloinnin, varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Suoja-asut

Hoitoympäristössä on paljon vaarallisia aineita ja mikro-organismeja. Medlinen suoja-asut tarjoavat tehokkaan suojan näitä aineita vastaan ja takaavat korkeimman turvallisuustason. Jokainen tuote on suunniteltu suojausta ja mukavuutta ajatellen.

Tutkimuskäsineet⁵

OptiCuff-
varren
rullaamattomuus-
teknologiaa

SensiCare® Pro 400 mm -nitrilikäsineet pidennetyllä varrella

SensiCare Pro Nitrile -käsineet ovat erinomaisen suojaavat, istuvat ja toimivat. Nämä käsineet on suunniteltu työntekijöille, jotka käsittelevät voimakkaita kemikaaleja tavallisissa työtehtävissä ja toimenpiteissä tai puhdistavat, dekontaminoivat ja desinfiioivat kirurgisia instrumentteja.

- Pidempi 400 mm:n varsi antaa erinomaisen suojan resorin ja hihan välillä
- Kauttaaltaan pintakuvioitu kämmenosa parantaa tuntoherkkyyttä
- Hyvät tulokset puhkaisulujuustesteissä
- Testattu solunsalpaajilla
- PPE-sertifiointi antaa lisäsuojan



Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
PR0400XS	SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, XS	50/pkt, 10 pkt/Itk
PR0400S	SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, S	50/pkt, 10 pkt/Itk
PR0400M	SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, M	50/pkt, 10 pkt/Itk
PR0400L	SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, L	50/pkt, 10 pkt/Itk
PR0400XL	SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, XL	50/pkt, 10 pkt/Itk

EN ISO 374-5-2016	taso
Suojaus bakteereita ja sieniä vastaan	Hyväksytty
Suojaus viruksia vastaan	Hyväksytty



SensiCare®-nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella ja erinomaisella tuntoherkkyydellä

- Kestävä nitriliisuoja
- Pidennetty varsi antaa lisäsuojaa
- PPE-sertifiointi antaa lisäkattavuutta
- Lateksin mukavuus nitrilikäsineessä


Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
MDSEXTXS	SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, XS	100/pkt, 10 pkt/Itk
MDSEXTS	SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, S	100/pkt, 10 pkt/Itk
MDSEXTM	SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, M	100/pkt, 10 pkt/Itk
MDSEXTL	SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, L	100/pkt, 10 pkt/Itk
MDSEXTXL	SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, XL	90/pkt, 10 pkt/Itk



Suojavaatevaatimukset täyttävät suojatakkit


Henkilökunta tietää, mitä heidän itsensä ja potilaiden suojaaminen edellyttää, mutta ajan puute ja hankaluus voivat johtaa sääntöjen ohittamiseen suojavaatevaatimuksissa. Medlinen suojavaatteet on nopea ja helppo pukea ja riisua ja samalla ne antavat erinomaisen suojan ja ovat mukavia käyttää.

Helppo pukea päälle. Erinomainen suojaus. Hengittävä materiaali.

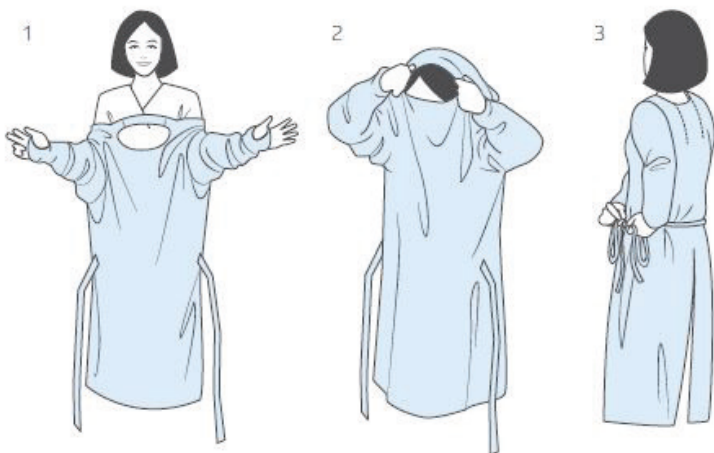

Pukeminen

1. Aloita työntämällä kädet hihoihin niin, että peukalot menevät peukalolenkkeihin.
2. Vedä takki pään yli.
3. Sido vyötärönauhat taakse.

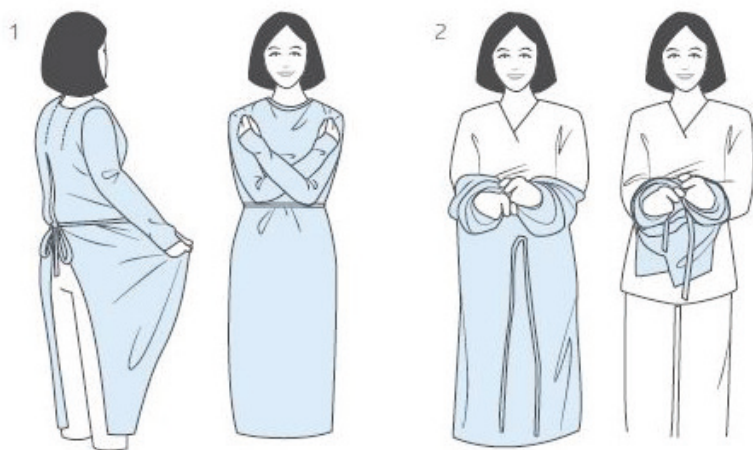

Riisuminen

1. Vedä vyötäröltä katkaistaksesi nauhat.
2. Vedä takkia rinnan kohdalta käsivarret ristissä.
3. Jatka takin rullaamista alaspäin kääroksi ja hävitä riisumisen jälkeen.

Koska avattavia niskanauhoja ei ole, kontaminaation mahdollisuus käsineistä hiuksiin tai niskaan vähenee.

Läpäisemättömät suojatakkit

Suojaa käyttäjää pitkäaikaisessa kosketuksessa nesteiden ja puhdistusaineiden kanssa. CRIE404xC- ja CRIE500x- sarjat on testattu glukoprotamiini-puhdistusainetta vastaan EN 16523-1 -säädöksen mukaisesti.

Kevyt, läpäisemätön kaksoislaminoitu suojatakki

- Vyötärö- ja niskanauhat
- Neulosresorit

Tuotenro	Koko	Väri	Pakkaus
CRIE4040C	L	Keltainen	10/pussi, 100/ltk
CRIE4041C	XL	Keltainen	10/pussi, 100/ltk



CRIE4040C

Läpäisemättömät polyetyleenisuojatakkit

- Pään yli puettava malli
- Peukalolenkki-ranneke
- Yksittäin taiteltu ja pakattu käyttöpakkaus

Tuotenro	Koko	Väri	Pakkaus
CRIE5010	L	Sininen	1/pussi, 15/pkt, 75/ltk
CRIE5011	XL	Sininen	1/pussi, 15/pkt, 75/ltk



CRIE5010

Kertakäyttöinen polyetyleeniesiliina

- Käytetään nesteitä läpäisevien takkien tai työasujen päällä, kun tarvitaan edullista lisäsuojaa nesteiltä suojaamiseen

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONE24274W	Keskipainoinen, 71,1 x 116,8 cm, yksittäispakattu, käyttöpakkaus	50/pkt, 250/ltk



NONE24274W

Jalkineet⁶

Jalkinesuojat

Kengänsuojat estävät ympäristön kontaminoitumisen ja vähentävät mikro-organismien kulkeutumista. Valmistettu polyeteeni- tai polypropyleenimateriaaleista, ja joissakin malleissa on ylimääräinen nestesuoja.

Tuotenro	Koko	Materiaali	Ominaisuudet	Pakkaus
CRIE2010	Yhden koon-malli	Polyetyleenikalvo	Läpäisemätön	100/pussi, 1 000/ltk
CRIE2020	Yhden koon-malli	Polyetylenei ja polypropyleeni (SPP)	Läpäisemätön	100/pussi, 200/ltk



CRIE2010



CRIE2020

Saapassuojat

Medlinen saapassuojat peittävät hyvin ja antavat paremman nestesuojan. Suojat peittävät kengät ja sääret aina polviin asti, ja yhden koon-malli sopii lähes kaikkiin jalkinemalleihin. Pohjassa on pintakuviointi. Suojissa on tarra- tai kuminauhut nilkkojen ympärillä, mikä auttaa suoja pysymään paikallaan ja takaa suojauksen riittävyyden.

Tuotenro	Koko	Ominaisuudet	Pakkaus
NONE27143XL	Yhden koon-malli	Nesteitä hylkivä	50/pkt, 150/ltk
NONE27144	Yhden koon-malli	Läpäisemätön	50/pkt, 150/ltk

NONE27143XL

- Nesteitä hylkivä materiaali ulottuu nilkan yläpuolelle
- Nestesuojaus pohjassa
- Tiivistetyt saumat jalkaosassa



NONE27143XL

NONE27144

- Läpäisemätön PE-pinnoitettu polypropyleeni-materiaali
- Nestesuojaus pohjassa
- Säädettävä tarrahihna



NONE27144

Medlinen uudistunut pakkaus helpottaa kasvosuojan valintaa

Pakkaus on suunniteltu niin, että henkilökunta voi helposti ja nopeasti tunnistaa kasvosuojien tärkeät ominaisuudet.

Värikoodattu pakkaus

Violetti: tyyppi IIR nesteitä hylkivä kasvosuoja


Vihreä: tyyppi II kirurginen kasvosuoja

Oranssi: tyyppi II toimenpidekasvosuoja

Sininen: Hengityssuojaimet

Rei'itetty ja kätevä avauskohta

Helpottaa avaamista ja hävittämistä

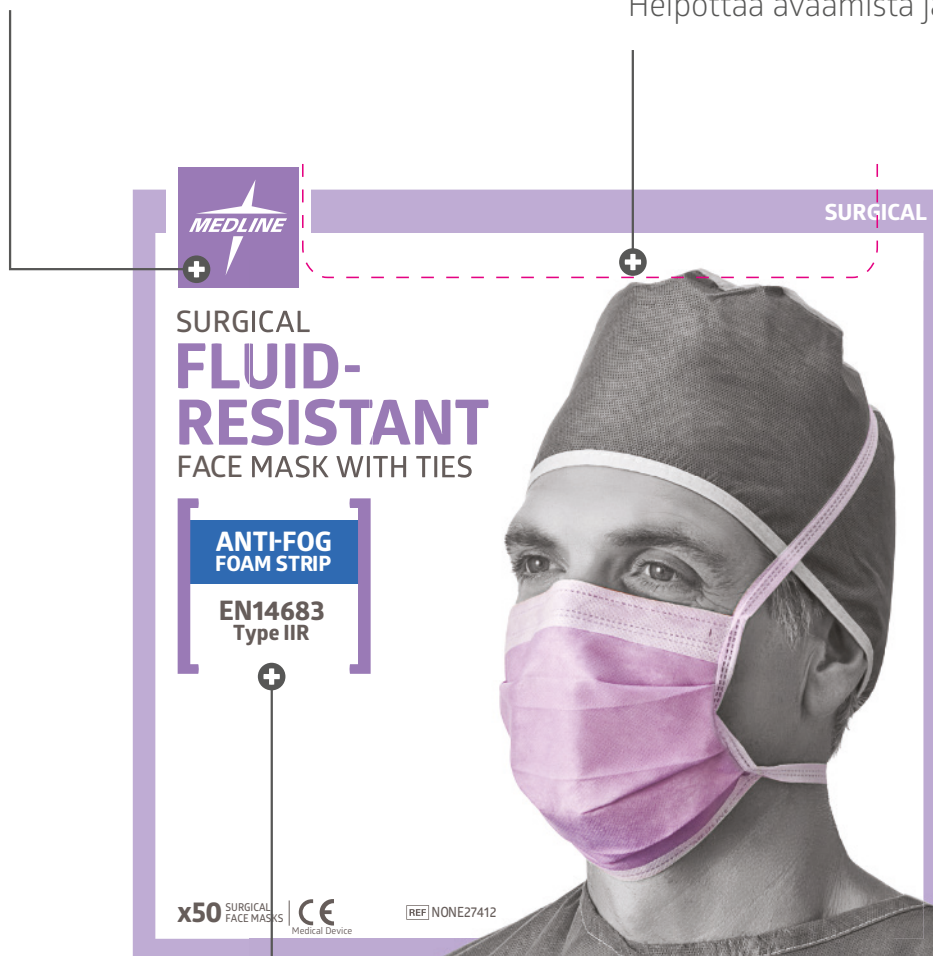

Tuoteluokitus

Helpottaa valintaa ja antaa mielenrauhan

Kasvosuojat

Nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä⁷



NONE27410EL

Roiskeilta ja nesteiltä suojaava kasvosuoja visiirillä ja elastisilla korvalenkeillä

- Optinen kirkas polyesterivisiiri
- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONE27410EL	Nesteitä kestävä kasvosuoja korvalenkeillä ja visiirillä	25/pkt, 4/ltk

Nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä ja nauhoilla⁷



NONE27710

Roiskeilta ja nesteiltä suojaava kasvosuoja visiirillä ja nauhakiinnityksellä.

- Optinen kirkas polyesterivisiiri
- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONE27710	Max X nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä ja nauhoilla	25/pkt, 4/ltk
NONE27410	Nesteitä kestävä kasvosuoja korvalenkeillä ja visiirillä	25/pkt, 4/ltk

Nesteitä hylkivä kasvosuoja korvalenkeillä⁷



NONE27412EL

- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha
- Voidaan käyttää ylimääräisen roiskesuojan, kuten kasvovisiirin tai suojalasien, kanssa

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONE27412EL	Nesteitä hylkivä kasvosuoja korvalenkeillä	25/pkt, 4/ltk

Kertakäyttöiset vaihtolinssit



NONFRAME

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONFRAME	Uudelleenkäytettävä kehys, saatavana eri värejä	100/pkt

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONLENS	Kertakäyttöiset vaihtolinssit	250/pkt

Kasvovisiiri



NONEFS500

- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha
- Elastinen otsanauha vaahtomuovilla
- Ei sisällä luonnonkumilateksia

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus
NONEFS500	Täyspitkä kertakäyttöinen kasvovisiiri elastisella vaahtomuovinauhalla	96/ltk

Päivitä välinehuoltoa koskeva turvallisuustaso

Märässä ympäristössä työskentely tarkoittaa päivittäisille vaaratilanteille altistumista, kuten liukastumista, kompastumista ja kaatumista. Välinehuollossa ja erityisesti kontaminaatioalueilla, missä kerääntyy nesteitä, tämä on erityinen riski henkilökunnalle.

Medlinen lattiaturvaratkaisu huomioi kaatumisvaarat ja tarpeen poistaa nesteet nopeasti ja turvallisesti.

Liqui-Loc™ Lattiamatto



- Helppo hävittää hygieenisesti ja turvallisesti
- Lämpäisemätön, luistamaton tausta seisonta- tai työkalualustaksi
- Vuotamaton, imukykyinen materiaali lukitsee nesteet sisälleen




Tuotenro	Kuvaus	Koko	Imukyky	Luistamaton	Pakkaus
ORLLPBS	Liqui-Loc; pieni	71.1 x 101.6 cm	2.2 L	Kyllä	13/ltk
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71.1 x 142.2 cm	3.0 L	Kyllä	10/ltk
ORLLPBL	Liqui-Loc; iso	71.1 x 182.8 cm	3.9 L	Kyllä	8/ltk

Kaksipuolinen imukykyinen lattia-alusta



- Erittäin imukykyinen lattia-alusta edistää puhtautta
- Nopeuttaa puhdistamista ja imee läikkyneet nesteet lattialta
- Ei saa seistä päällä

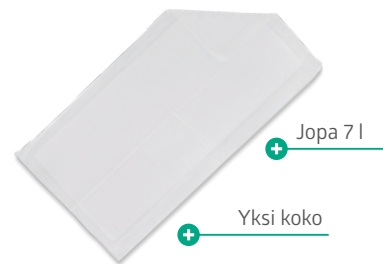

Tuotenro	Kuvaus	Koko	Imukyky	Luistamaton	Pakkaus
ORDSFMAT	Kaksipuolinen imukykyinen lattia-alusta	75 x 38 cm	7 L	Ei	50/ltk

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Medline-tuotepäällikköön tai käymällä sivustollamme osoitteessa: www.medline.eu/uk



Jälleenmyyjä:
Mediplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Suomi
Puh 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com

SEURAA MEITÄ  

MEDI PLAST

¹Steriset-kontainerit ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

²Gemini-käareet ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

³Korien irtosuojat ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

⁴GEMTRAY kuljetusalusta ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

⁵Medline-tutkimuskäsineet ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

⁶Jalkinesuojat & Saapassuojat ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

⁷NONE27xxx ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Oudon-Val-de-France, France

Tämän dokumentin käännöksen teki Mediplast Fenno Oy. Saadaksesi Medlinen verioiman englanninkielisen version, käänny jakelijan puoleen. Varaamme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä.

© 2022 Medline on Medline Industries, LP:n rekisteröity tavaramerkki. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_FI 02/2022