


Transfuusioletkut

- Erittäin suuri suodatinpinta (17,2 cm²) mahdollistaa tehokkaan suodatuksen ja suuren siirtonopeuden
- Eri pituisia letkuja 180–320 cm
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Rullasulkijalla on mahdollista säätää tarkka ja turvallinen tiputusnopeus
- Silikonoimaton pistinkärki turvalliseen yhdistämiseen transfuusiopussiin
- Verisuodatin 200 µm
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttöä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Saatavana kahdella pistinkärjellä ja/tai 3-tiehanalla/neulaton liitin
- MR-yhteensopiva

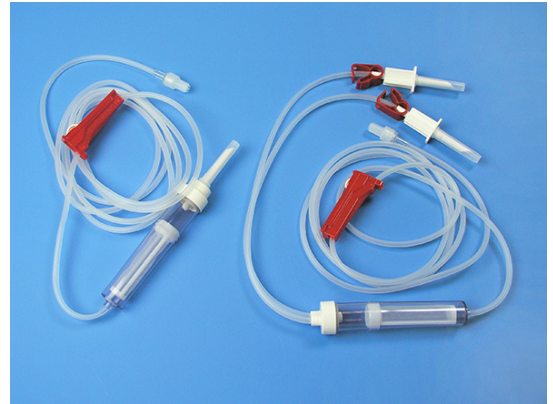

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR60500202	Transfuusioletku 180 cm	PVC-vapaa	10/100*
60SRL60500202	Transfuusioletku 180 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500200T	Transfuusioletku 180 cm	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL60500300	Transfuusioletku 180 cm kahdella pistinkärjellä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL60500300T	Transfuusioletku 180 cm kahdella pistinkärjellä	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL60500204	Transfuusioletku 180 + 12 cm , neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500231	Transfuusioletku 180 cm, 3-tiehana + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500210T	Transfuusioletku 220 cm	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60MR60500213	Transfuusioletku 250 cm	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500203	Transfuusioletku 320 cm	PVC-vapaa	10/100*

Materiaali: Letku: PVC DEHP-VAPAA/TPE Tippakammio: PVC DEHP-VAPAA/SB Pistinkärki: ABS Verisuodatin: PA Rullasulkija: ABS/PS	Puristin: PP Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE Liitin: ABS Luer-liitin: ABS 3-tiehana: PC/HDPE Neulaton liitin: PC/Silicone	Sterilointi: EO Transfuusioletku 20 drp aqua dest = 1 ml Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisyppakkaukseen * = pienin tilausmäärä
--	--	--