

Konisk og lige form

Farvekodet

Lavprofil design



Tourniquet Dispo manchete

Den hygiejniske engangsløsning

Tourniquet Dispo manchets


Tourniquet engangsmanchetter er et sterilt engangsprodukt specielt velegnet til kontaminerende procedurer, som forebygger HAI (Hospitalerhvervet infektion). Engangsmanchetter fås i lige form (til små eller mellemstore overekstremiteter) og konisk form (hovedsageligt til underekstremiteter) og leveres i forskellige størrelser, som er farvekodede for optimalt manchettervalg.

Egenskaber



Manchetter-design

- Stor velcrolukning og bindebånd for pålidelig manchetterfiksering
- Slange lavet af kinkresistent silikonemateriale
- Lavprofil design og letvægt
- Konisk og lige form
- PVC-fri

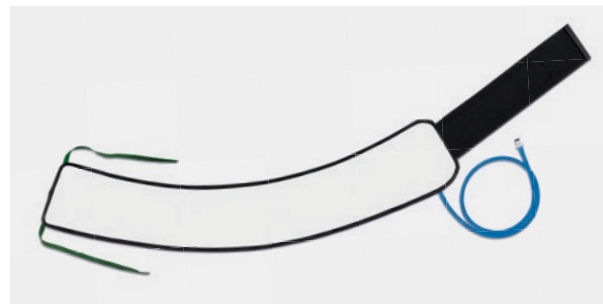


Konisk form

- Konisk design med en mindre diameter distalt end proksimalt
- Okkluderer blodgennemstrømningen ved lavere manchettertryk på grund af en forbedret tilpasning til koniske ekstremiteter
- Integreret afstivning for at forhindre manchettermigrering



Emballage

- Pakket i dispenserboks
- Farvekodning gør størrelsesvalg og bestilling nemmere
- Nem opbevaring grundet lav profilemballage

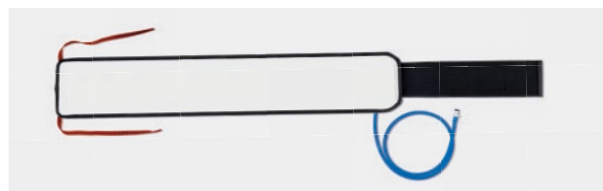

Lige form

- Cylindrisk design
- Viser ingen forskel i diameter mellem proksimal og distal del

Bestillingsinformation

Video Dispo
armmanchetter:



Video Dispo
benmanchetter:



Dispo manchets / Enkelt manchets, til engangsbrug, steril

Længde	Farve	Enkeltport	Dobbelt port	Æske
20 cm	-	2034700SLZ1	2036700SLZ1	10
30 cm	■	2034710SLZ1	2036710SLZ1	10
35 cm	■	2034711SLZ1	2036711SLZ1	10
46 cm	■	2034712SLZ1	2036712SLZ1	10
46 cm	■	2034715SLZ1*	2036715SLZ1*	10
61 cm	■	2034722SLZ1*	2036722SLZ1*	10
76 cm	■	2034727SLZ1*	2036727SLZ1*	10
86 cm	■	2034728SLZ1*	2036728SLZ1*	10
107 cm	■	2034729SLZ1*	2036729SLZ1*	10

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified. The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

Dispo manchets / Dobbelt manchets til intravenøs regional anæstesi (IVRA), til engangsbrug, steril

Længde	Farve	Artikelnr.	Æske
30 cm	■	2030710SLZ1	10
46 cm	■	2030712SLZ1	10
61 cm	■	2030722SLZ1	10

Forlængerslange / Til engangsbrug, steril

Længde	Artikelnr.	Æske
100 cm	20391001	5

*Konisk form

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

CE 0123

PRO023_3.0_EN