


seca 222


Smart och ergonomisk längdmätare med hälstöd



Här läser du av längd
under 130 cm.

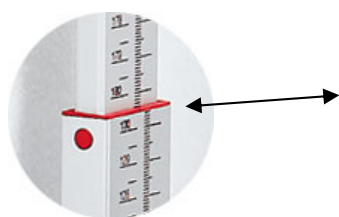

Här läser du av längd
över 130 cm.

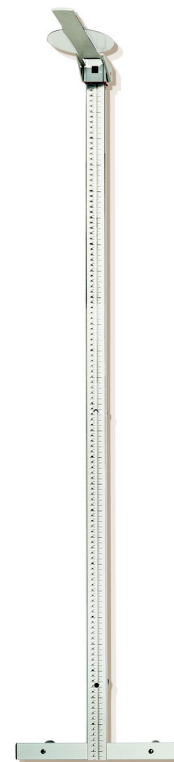

Art. Nr. 2221714008

En smart teleskopisk (utdragbar) längdmätare i hygienisk metall för vägg.
Här håller du inte i huvudstödet. Istället drar du i den övre delen av längdmätaren när du passar in huvudstödet på patientens huvud. När patienten är lång behöver du aldrig mer stå på tå. Varken när du ska ställa in höjden eller när du ska läsa av längden.
Längdmätarens smarta konstruktion gör att du aldrig läser av längden högre upp än 130 cm över golvet. När du mäter lägre än 130 cm trycker du in spärknappen på huvudstödet och för över det till den lägre delen av längdmätaren.
Längdmätaren har hälstöd och extra stort fällbart huvudstöd.

Mätområde	60 - 230 cm
Gradering	1 mm
Vikt	1.3 kg
Mått (BxHxD)	120 x 1322 x 34 mm
Direktiv	93/42/EEC MDD

seca
Precision for health