

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugofix™
sleeve leg bag holder
Sleeve benposeholder



Konstruert for å støtte benposer koblet til innlagte katetere og skjeder



optimummedical®

Ugo Fix™

sleeve leg bag holder

I **Optimum Medical** forstår vi behovet for et sikkert og pålitelig kateter og benposefeste.

Vi har utviklet **Ugo Fix Sleeve** for å gi komfortabel støtte og gi pasienten trygghet til å bevege seg rundt fritt og sikkert.

Ugo Fix Sleeve er konstruert til å støtte benposer festet til urinrørskateter, suprapubiske katetre og urinskjedesystemer.

LATEKSFRI

Sterke sider:


- Vaskbar, strikket fiberblanding som gir styrke og holdbarhet
- Konturer i benfasong som gir jevn fordeling av urin og redusert støy
- Graderte linjer med konsentrert elastan som støtter og kontrollert ekspansjon når posen fylles
- Utvendig søm som hindrer hudskader og gir komfort
- Forsterket utløpshull som opprettholder kontinuerlig støtte
- Økt bredde og styrke i de øvre og nedre båndene for støtte og fiksering
- Ingen unødvendige slangehull i toppsømmen. Derfor hindres frakobling av koblingsdreneringssystemet
- Fargekodet toppsøm som bidrar til å sikre riktig montering og enkel ny bestilling
- Ideelt komplettert med Ugo Fix Catheter Strap



SLIK BRUKER DU UGO FIX SLEEVE BENPOSEHOLDER

Før montering er det viktig at du måle rundt den bredeste delen av låret eller leggen og bruker riktig størrelse i tabellen nedenfor.

Art.nr.	PIP kode	Produktbeskrivelse	Innvendig pakning	Utvendig pakning
603005	394-0178	Ugo Fix Sleeve Small - 24 cm-39 cm	4 stk.	80 stk.
603006	394-0160	Ugo Fix Sleeve Medium - 36 cm-55 cm	4 stk.	80 stk.
603007	394-0152	Ugo Fix Sleeve Large - 40 cm-70 cm	4 stk.	80 stk.
603008	394-0145	Ugo Fix Sleeve Extra Large - 65 cm-95 cm	4 stk.	80 stk.

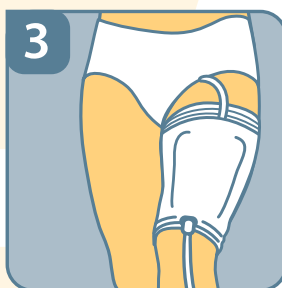

Vi anbefaler å bytte **Ugo Fix Sleeve** daglig eller oftere hvis ermet blir skittent. Vi har pakket ermene i sett med 4 stk. for å bistå med daglige bruk og vask-syklus for å gjøre det enkelt.

For å opprettholde optimal funksjon på din **Ugo Fix Sleeve**, anbefaler vi at du vasker ermet i en vaskepose. For å bistå med dette leverer vi en vaskepose med hver eske **Ugo Fix Sleeves**.

1 Trekk **Ugo Fix Sleeve** over foten og plasser den på låret eller leggen. Sørg for at fargestripen er øverst og vender utover.

2 Skyv benposen inn i frontlommen gjennom åpningen på toppen.

3 Skyv dreneringskranen gjennom hullet i bunnen av ermet og juster for å sikre optimal drenering og komfort.

➔ Nå kan du tømme benposen uten å fjerne den fra **Ugo Fix Sleeve**.





optimum medical
support™



Opplæring og utdanning for å optimere pasientomsorg

Besøk www.optimummedicalsupport.co.uk for å lese mer.

MILJØRETNINGSLINJER



FSC
www.fsc.org

Som produsent av medisinsk utstyr forstår vi at vi har et ansvar for å redusere vår påvirkning på miljøet og ta vare på naturressurser. Vi gjør vårt beste for å bruke minst mulig pakningsstørrelse for å redusere materialbruken og dermed bruk av deponier.

Ved transport av produkter sørger vi for at våre transportoperasjoner er så effektive og miljøvennlige som mulig.



Alt trykt markedsføringsmaterieill er 50 % resirkulert og sertifisert iht. FSCs sporbarhetsertifiseringsprogram.



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Mediplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00 | mediplast@mediplast.no | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

