



Cleantex Sterilpose


Et smidig og kostnadseffektivt alternativ til den ytterste innpakningen eller i de tilfeller der en vanlig papir/plastpose ikke holder, f.eks. ved innpakning av tungt gods eller instrumentholdere.

- Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang
- Produseres og anvendes på samme måte som en vanlig papir/plastpose, men i stedet for papir benyttes et meget sterkt 60 g/m² Non-Wovenmateriale
- Lett å åpne
- Har indikatorer for damp
- Patentert indikatorsystem for maksimal sikkerhet
 - ikke utslag ved feilpakking i autoklav

Non-Woven materialet har meget gode egenskaper blant annet mot å revne, bli slitt i stykker, meget god sveisestyrke og beskyttelse mot bakteriepenetrasjon, damp-porøsitet og vannavvisning. Alt dette gjør Cleantex-posen til et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til vanlige poser og steriliseringsomslag.

Cleantexposen åpnes på vanlig måte og lukkes ved hjelp av en vanlig posesveis.

Sveising: Det anbefales å sveise posematerialet ved 175-210°C

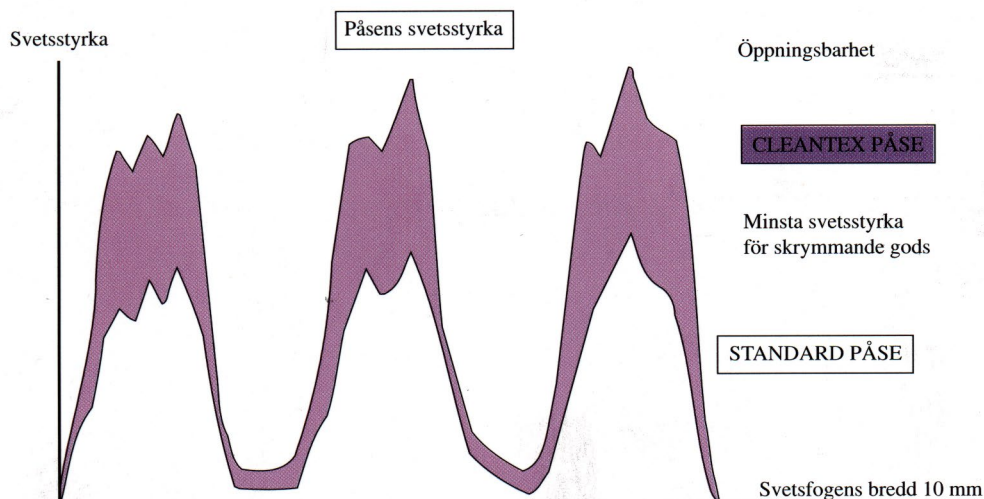

Jämförelse av svetsfogens styrka mellan en STANDARD PÅSE OCH CLEANTEX PÅSE (jämförelsen gjord med en 3 kanals svetsfog, 10 mm bred)

Artikelnr	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
482S220450	220 mm x 450 mm	500
482S285350	285 mm x 350 mm	800
482S285450	285 mm x 450 mm	500
482S285750	285 mm x 750 mm	400
482S320550	320 mm x 550 mm	300
482S042118	420 mm x 1180 mm	200
482S420600	420 mm x 600 mm	300
482S480640	480 mm x 640 mm	250
482S480750	480 mm x 750 mm	250
482S660900	660 mm x 900 mm	200
482S750120	750 mm x 1200 mm	200

CE-merking: MDR 2017/745
 EN ISO 11607: 1, Class I
 Indikatorer: ISO 11140-1

Kvalitetssystem: ISO 9001 og ISO 13485

Oppbevaring:
 Oppbevares på kaldt og tørt 10-30°C uten sterkt lys og med 30-60% relativ luftfuktighet. Holdbarhet 5 år fra produksjonsdato.