



Medena[®]

Suge teknologi

Stort sortiment af
sugesæt til professionel
kirurgi

Medena

Medenas brede vifte af sugesæt består af engangsprodukter, beregnet til at fjerne væsker under kirurgi. Sortimentet er beregnet til sugning i forskellige kirurgiske sammenhænge afhængig af procedurens krav.

Sortimentet omfatter f.eks. modeller med

- forskellige mundstykker - nænsom sugning
- høj sugekapacitet
- nem adgang
- variabel sugekraft via vakuum kontrol
- poole/rissler-funktion



Medena-sortimentet består af to atraumatiske sugemundstykker: Slidsmundstykke (Vällfors) og dobbeltlumen (Maxi), og giver mulighed for at dække mange behov. Væskesug: Designet til at minimere risikoen for væskeblokering i sugeinstrumentet. Nænsom sugning: Minimerer risikoen for vævsgreb. Slidsmundstykket (Vällfors) og Maxi (dobbeltlumen) er designede til at mindske sår- eller vævsskade og levere en ønsket sugekapacitet. Nem adgang i operationssår: Forskellige sugemundstykker er afpasset den enkelte operation. Mundstykkerne er hvide, så de er mere synlige i dybe sår end gennemsigtige sugemundstykker.

Slidsmundstykke – Vällfors

Udviklingen af slidsmundstykket er baseret på omfattende praktiske og teoretiske studier.^{1, 2} De tre slidser gør det muligt for suget at hvile på bunden af såret med nedsat risiko for vævsgreb. Selve sugningen sker hovedsageligt lateralt, hvilket giver et rent og synoptisk operationsfelt. Suget med slidsmundstykke har gribevenlige håndtag, der forbedrer præcisionen i det udførte arbejde. Mundstykkerne er hvide, hvilket gør dem nemmere at se i dybe sår end gennemsigtige sugemundstykker.

Mundstykke med tre slidser

- minimerer vævsgreb
- giver konstant høj sugekapacitet
- giver god synlighed i operationsfeltet

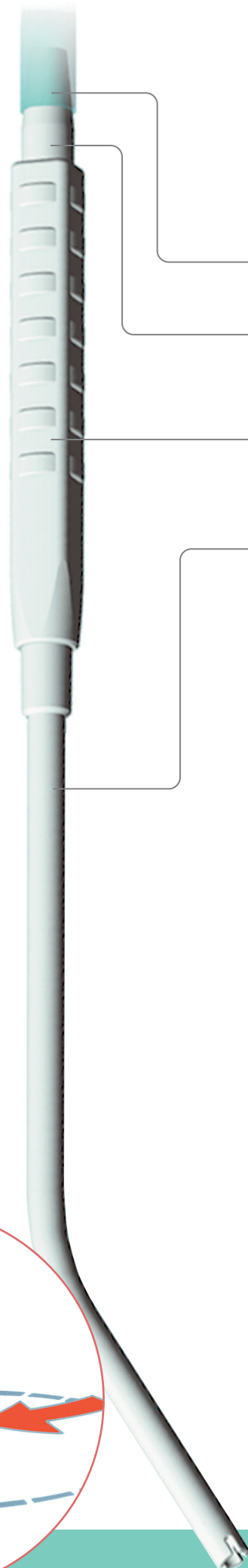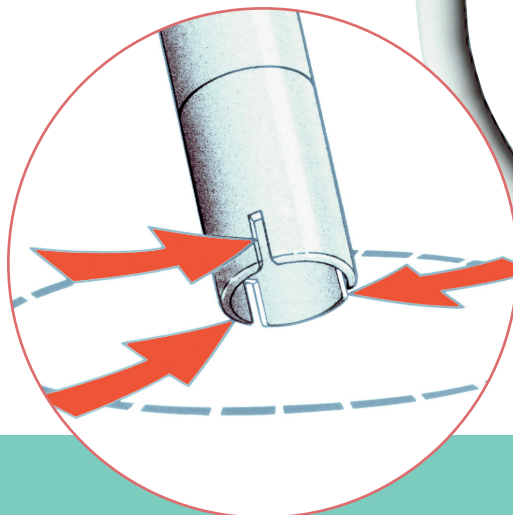


Stabile rør - bevarer lumen

Uden svejset overgang mellem håndtag og slange, derved ingen risiko for blokering af vævsrester

Gribevenlige håndtag - stabile og nemme at bruge

Hvidt mundstykke - kan nemt ses selv i dybe sår

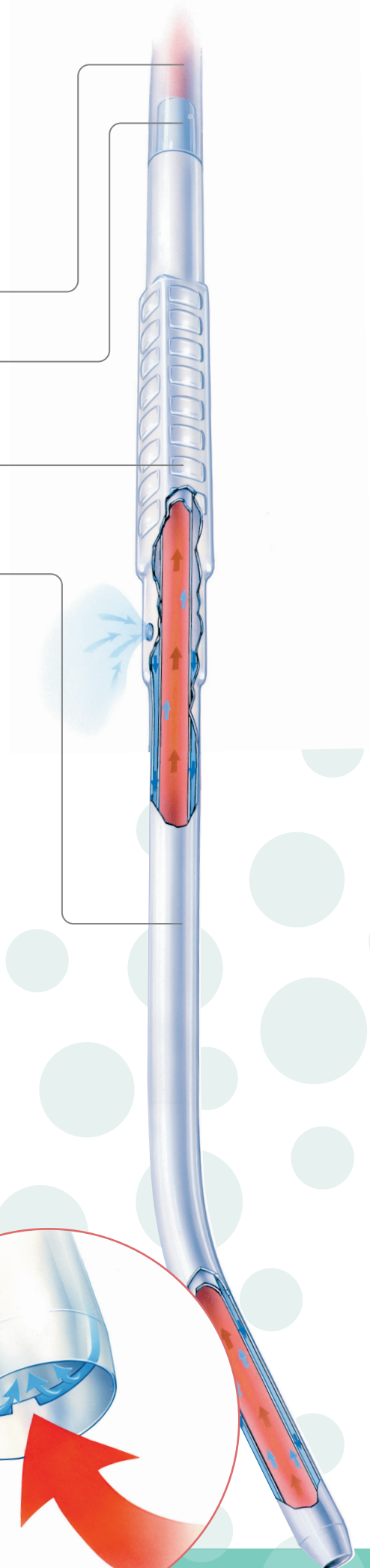


Maxi og Maxette

Maxi-princippet kombinerer høj sugekapacitet med atraumatisk væskesugning på grund af det dobbelte rør. Med vakuum kontrollen åbent for normal sugning har disse mundstykker samme kapacitet som standard sug med lukkede vakuum kontrol. Det negative tryk ved mundstykket er blot 20 mmHg, hvilket gør sugning helt atraumatisk. Med vakuum kontrollen lukket, forstærkes flowkapaciteten.

Dobbeltlumen

- nænsom sugning
- minimeret vævsgreb
- høj sugekapacitet

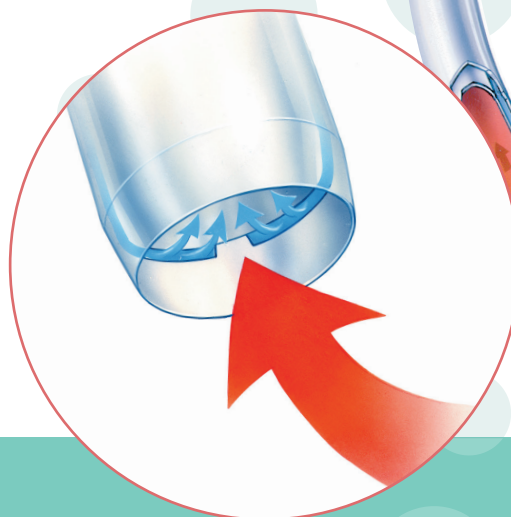

Til fordel for patienten - og bedste lægehjælp

Materiale:

Mundstykke, slange og andre komponenter er lavet af pvc. DEHT/DOTP, som ikke er phthalater, vil erstatte DEHP som blødgører i slangen i løbet af 2022.

Indpakning:

Begge komplette sugesæt og de enkelte komponenter leveres sterile og dobbeltindpakket - en indvendig plastpose og en udvendig pose, der rives åben. Den udvendige pose, der rives åben, er af gennemsigtig plast på den ene side og af papir på modsatte side, med produktidentifikation. Papiret har en særlig belægning, der sikrer, at det er lufttæt og ikke afgiver uønskede partikler. Poserne, der rives åbne, er pakket i transportæsker af bølgepap (575x385x410) med rivestrimmelåbning og indvendigt skillerum, der minimerer risikoen for beskadigelse af enten produktet eller poserne.

Sterilisering:


Medioplast produktfremstilling følger et certificeret kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO 13485:2016 og ISO 14001:2015. Produkterne er forsterilerede med ætylenoxid.

Komponenter

Ingen indvendige samlinger. Forbindelsen mellem sugemundstykket og slangen er konstrueret til at danne mindst mulig turbulens.

Den ekstra lange slange mindsker behovet for ekstra slangekoblinger.

Koblingen er konstrueret til at mindske risikoen for turbulens i forbindelse med sugebeholderen.

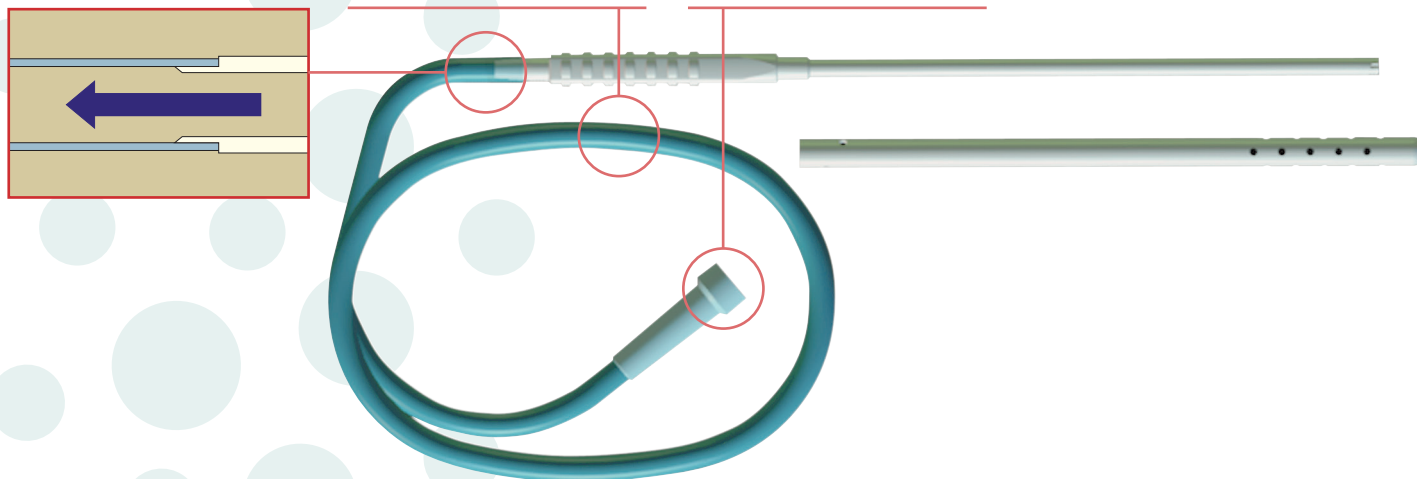




Produktprogram

Sugeinstrumenter/sugesæt

Slidsmundstykke (Vällfors).....	1
Maxi	2
Special.....	3-5
Yankauer	6
Sugemundstykker	7

Slanger/slangesæt

Slangesæt	8
-----------------	---

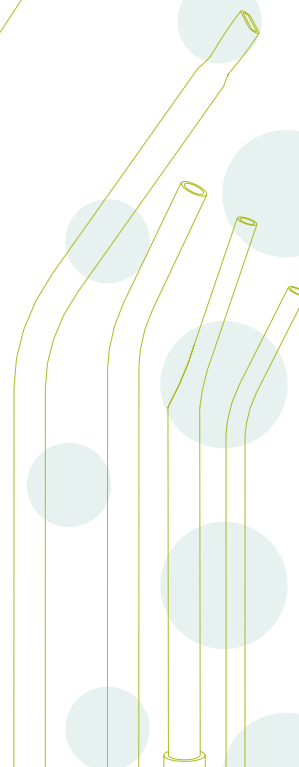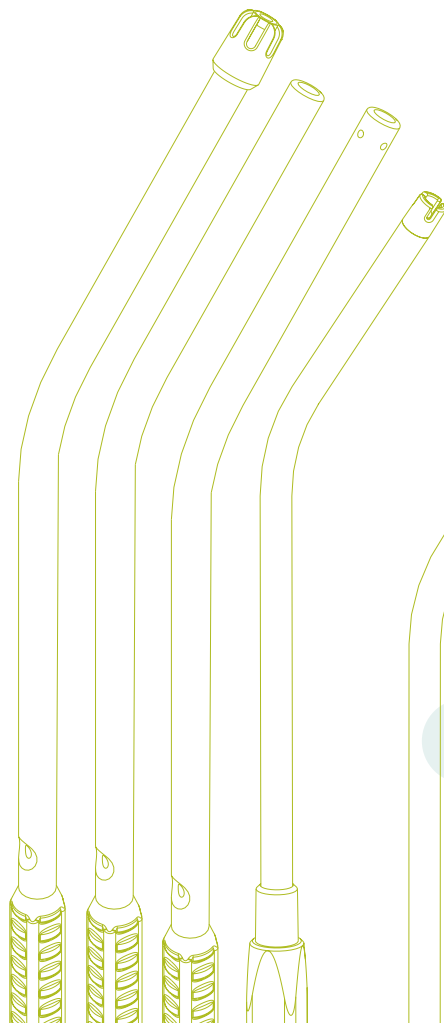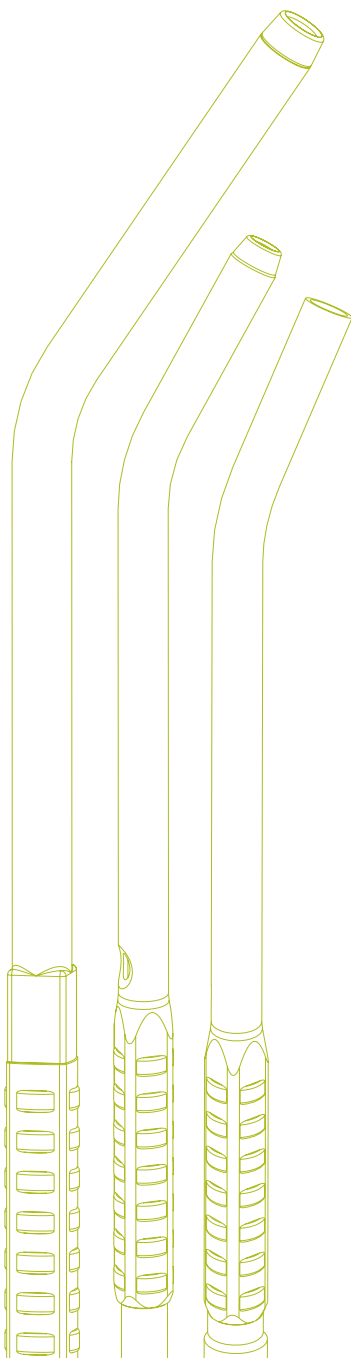

Type mundstykke

Slidsmundstykke (Vällfors)



Maxi



Standard cirkelrundt



Konisk



Fladt




Med fire huller



Sump




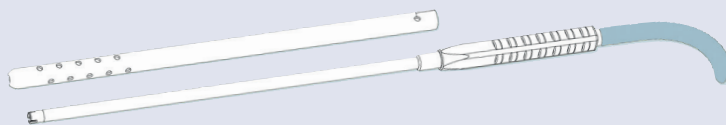

Poole/rissler



Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuump kontrol	Ø	Længde	
68142	5x6,2 mm	31 cm	—	—	—	100
68145				5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68146					3,5 m	2x30

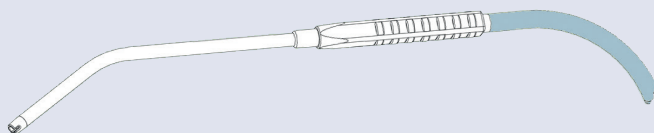


Midi




Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuump kontrol	Ø	Længde	
68132	5x6,2 mm	26 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68133					3,5 m	2x35

Mundstykke med tre slidser

- minimerer vævsgreb
- giver konstant høj suge kapacitet
- giver god synlighed i det synoptiske operationsfelt

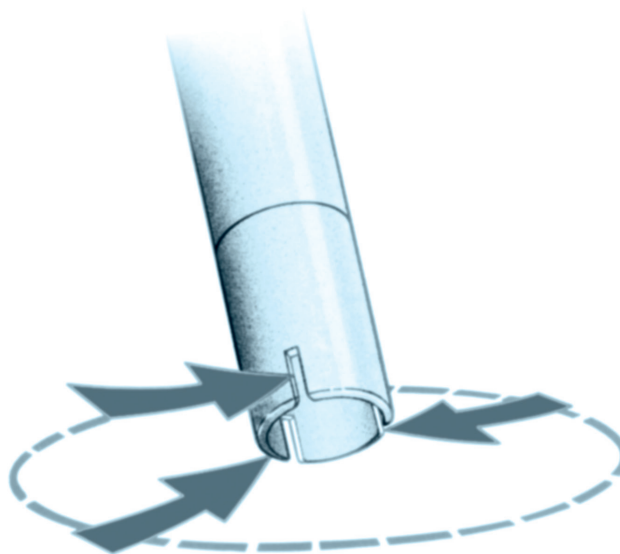


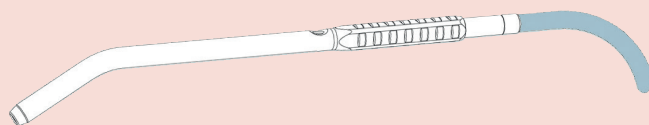

Maxette




Ref.	Sugesæt			Slinger		
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	Antal
68176	5x10 mm	27 cm	ja	5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68177					3,5 m	2x30

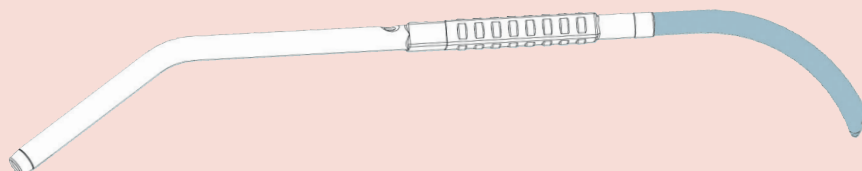

Maxi




Ref.	Sugesæt			Slinger		
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	Antal
68171	7x11,6 mm	33 cm	ja	7,8x10,7 mm	2,0 m	2x30
68172					3,5 m	2x20

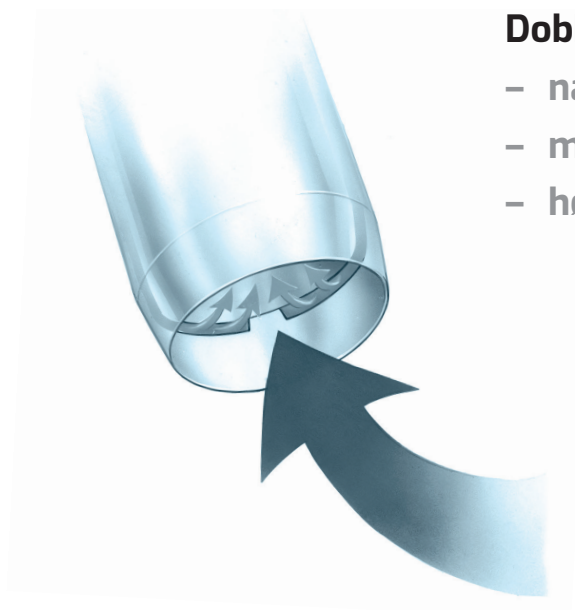

Dobbeltlumen


- nænsom sugning
- minimeret vævsgreb
- høj sugekapacitet

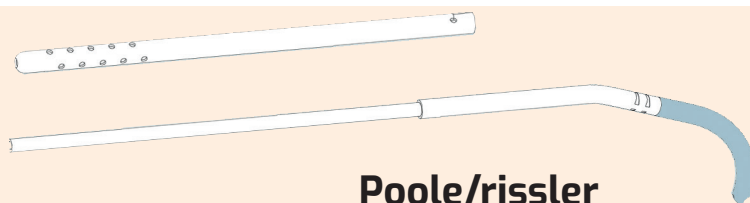
Poole/rissler


Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68100	4x6,2 mm	33 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68107					3,5 m	2x30
68119			ja		2,0 m	2x45


Fladt mundstykke



Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68103	5x6,2 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68128					3,5 m	2x35

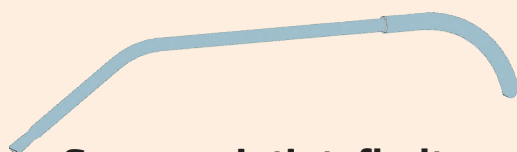
Gennemsigtigt, fladt mundstykke


Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68105	4,1x5,8 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50


Konisk mundstykke


Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68104	5x6,2 mm	21 cm	ja	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68129					3,5 m	2x35

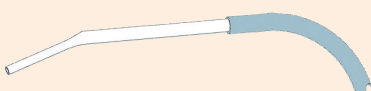
Konisk mundstykke - mini


Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68110	5x6,2 mm	12 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68131					3,5 m	2x35



Dobbeltbukket



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længd	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68102	5x6,2 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68113					3,5 m	2x35



Dobbeltbukket



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længd	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68120	5x6,2 mm	17 cm	—	—	—	100
68112				5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Dobbeltbukket



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længd	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68126	3x4,0 mm	17 cm	—	—	—	100
68118				5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68209					3,5 m	2x35



Rektoskopsugning




Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længd	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68152	5x6,2 mm	40 (47) cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x45




Vaginal-skyllerør




Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længd	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68159	8x10 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50

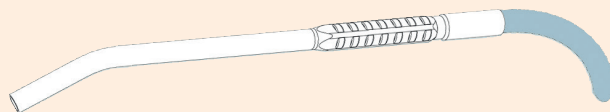
Megabukket



Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68285	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	2,0 m	2x35

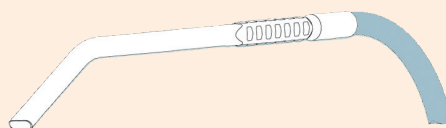
Megabukket


Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68287	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	2,0 m	2x35

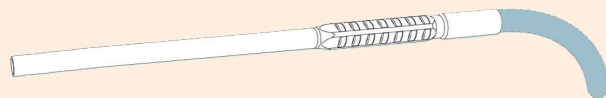
Megalige



Ref.	Sugesæt			Slangar		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68295	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	3,5 m	2x30

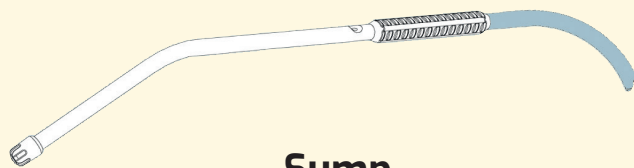

Sump



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68256	4x6 mm	25 cm	ja	5,5x8 mm	2,0 m	2x50

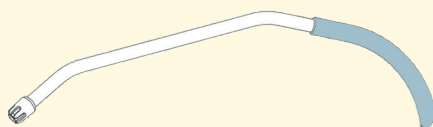

Sump, dobbeltbukket




Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68155	4x6 mm	17 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Med fire huller



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68258	4x6 mm	25 cm	ja	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68259			—			

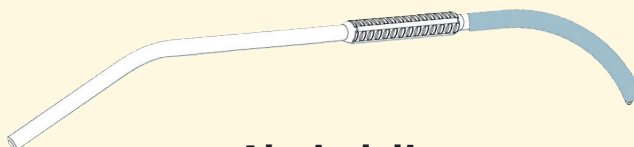

Almindelig



Ref.	Sugesæt			Slanger		Antal
	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Ø	Længde	
68261	4x6 mm	25 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Poole/rissler



	Ref.	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Antal
DOBBELTRØR/RISSLER	68142	5x6,2 mm	31 cm	—	100



Dobbeltbukket, tyk



Dobbeltbukket, tynd



ØNH/Dental



Slanger



	Ref.	Ø	Længde	Vakuum kontrol	Antal
DOBBELTBUKKET, TYK	68120	5x6,2 mm	17 cm	—	100
DOBBELTBUKKET, TYND	68126	3x4 mm			
ØNH/DENTAL	68124	2x3 mm			
	68125	2,5x3,5 mm			

	Ref.	Proximalt	Distalt	Ø	Længde	Antal
SLANGER	68108	Mjuk koppling	Kona	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
	68130				3,5 m	2x35



Sugesæt

Ref.	Proximalt	Distalt	Ø	Længde	Antal
68121	Afskåret	Hunkobling	5,5x8 mm	2,0 m	2x50




Koblingssæt

Ref.	Proximalt	Distalt	Ø	Længde	Antal
68167	Hunkobling	Hunkobling	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68115				3,5 m	2x35

Bblød

Standard

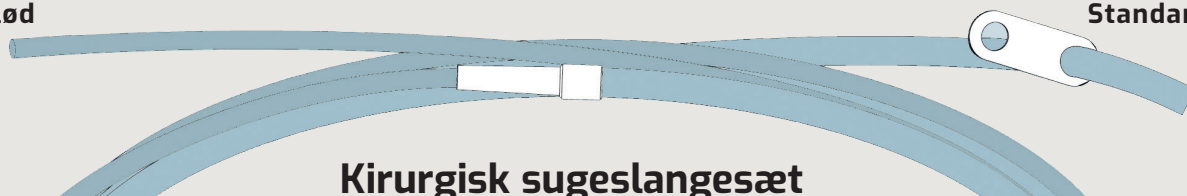


Kirurgisk sugeslangesæt

Ref.	Proximalt	Distalt	Ø	Længde	Antal
68157	Afskåret	Afskåret	6x8,6 mm	1,0 m	2x20
			9,7x13,5 mm	2,5 m	



Sugesæt

Ref.	Proximalt	Distalt	Ø	Længde	Antal
68106	Hankobling	Hunkobling	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68114				3,5 m	2x35
68207	Hankobling med vakuüm kontrol			2,0 m	2x50

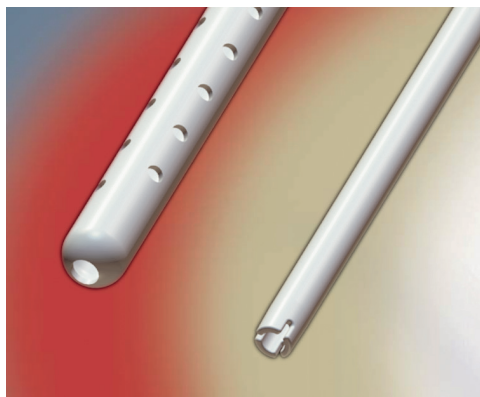

Atraumatiske sugemundstykker

Medena-sortimentet består af to atraumatiske sugemundstykker: Slidsmundstykke (Vällfors) og dobbeltlumen (Maxi), og giver mulighed for at dække mange behov. Væskesug: Designet til at minimere risikoen for væskeblokering i sugeinstrumentet. Nænsom sugning: Minimerer risikoen for vævsgreb. Slidsmundstykket (Vällfors) og Maxi (dobbeltlumen) er designede til at mindske sår- eller vævsskade og levere en ønsket sugekapacitet. Nem adgang i operationssår: Forskellige sugemundstykker er afpasset den enkelte operation. Mundstykkerne er hvide, så de er mere synlige i dybe sår end gennemsigtige sugemundstykker.

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Referencer

1. Vallfors, B., Abstract: Optimal suction system for dissection work in surgery. Acta Chir Scand, 1976. 142(1): p. 94-6.
2. Laabs, W.A. and H.G. Appel, Atraumatic aspirators. Chirurgische Praxis, 2002. 59(3): p. 373-379. In German
3. Ray, C.D. and R. Levinson, Abstract: Noise pollution in the operating room: a hazard to surgeons, personnel, and patients. J Spinal Disord, 1992. 5(4): p. 485-8.
4. Azizi, J., et al. Abstract, Uphill grime: process improvement in surgical instrument cleaning. Aorn j, 2012. 96(2): p. 152-62.
5. Robinson, A.H., et al., Suction tip contamination in the ultraclean-air operating theatre. Ann R Coll Surg Engl, 1993. 75(4): p. 254-6.
6. Woodey, R., et al., Correspondence: A dangerous problem with plastic Yankauer suckers. Anaesth Intensive Care, 1995. 23(4): p. 519-20.