


Transfusionsaggregat

- Extra stor filteryta på 17,2 cm² ger en effektiv filtrering samt tillåter en hög transfusionshastighet
- Olika slanglängder mellan 180 - 320 cm
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Stabil rullklämma med maximal precision garanterar ett jämt och säkert flöde
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till transfusionspåsar
- Blodfilter 200µm
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock
- Tillgänglig med dubbla spike samt med/utan 3-vägskran/injektionsmembran
- MR kompatibel

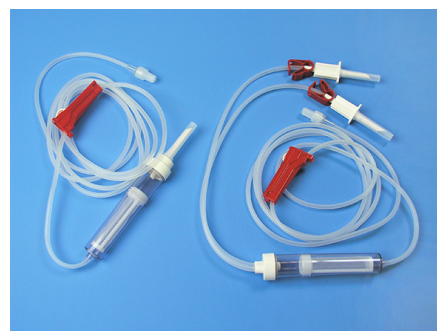

Art. nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500202	Transfusionsaggregat 180 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL60500202	Transfusionsaggregat 180 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500200T	Transfusionsaggregat 180 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500300	Transfusionsaggregat 180 cm, dubbla spike	PVC-fri	50/50*
60SRL60500300T	Transfusionsaggregat 180 cm, dubbla spike	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500204	Transfusionsaggregat 180 + 12 cm med injektionsmembran	PVC-fri	10/100*
60MR60500231	Transfusionsaggregat 180 cm, 3-vägskran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR60500210T	Transfusionsaggregat 220 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500213	Transfusionsaggregat 250 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500203	Transfusionsaggregat 320 cm	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: DEHP-fri PVC/TPE Droppkammare: DEHP-fri PVC/SB Spike: ABS Blodfilter: PA Rullklämma: ABS/PS	Slangklämma: PP Flowstop: ABS/PE Konnektor: ABS Luer-Lock: ABS Trevägskran: PC/HDPE Injektionsmembran: PC/Silikon	Sterilisering: EO Transfusionsaggregat. 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack * = minsta kvantitet/beställning
---	--	---