

# Ny beholder gir lavere lydnivå



serres

Serres new canister NO 20230731 rev 1

## Serres har modifisert og forbedret beholderne sine

De nye beholderne har en modifisert vakuumkanal som gjør at lydnivået reduseres i tillegg til at den lyden som høres, oppleves som mykere enn den tidligere lyden.

Den nye beholderen fra Serres gir en betydelig lavere lyd enn den gamle. I sammenligning med de vanligste produktene på markedet, viser det seg at ved samme sugeflyt, gir Serres sin nye beholder alltid lavest lydnivå.




Den nye modellen

### ENKLERE AVLESING



De nye beholderne har større tekst og tykkere leselinjer

En ytterligere forbedring til lydnivået, er det nye designet på den grå seriekoblingen til flergangsbruk.

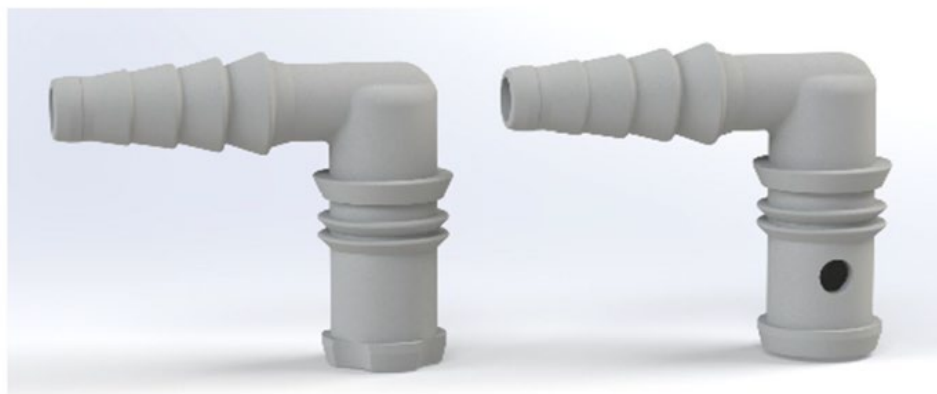

NY

GAMMEL

Den gamle koblingen har en rund krage og et hull i foten, mens den nye har en forbedret innvendig kanal og kjennes igjen på den kantete kragen nederst

Husk at alle de nye produktene er fullt kompatible med hverandre, både gammel og ny kobling, med en hvilken som helst beholder (både ny og gammel)

Best effekt (lydreduksjon) får du med en NY kobling sammen med en NY beholder

#### BEDRE PLASS



Den nye koblingen er litt høyere og gir bedre plass til fingrene ved oppkobling og montering

Vi beholder det samme artikkelnummeret og størrelsen på pakningen.

