


# Produktveiledning for steriltforsyningsavdelingen

Omfattende produktvalg og brukerstøtte



**MEDI PLAST**

## Sterilisering på beste måte

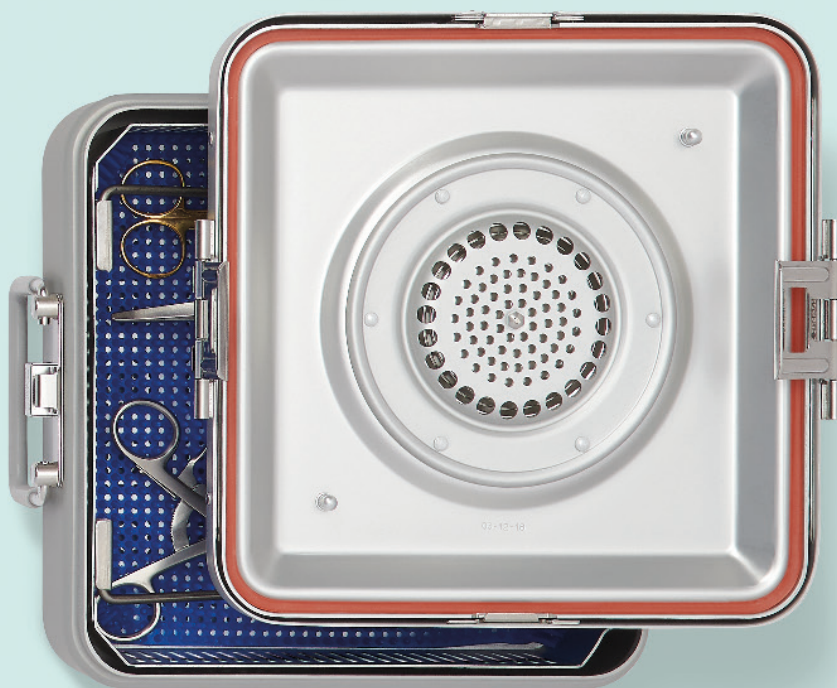



**Bruk denne omfattende veiledningen i samarbeid med din Medline-representant.** Sammen kan dere utstyre sterilforsyningsavdelingen med det utvalget, den kvaliteten og den verdien som er perfekt for din systematiske tilnærming.

# Nøye omsorg

Få er klar over hvor mye arbeid som kreves under steriliseringsprosesser, der målet er å eliminere 99, 999 % av patogener.

Medline tar ikke sterilisering av kirurgiske instrumenter for gitt. Vi forstår utfordringene, og bruker en systematisk tilnærming til å sette sammen et bredt utvalg av nøkkelutstyr for hvert trinn av sterilsentralprosessen.

## Sterilisering

Steriliseringscontainer	5
Steriliseringskurv	6
Steriliseringstilbehør	9
Steriliseringsomslag	10
Tilbehør til steriliseringsomslag	12

## Beskyttende Plagg

Hansker	14
Frakker og skotrekk	16
Ansiktsbeskyttelse	19
<b>Gulvsikkerhet</b>	
Gulvmatte	20

# Sterilisering

Å gå fra individuelle komponenter til sammensatte og steriliserte sett, er der sterilforsyningsavdelingen overgår fra å klargjøre instrumenter til å leverer utmerket pasientomsorg. Medline hjelper deg med å utføre alle mål med sikkerhet, bærekraft og verdi som fokus.

# SteriSet-steriliseringscontainere<sup>1</sup>

## Ekstra beskyttelse med dobbeltlokk

- Slitesterkt rustfritt stål/aluminium beskytter verdifulle instrumenter og den indre ventilen
- Plassbesparende design tillater inntil 3 containere å bli stablet i sterilisatoren
- Holder støv, fuktighet og andre forurensende stoffer borte, for bedre hygiene

## Ventil i rustfritt stål

- Bidrar med å sikre sterilitet og redusere avfall
- Eliminerer behovet for engangspapirfiltre
- Trykkaktivert mekanisme som åpner seg automatisk under forvakuum-dampsteriliseringssyklusen
- Ventilen forblir lukket etter sterilisering for å skape en ugjennomtrengelig barriere og holde innholdet sterilt

## Manipuleringssikker forseglinger

- Varmeaktivert og intelligent ThermoLoc-låsesystem som låser lokket på plass under steriliseringssyklusen
- Eliminerer behovet for engangslås i plast
- Gir en forsegling som viser om den har blitt manipulert
- Sikrer at containeren forblir forseglet til den blir åpnet i operasjonssalen
- Allsidige fargekodede håndtak og etiketter forenkler valg av container

## Kondensavløp for tunge belastninger

- Ideelt for sett på over 8 kg, eller for utstyr tilpasset vandamp
- Åpnes når sterilisatoren når 130 °C, slik at gjenværende kondens slippe ut av containeren
- Når sterilisatoren har kjølt seg ned til 110 °C, lukker drenet seg for å sikre en tørr og fullstendig beskyttet instrumentlast



Før



Etter

## SteriSet full størrelse

Utformet til å håndtere alle instrumenter for store operasjoner.  
Dimensjonene nedenfor viser ytre lengde x bredde x høyde.

### Med flat bunn

Varenr. Aluminium- lokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA60	TVE60	59,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/stk.
TVA61	TVE61	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/stk.
TVA62	TVE62	59,6 x 27,5 x 16,0 cm	1/stk.
TVA64	TVE64	59,6 x 27,5 x 21,0 cm	1/stk.
TVA66	TVE66	59,6 x 27,5 x 27,0 cm	1/stk.

### Med kondensavløp

Varenr. Aluminium- lokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA67	TVE67	59,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/stk.
TVA68	TVE68	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/stk.
TVA69	TVE69	59,6 x 27,5 x 18,0 cm	1/stk.
TVA6A	TVE6A	59,6 x 27,5 x 23,0 cm	1/stk.
TVA6B	TVE6B	59,6 x 27,5 x 29,0 cm	1/stk.

## SteriSet trekvarts størrelse

### Med flat bunn

Varenr. Aluminiumlokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA41	TVE41	45,6 x 28,0 x 14,0 cm	1/stk.
TVA42	TVE42	45,6 x 28,0 x 16,0 cm	1/stk.

### Med kondensavløp

Varenr. Aluminiumlokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA48	TVE48	45,6 x 28,0 x 14,0 cm	1/stk.
TVA49	TVE49	45,6 x 28,0 x 18,0 cm	1/stk.



TVA60



TVA67



TVA41

## SteriSet halv størrelse

### Med flat bunn

Varenr. Aluminium- lokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA30	TVE30	29,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/stk.
TVA31	TVE31	29,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/stk.
TVA32	TVE32	29,6 x 27,5 x 16,0 cm	1/stk.
TVA34	TVE34	29,6 x 27,5 x 21,0 cm	1/stk.
TVA36	TVE36	29,6 x 27,5 x 27,0 cm	1/stk.

### Med kondensavløp

Varenr. Aluminium- lokk	Varenr. Rustfritt stållokk	Beskrivelse	Pakning
TVA37	TVE37	29,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/stk.
TVA38	TVE38	29,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/stk.
TVA39	TVE39	29,6 x 27,5 x 18,0 cm	1/stk.
TVA3A	TVE3A	29,6 x 27,5 x 23,0 cm	1/stk.
TVA3B		29,6 x 27,5 x 29,0 cm	1/stk.

## TASKIT Container

### Ministørrelse – ideell for oftalmiske instrumenter

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
KVA10	28,5 x 13,5 x 6,0 cm	1/stk.
KVA11	28,5 x 13,5 x 8,0 cm	1/stk.
KVA12	28,5 x 13,5 x 10,0 cm	1/stk.

## Manipuleringssikker forseglinger

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
DPKSIE1	grønn	500/eske
DPKSIE2	blå	500/eske
DPKSIE3	rød	500/eske
DPKSIE4	gul	500/eske
DPKSIE5	hvit	500/eske

DPKSIE3



## SteriSet Sterilisering fargekoder

Oppnå effektivitet i operasjonssalen med fargekoder. Koordiner fargene for alle brett. Gruppér containeren etter prosedyre eller operasjonsteam med justerbare fargekoder.

- Promoter standarder for beste praksis: Organiser sett etter prosedyre, lege, felt eller operasjonsteam.
- Øk effektiviteten: Hjelper de ansatte med å organisere og plukke instrumenter mer nøyaktig.

### Håndtak



### ID-etiketter





# Steriliseringskurv

## Containerkurv i rustfritt stål

Velg den perfekte størrelsen for de fleste instrumentsett.

### For halvstore container

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
SCD 333	24,5 x 24,5 x 3,0 cm	1/stk.
SCD 336	24,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/stk.
SCD 3310	24,5 x 24,5 x 10,0 cm	1/stk.

### For trekvarts container

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
SCD 433	40,0 x 25,0 x 3,0 cm	1/stk.
SCD 436	40,0 x 25,0 x 6,0 cm	1/stk.
SCD 4310	40,0 x 25,0 x 10,0 cm	1/stk.



### Full størrelse container


Varenr.	Beskrivelse	Pakning
SCD 633	51,5 x 24,5 x 3,0 cm	1/stk.
SCD 636	51,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/stk.
SCD 6310	51,5 x 24,5 x 10,0 cm	1/stk.
SCDD 636	48,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/stk.

## Tilbehør til steriliseringscontainer

### Silikonmatter

Gi støtte og beskyttelse til delikate kirurgiske instrumenter med disse silikonmattene. De passer perfekt i Medline container

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
MDNSNS315	12,7 x 24,1 cm	1/stk.
MDNSNS335	24,1 x 24,1 cm	1/stk.
MDNSNS435	39,4 x 24,1 cm	1/stk.
MDNSNS635	47 x 24,1 cm	1/stk.

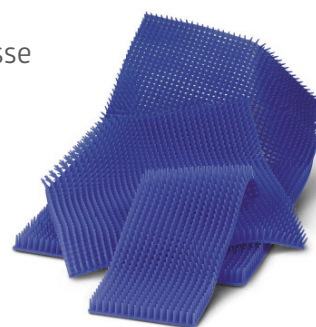

### Klistretiketter

Passer perfekt i slissen på enden av SteriSet Container

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
DPCIS13	Lås på høyre side	500/eske
DPCIS02	Lås på toppen	500/eske



# Gemini Steriliseringsomslag<sup>2</sup>

## Sterkere og enklere å drapere

Gemini omslag er mer motstandsdyktig mot rifter og slitasje, og yter bedre enn andre SMS-omslag. Det er veldig mykt og enkelt å brette sammen, som gjør det lett å arbeide med.

## Loer lite og bedre klebeegenskaper

Overflaten har god kontakt med steriliseringsteip. Gemini omslag loer lite, og bidrar til å bevare integriteten til sterile pakker.

## Laget av unikt SSMMS-materiale med påvist barrierebeskyttelse

Geminis sterke konstruksjon som består av flere lag og 100 % polypropylen (testet i samsvar med EN 11607-1 og EN 868-2) gir en unik barrierebeskyttelse mot væske og partikler.

## Allsidig

Medlines Gemini omslag er beregnet til bruk i alle større steriliseringsprosesser, inkludert:

### GEM0-GEM5

- Forvakuum-dampsykluser
- Tyngdekraft-dampsykluser

### GEM1-GEM5

- Etylenoksid (EtO) sterilisering
- STERRAD® sterilisering
- STERIS V-PRO® sterilisering i lav temperatur
- STERIZONE® VP4-sterilisering.

## WRAP Sertifisering

Gemini omslag er produsert på et WRAP-sertifisert anlegg. En del av Medline's bedriftsagenda for samfunnsansvar er å promotere og respektere arbeids- og menneskerettigheter. Du finner en mer detaljert beskrivelse av WRAPs 12 prinsipper på nettstedet deres: [www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



## Gemini Enkel Steriliseringsomslag

Gemini Enkel Steriliseringsomslag er en flott løsning for steriltforsyningsavdelingen der to omslag brukes til å pakke inn en medisinsk enhet eller et instrumentsett.



	<b>GEMO</b> 40 gr	<b>GEM1</b> 47 gr	<b>GEM2</b> 54 gr	<b>GEM3</b> 61 gr	<b>GEM4</b> 71 gr	<b>GEM5</b> 75 gr
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118-EU 1,000 stk./eske	GEM1118-EU 1 000 per/eske	GEM2118-EU 1 000 per/eske	GEM3118-EU 600 per/eske		
<b>51 x 51 cm</b>	GEM0120-EU 1 000 stk./eske	GEM1120-EU 1 000 per/eske	GEM2120-EU 500 per/eske	GEM3120-EU 250 per/eske		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124-EU 500 stk./eske	GEM1124-EU 500 per/eske	GEM2124-EU 500 per/eske	GEM3124-EU 250 per/eske	GEM4124-EU 250 per/eske	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130-EU 300 stk./eske	GEM1130-EU 300 per/eske	GEM2130-EU 300 per/eske	GEM3130-EU 200 per/eske	GEM4130-EU 250 per/eske	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136-EU 300 stk./eske	GEM1136-EU 300 per/eske	GEM2136-EU 300 per/eske	GEM3136-EU 150 per/eske	GEM4136-EU 150 per/eske	GEM5136-EU 144 per/eske
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140-EU 250 stk./eske	GEM1140-EU 250 per/eske	GEM2140-EU 250 per/eske	GEM3140-EU 150 per/eske	GEM4140-EU 150 per/eske	GEM5140-EU 96 per/eske
<b>114 x 114 cm</b>	GEM0145-EU 250 stk./eske	GEM1145-EU 250 per/eske		GEM3145-EU 100 per/eske	GEM4145-EU 100 per/eske	GEM5145-EU 96 per/eske
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148-EU 250 stk./eske	GEM1148-EU 250 per/eske	GEM2148-EU 100 per/eske	GEM3148-EU 50 per/eske	GEM4148-EU 50 per/eske	GEM5148-EU 48 per/eske
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154-EU 100 stk./eske	GEM1154-EU 100 per/eske	GEM2154-EU 100 per/eske	GEM3154-EU 50 per/eske	GEM4154-EU 50 per/eske	GEM5154-EU 48 per/eske
<b>137 x 183 cm</b>	GEM0172-EU 100 stk./eske			GEM3172-EU 50 per/eske	GEM4172-EU 50 per/eske	

## Gemini Interfoliert Steriliseringsomslag

Gemini Interfoliert Omslag gir steriltforsyningsavdelingen både flerlags-teknologi og fargevariasjoner, som kan brukes ved sekvensiell innpakning. Denne løsningen kombinerer riftmotstand og sikkerhet. Det er beregnet til bruk i alle større steriliseringsprosesser.



	<b>GEM1</b> 47 gr	<b>GEM2</b> 54 gr	<b>GEM3</b> 61 gr	<b>GEM4</b> 71 gr
<b>61 x 61 cm</b>	GEM1124INT-EU 500 stk./eske	GEM2124INT-EU 500 per/eske	GEM3124INT-EU 250 per/eske	GEM4124INT-EU 250 per/eske
<b>76 x 76 cm</b>	GEM1130INT-EU 300 stk./eske	GEM2130INT-EU 300 per/eske	GEM3130INT-EU 200 per/eske	GEM4130INT-EU 250 per/eske
<b>91 x 91 cm</b>	GEM1136INT-EU 300 stk./eske	GEM2136INT-EU 300 per/eske	GEM3136INT-EU 150 per/eske	GEM4136INT-EU 150 per/eske
<b>102 x 102 cm</b>	GEM1140INT-EU 250 stk./eske	GEM2140INT-EU 250 per/eske	GEM3140INT-EU 150 per/eske	GEM4140INT-EU 150 per/eske
<b>122 x 122 cm</b>	GEM1148INT-EU 250 stk./eske	GEM2148INT-EU 100 per/eske	GEM3148INT-EU 50 per/eske	GEM4148INT-EU 50 per/eske
<b>137 x 137 cm</b>	GEM1154INT-EU 100 stk./eske	GEM2154INT-EU 100 per/eske	GEM3154INT-EU 50 per/eske	GEM4154INT-EU 50 per/eske
<b>137 x 183 cm</b>				GEM4172INT-EU 50 stk./eske

# Gemini Dobbel Steriliseringsomslag

Gemini Dobbel Omslag kan gi deg større trygghet under steriliseringsprosessen. To omslag som er bundet sammen gir eksepsjonell styrke og forbedrer effektiviteten. De to ulike fargene gjør det enkelt å se hull og hjelper med å raskt se forskjellen på ulike instrumentsett.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEMO118T-EU 500 stk./eske	GEM1118T-EU 500 per/eske	GEM2118T-EU 500 per/eske	GEM3118T-EU 300 per/eske		
51 x 51 cm	GEMO120T-EU 500 stk./eske	GEM1120T-EU 500 per/eske	GEM2120T-EU 250 per/eske	GEM3120T-EU 125 per/eske		
61 x 61 cm	GEMO124T-EU 250 stk./eske	GEM1124T-EU 250 per/eske	GEM2124T-EU 250 per/eske	GEM3124T-EU 100 per/eske	GEM4124T-EU 100 per/eske	
76 x 76 cm	GEMO130T-EU 150 stk./eske	GEM1130T-EU 150 per/eske	GEM2130T-EU 150 per/eske	GEM3130T-EU 75 per/eske	GEM4130T-EU 100 per/eske	
91 x 91 cm	GEMO136T-EU 150 stk./eske	GEM1136T-EU 150 per/eske	GEM2136T-EU 150 per/eske	GEM3136T-EU 75 per/eske	GEM4136T-EU 75 per/eske	GEM5136T-EU 72 per/eske
102 x 102 cm	GEMO140T-EU 100 stk./eske	GEM1140T-EU 100 per/eske	GEM2140T-EU 100 per/eske	GEM3140T-EU 75 per/eske	GEM4140T-EU 75 per/eske	GEM5140T-EU 48 per/eske
114 x 114 cm	GEMO145T-EU 100 stk./eske	GEM1145T-EU 100 per/eske		GEM3145T-EU 50 per/eske	GEM4145T-EU 50 per/eske	GEM5145T-EU 48 per/eske
122 x 122 cm	GEM5145T-EU 48 stk./eske	GEM1148T-EU 100 per/eske	GEM2148T-EU 50 per/eske	GEM3148T-EU 30 per/eske	GEM4148T-EU 30 per/eske	GEM5148T-EU 24 per/eske
137 x 137 cm	GEMO154T-EU 50 stk./eske	GEM1154T-EU 50 per/eske	GEM2154T-EU 50 per/eske	GEM3154T-EU 30 per/eske	GEM4154T-EU 30 per/eske	GEM5154T-EU 24 per/eske
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 stk./eske	GEM4172T-EU 30 per/eske	GEM5172T-EU 24 ea/cs

## Omslagstilbehør

### Støvdeksel

Disse støvdekslene beskytter instrumentbrett mot støv og forurensninger. De er laget av sterkt polyetylen av høy kvalitet, og er selvforsegrende.

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



### Papirunderlag<sup>3</sup>

Papirunderlag til instrumentbrett bidrar med å absorbere kondens under steriliseringen.

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



### Transportbrett<sup>4</sup>

- Laget av hardplast for å tillate luftstrøm
- Hjelper med å redusere eksponerte trådhyller
- Hjelper med å beskytte instrumentbrett mot hull eller rifter under sterilisering, lagring og transport

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



# Beskyttende Plagg

Et typisk helsemiljø inneholder ofte mange ulike stoffer og mikroorganismer. Gi en effektiv barriere mot disse stoffene, og det høyeste nivået av sikkerhet med Medlines beskyttende plagg. Hver enkelt vare er designet med fokus på beskyttelse og komfort.



## Undersøkelseshansker<sup>5</sup>

### SensiCare® Pro 400 mm nitrilhansker med forlenget mansjett

Våre SensiCare Pro nitrilhansker gir enestående og allsidig beskyttelse, passform og ytelse. Disse hanskene er laget for personale som anvender sterke kjemikalier til generelle oppgaver, rengjøringsrutiner, dekontaminering og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter.

- Lengre mansjetter på 400 mm gir ekstra beskyttelse mellom mansjettene og ermene
- Full teksturert grep forbedrer berøringssensitiviteten
- God ytelse ved testing av punksjonsmotstand
- Kjemoterapi testet
- PPE-sertifisert for ekstra beskyttelse



Varenr.	Beskrivelse	Pakning
PRO400XS	SensiCare Pro 400 mm nitrilhansker, x-small	50/eske, 10 esker/kartong
PRO400S	SensiCare Pro 400 mm nitrilhansker, small	50/eske, 10 esker/kartong
PRO400M	Pro 400 mm nitrilhansker, medium	50/eske, 10 esker/kartong
PRO400L	SensiCare Pro 400 mm nitrilhansker, large	50/eske, 10 esker/kartong
PRO400XL	SensiCare Pro 400 mm nitrilhansker, x-large	50/eske, 10 esker/kartong

EN ISO 374-5-2016	Nivå
Beskyttelse mot gjennomtrenging av bakterier og soppsporer	godkjent
Beskyttelse mot gjennomtrenging av virus	godkjent



### SensiCare® nitrilhansker med forlenget mansjett og utmerket berøringssensitivitet

- Slitesterk nitrilbeskyttelse
- Forlenget mansjett for ekstra beskyttelse
- PPE-sertifisert for ekstra dekning
- Komfort og lateks i én nitrilhanske




Varenr.	Beskrivelse	Pakning
MDSEXTXS	SensiCare nitrilhansker med forlenget mansjett, x-small	100/eske, 10 esker/kartong
MDSEXTS	SensiCare nitrilhansker med forlenget mansjett, small	100/eske, 10 esker/kartong
MDSEXTM	SensiCare nitrilhansker med forlenget mansjett, medium	100/eske, 10 esker/kartong
MDSEXTL	SensiCare nitrilhansker med forlenget mansjett, large	100/eske, 10 esker/kartong
MDSEXTXL	SensiCare nitrilhansker med forlenget mansjett, x-large	90/eske, 10 esker/kartong

## Ugjennomtrengelige omslagsfrakker - Veiledning


De ansatte vet akkurat hva de trenger for å beskytte seg selv og pasientene sine, men tidsrestriksjoner og mangel på praktiske løsninger kan føre til at de ikke alltid følger veiledningene for frakker. Medlines beskyttende plagg er raskt og enkelt å ta på og av, mens de samtidig gir full beskyttelse og komfort.

**Enkelt å ta på og av. Utmerket beskyttelse. Komfort som puster.**

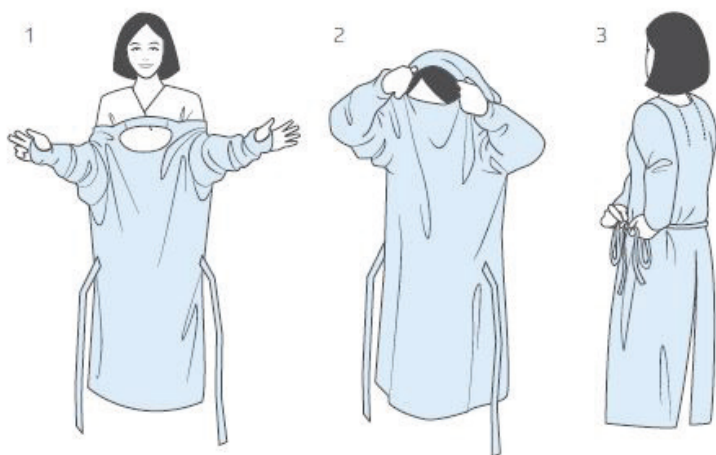

### Påkledning

1. Begynn ved å plassere armene i ermene med tomlene i tommelhullene.
2. Dra frakken over hodet.
3. Knyt snøringen i linningen bak.

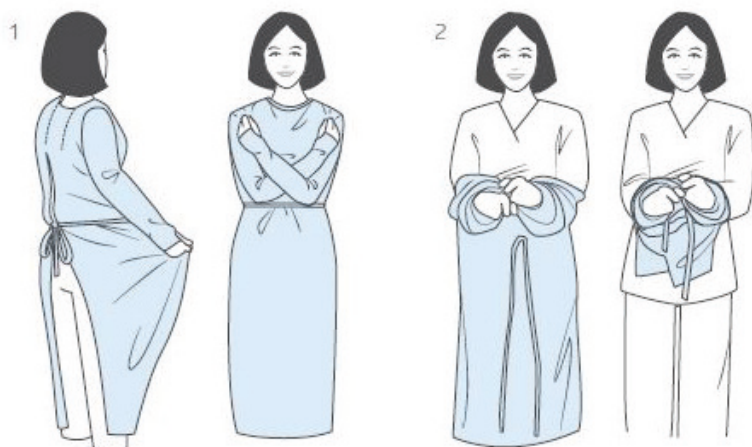

### Avkledning

1. Dra i frakken ved midjen for å løsne snøringen.
2. Dra i frakken ved brystet, med armene krysset.
3. Fortsett å rulle frakken nedover og til en ball, og kasser den etter bruk.

**Når du ikke må knyte opp snøring i halsen, reduserer du sjansen for krysskontaminering fra hansker til håret eller nakken.**

# Ugjennomtrengelige omslagsfrakker

CRIE404xC- og CRIE500x-serien har blitt testet i henhold til EN 16523-1 mot rengjøringsmiddelet glukoprotamin, og er egnet for beskyttelse mot langvarig kontakt med vann og mot rengjøringsprodukter.

## Lett ugjennomtrengelig omslagsfrakk av bi-laminat

- Snøring i livet og halsen
- Strikkede mansjetter

Varenr.	Størrelse	Farge	Pakning
CRIE4040C	L	Gul	10/pose, 100/kartong
CRIE4041C	XL	Gul	10/pose, 100/kartong



CRIE4040C

## Ugjennomtrengelige omslagsfrakker av polyetylen

- Design som trekkes over hodet
- Mansjetter med tommelhull
- Brettet individuelt i en dispenser eske

Varenr.	Størrelse	Farge	Pakning
CRIE5010	L	Blå	1/pose, 15/eske, 75/kartong
CRIE5011	XL	Blå	1/pose, 15/eske, 75/kartong



CRIE5010

## Engangsforkle av polyetylen

- Brukes over frakker som ikke er væskeressistente, eller over arbeidsuniformer som en praktisk løsning for brukere som trenger ekstra beskyttelse mot væske til en lavere pris

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONE24274W	Medium vekt, 71,1 x 116,8 cm, pakket individuelt, dispenser eske	50/eske, 250/kartong



NONE24274W



# Fottøy<sup>6</sup>

## Skotrek

Skotrek forhindrer miljøkontaminering og reduserer overføring av mikroorganismer. Produktene er laget av polyetylen- eller polypropylenmaterialer og noen modeller har tilleggsbeskyttelse mot væske.

Varenr.	Størrelse	Materiale	Egenskaper	Pakning
CRIE2010	One size passer de fleste	Polyetylenfolie	Ugjennomtrengelig	100/pose, 1000/kartong
CRIE2020	One size passer de fleste	Polyetylenfolie og polypropylen (SPP)	Ugjennomtrengelig	100/pose, 200/kartong



CRIE2010



CRIE2020

## Skotrek

Medlines skotrek gir forbedret dekning og økt væskebeskyttelse. Produktene dekker skoen og benet hele veien opp til kneet og har et praktisk one size-design som passer de fleste, med en strukturert undersåle. De har også borrelåslukking eller elastiske stropper rundt ankelen til å holde dem på plass og sikre god beskyttelse.

Varenr.	Størrelse	Egenskaper	Pakning
NONE27143XL	One size passer de fleste	Væskeressistent	50/eske, 150/kartong
NONE27144	One size passer de fleste	Ugjennomtrengelig	50/eske, 150/kartong

### NONE27143XL

- Væskeressistent materiale over ankelen
- Væskebeskyttelse nederst
- Forseglede sømmer på foten



NONE27143XL

### NONE27144

- Ugjennomtrengelig PE-belagt polypropylen- materiale
- Væskebeskyttelse nederst
- Borrelås gjør den enkel å tilpasse



NONE27144

# Medlines innovative forpakning er utformet for å gjøre det enkelt for de ansatte å raskt identifisere mange ulike og viktige maskeegenskaper.

## Fargekodet emballasje

**Lilla:** Type IIR væsker resistente munnbind


**Grønn:** Type II kirurgiske munnbind

**Oransje:** Type II undersøkelsesmunnbind

**Blå:** Åndedretsvern

## Perforering og en praktisk tommelutskjæring

Enkel å åpne og få ut.

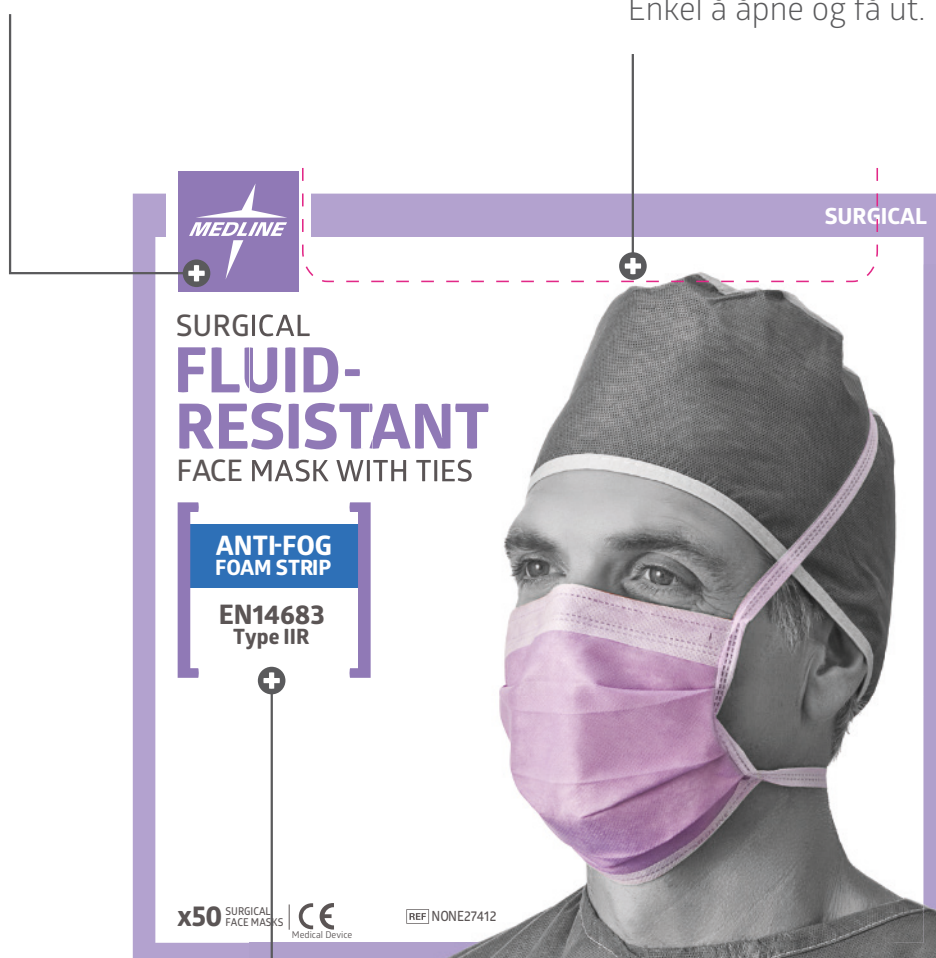

## Produktklassifisering

For korrekt valg og behov

# Ansiktsbeskyttelse

## Væskeresistent munnbind med visir<sup>7</sup>



NONE27410EL

Dette munnbindet med visir og ørestrikk gir beskyttelse mot sprut og væske

- Optisk klart visir av polyester
- Antidugg skumstripe

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONE27410EL	væskeresistent munnbind med ørestrikk og visir	25/eske, 4/kartong

## Væskeresistent munnbind med visir<sup>7</sup>



NONE27710

Dette munnbindet med visir og ørestrikk gir beskyttelse mot sprut og væske

- Optisk klart visir av polyester
- Antidugg skumstripe

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONE27710	Max X væskeresistent munnbind med visir og snøring	25/eske, 4/kartong
NONE27410	Væskeresistent munnbind med visir og snøring	25/eske, 4/kartong

## Væskeresistent munnbind med ørestrikk<sup>7</sup>



NONE27412EL

- Antidugg skumstripe
- Kan brukes sammen med andre sprutresistente produkter, slik som visir eller vernebriller

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONE27412EL	Væskeresistent munnbind med ørestrikk	25/eske, 4/kartong

## utskiftbare engangslinser




NONFRAME

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONFRAME	Flerbruksinnfatninger, tilgjengelig i ulike farger	100/eske

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONLENS	Utskiftbare engangslinser	250/eske

## Visir

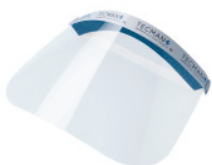

NONEFS500

- Antidugg skumstripe
- Elastisk hodebånd med skumgummi
- Ikke laget av naturlateks

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
NONEFS500	Engangsvisir i full lengde med elastisk pannebånd og skumkant	96/kartong

# Oppgrader sikkerhetsnivået innen CSSD

Når man arbeider i våte miljøer kan dette føre til daglige risiko for å skli, snuble og for fall. På Sterilforsyningsavdeling; og spesielt i dekontamineringsområdet der det samles opp mye væske, kan utsette de ansatte for farer. Medlines løsninger for gulvsikkerhet tar for seg både fallfarer og behov for rask og trygg fjerning av væske.

## Liqui-Loc™ Gulvmatte



- Enkel avhending for hygiene og sikkerhet
- Ugjennomtrengelig, antisklisikker underside for å stå på eller instrumentunderlag
- Dryppfri, og med absorberende materiale som holder på væske




Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Absorberingsevne	Antiskli	Pakning
ORLLPBS	Liqui-Loc, small	71,1 x 101,6 cm	2,2 L	Ja	13/kartong
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 L	Ja	10/kartong
ORLLPBL	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3,9 L	Ja	8/kartong

## Dobbelttidig Absorberende Gulvmatte



- Promoterer hygiene med et effektivt absorberende lag
- Gjør rengjøringen mer effektiv og absorberer væskesøl på gulvet
- Ikke stå på matten

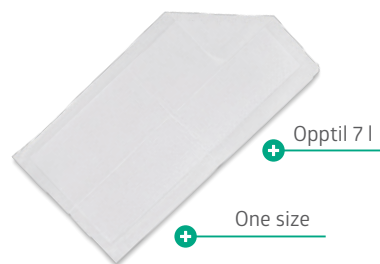

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Absorberingsevne	Antiskli	Pakning
ORDSFMAT	Dobbelttidig Absorberende Gulvmatte	75 x 38 cm	7 L	nr.	50/kartong

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte din Medline-salgrepresentant, eller besøke nettsiden vår: [medline.eu](http://medline.eu)



Distribuerad av:  
Mediplast AS  
Tollbugata 115  
3041 Drammen  
Norge  
T 32 88 11 00

[mediplast@mediplast.no](mailto:mediplast@mediplast.no)  
[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

FØLG OSS



**MEDI PLAST**

<sup>1</sup> SteriSet Container er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>2</sup> Gemini Omslag er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>3</sup> Papirunderlag er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>4</sup> GEMTRAY transportbrett er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>5</sup> Medline undersøkeshansker er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>6</sup> Skobeskyttelse og skotrekk er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



<sup>7</sup> NONE27xxx er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren. Oversettelse av dette dokumentet ble utført av Mediplast AS. For den Medline-verifiserte engelske versjonen, vennligst kontakt din distributør. © 2021 Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054\_NO 08/2021